

**POZOR**

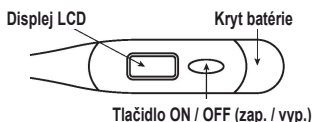
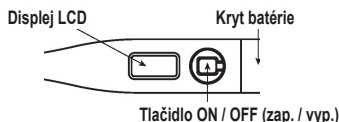
- △ Pred použitím meracieho prístroja si pozorne prečítajte návod na použitie.
- △ Nebezpečenstvo zadusenía: Prehltutie krytu batérie, alebo batérie je veľmi nebezpečné. Deti môžu používať teplomer iba vtedy, keď sú v prítomnosti dospelých osôb.
- △ Nepoužívajte teplomer na meranie teploty v uchu.
- △ Tento teplomer je určený na meranie telesnej teploty v ústach, podpazuší alebo konečníku.
- △ Neskladujte teplomer pri vysokých teplotách, pretože by mohol explodovať.
- △ Poznámka: použitie krytu na snímači môže spôsobiť zmenu výsledku teploty: 0,1 °C od skutočnej telesnej teploty.
- △ Odporúča sa skontrolovať funkčnosť teplomeru každé dva roky.
- △ Ak nebudete teplomer dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.

**POZOR POTREBNÉ PREČITAŤ PRED POUŽITÍM TEPLOMERA**

Tento digitálny teplomer zaručuje rýchle a presné meranie teploty tela. Pred použitím si prosím pozorne neprečítajte návod, aby ste sa oboznámili so všetkými funkciami teplomeru a zaistili si dlhodobý presný výsledok merania. Tento teplomer je vyrobený v súlade so systémom EN12470-3: 2000 + A1: 2009, ASTM E1112-00. Výrobca má certifikáty ISO 13485: 2012 + AC: 2012.

**OBSAH BALENIA**

Teplomer, návod na použitie, puzdro

**POPIS ZARIADENIA****Model HF-600****Model HF-700***Obr. 1***UPOZORNENIE**

Teplomer neohýbajte ani nehádzte. Teplomer nie je nárazuvzdorný.

Senzor nevytvárajte, aby ste ho dezinfikovali.

Nevystavujte teplomer priamemu slnečnému žiareniu alebo vysokým teplotám.

Teplomer nerozoberajte. Výmenu batérií nájdete v časti „Výmena batérie“.

Nenechávajte teplomer v blízkosti mikrovlnných rúr alebo mobilných telefónov, aby nespôsobili elektromagnetické rušenie.



Konštantný prúd

Typ zariadenia B

△ Poznámka! Prečítajte si pokyny.

LOI Sériové číslo

Výrobca

European Authorized Representative

**TECHNICKÉ DÁTA**

Rozsah: 32°C - 42,9°C

Presnosť: ±0,1°C v zmysle 35,5°C - 42°C, ±0,2°C mimo tohto

rozsahu. Pri izbovej teplote 18°C - 28°C

Čas merania: 60 sekúnd.

Displej: kvapalný / kryštálikový

Pamäť: Uloženie posledného výsledku merania

Batéria: 1 x 3 VDC LR41 / SR41 / UCC392

Výdrž batérie: približne 200 hodín, plynulý chod

Rozmery: 12,4 x 1,8 x 0,9 cm

Hmotnosť: približne 10 gramov (vrátane batérie)

**Podmienky používania:**

Teplota: 5 °C - 40 °C

Relatívna vlhkosť: 15-95% RH

**Skladovacie a prepravné podmienky:**

Teplota: MIN-20 °C (MAX55 °C)

Relatívna vlhkosť: 15-95% RH)

Vodotesnosť: IP22

Klasifikácia: Urq typ B

**MANIPULÁCIA**

1. Stlačte tlačidlo ZAP / VYP vedľa LCD displeja. Keď sa na obrazovke objavia všetky prvky obrazovky, budete počuť pípnutie a potom sa zobrazí posledný uložený výsledok merania. Po dokončení autotestu prejde teplomer do režimu merania.

**Poznámka:** Ak je výsledok merania nižší ako 32 °C, na displeji sa zobrazí „Lo“; ak je výsledok merania väčší ako 42,9 °C, na displeji sa zobrazí „Hi“.

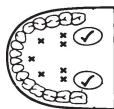
2. Umiestnite teplomer na vybrané miesto merania (ústa, konečník alebo podpazušie):

**a) Meranie v ústach:** umiestnite teplomer pod jazyk, kde sú na obrázku 2 zobrazené symboly „V“.

Zatvorte ústa a rovnomerne dýchajte nosom, aby vdychovaný a vydychovaný vzduch nemal vplyv na výsledok merania. Správny teplotný rozsah je 35,7 °C - 37,3 °C.

**b) Meranie vo konečníku:** namažte vazelinou, striebornou špičkou sondy pre ľahké meranie. Jemne zatlačte senzor do hĺbky 1 cm. Platný teplotný rozsah je 36,2 °C - 37,7 °C.

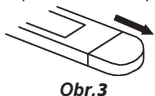
**c) meranie v podpazuší:** utrite podpazušie do sucha, vložte teplomer do podpazušia a pritlačte teplomer rukou k telu / a Z lekárskeho hľadiska bude meranie v podpazuší vždy nepresné a nemalo by sa používať ak potrebujete presný výsledok merania. Normálny teplotný rozsah je 35, 2°C - 36,7°C.

*Obr. 2*

3. Počas merania blíka symbol meracej jednotky. Keď symbol prestane blikať, zaznie pípnutie asi na 10 sekúnd. Na displeji sa zobrazí výsledok merania. Bez výnimky, je potrebný čas merania (60 sekúnd), kým nezaznie signál. Meranie pokračuje po signáli, ak je teplomer stále v mieste merania. Zobrazený výsledok sa nezmení, keď sa teplomer vyberie z miesta merania. Medzi meraniami dodržujte minimálny interval 30 sekúnd.
- Poznámka:** Tónový signál je zvyčajne „Bi-Bi-Bi-Bi“. Keď výsledok merania prekročí 37,8 °C, signál je rýchlejší, Bi-Bi-Bi - Bi-Bi-Bi - ... Bi-Bi-Bi“.
4. Na predĺženie životnosti batérie po dokončení merania teplomer vypnite stlačením tlačidla ZAP / VYP. Teplomer sa automaticky vypne asi po 10 minútach, ak sa nepoužíva alebo ak sa nevykonáva .
5. Teplomer skladujte v ochrannom obale.

## PRED POUŽITÍM TEPLOMERU SI POZORNE PREČÍTAJTE

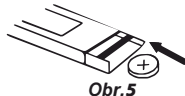
1. Batériu vymeňte, keď sa v pravom dolnom rohu zobrazí symbol. 
2. Posuňte kryt priestoru pre batérie, ako je to znázornené na obr. 3
3. Jemne vytiahnite bielu plastovú vložku so zásuvkou na batérie z krytu teplomeru asi 1 cm (1/2 ") (obr. 4).
4. Použitím predmetu so špičkou napr. ako pero vyberte použitú batériu. Batériu zlikvidujte v súlade s predpismi (Likvidácia nepotrebného zariadenia používateľmi domácnosti v Európskej únii). Vymeňte batériu za novú 1,5 VDC LR41 / SR41 / UCC392. Dbajte na to, aby bola batéria vložená so správnou polaritou (obr. 5).
5. Vložte plastovú vložku späť do krytu teplomeru a nasadte kryt.



Obr.3



Obr.4



Obr.5

## LIKVIDÁCIA NEPOTREBNÝCH ZARIADENÍ DOMÁCIMI UŽÍVATEĽMI V EURÓPSKEJ ÚNII



Prítomnosť tohto symbolu na produkte alebo jeho obale znamená, že tento produkt nesmie byť likvidovaný rovnakým spôsobom ako odpad z domácností. Preto ste zodpovední za likvidáciu použitého odpadu a ste povinní ho odniesť do autorizovaného recyklačného strediska pre nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Triedenie, likvidácia a recyklácia použitých zariadení chráni prírodné zdroje a zaisťuje, aby sa recyklácia uskutočňovala v súlade so zásadami rešpektovania ľudského zdravia a životného prostredia. Pre viac informácií o zberných miestach použitého odpadu vám poskytne miestne úrady a miestna služba na likvidáciu domového odpadu.

## ZÁRUKA

- Ručiteľ zaručuje kupujúcemu, že zariadenie VITAMMY, na ktoré sa vzťahuje táto záruka, bolo navrhnuté a vyrobené v súlade s vysokými štandardmi kvality a dobrou kvalitou zariadenia, bez akýchkoľvek materiálových alebo výrobných chýb, ktoré by mohli narušiť jeho správnu funkciu. Táto záruka predpokladá, že reklamované zariadenie bude dodané do služby na náklady kupujúceho, bezplatne opravené a bezplatne doručené späť kupujúcemu.
- **OBDOBIE ZÁRUKY:** 24 mesiacov pre zariadenie.
- **Súčasť a príslušenstvo, ktoré sa pri bežnom používaní môžu opotrebovať:** záruka sa nevzťahuje na batérie.
- Záruka je platná od dátumu nákupu, potvrdená dokladom o kúpe pripojeným k záručnému listu.
- Táto záruka platí na území Slovenska.
- Z dôvodu zachovania platnosti záruky by sa spolu s chybným zariadením mal poskytnúť nasledujúci záručný formulár (správne vyplnený a podpísaný) a doklad o kúpe, ktorý obsahuje dátum zakúpenia spolu s názvom zakúpeného zariadenia. Táto záruka neplatí, ak bol zmenený, odstránený alebo nečitateľný model a / alebo sériové číslo (ak je k dispozícii).
- Záruka neposkytuje žiadnu náhradu za priame alebo nepriame škody spôsobené osobám alebo zariadeniam, keď zariadenie nefunguje alebo nebolo v prevádzke.
- Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie zariadenia, ako aj na chyby a poškodenia vyplývajúce z: nesprávneho použitia (v rozpore s určeným účelom) alebo v rozpore s návodom na použitie; nesprávne alebo v rozpore s pokynmi na manipuláciu a údržbu (napr. použitie nevhodných čistiacich prostriedkov) a použitie nevhodného spotrebného materiálu; zásah neoprávnenej osoby, neoprávnené opravy, zmeny; príčiny vonkajšej povahy (atmosférické javy, prepätie v elektrickej sieti, nedostatok napájania atď.)
- Záruka sa nevzťahuje na nefunkčnosť produktu v dôsledku zmien vlastností (zhoršenia kvality) prvkov, ktoré sú predmetom prirodzeného opotrebovania.
- Záručné opravy nie sú činnosti spojené s údržbou a čistením zariadenia popísané v tomto návode.



Wuxi Exanovo Medical Instrument Co., Ltd.

No. 42 Xixin Road, Zhangjing, Xibei Town, Wuxi City,

214194 Jiangsu, People's Republic of China



Lotus NL B.V. Koningin Julianaplein 10, Ie Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands



Produkt zgodny  
z wymogami MDD 93/42/EEC