


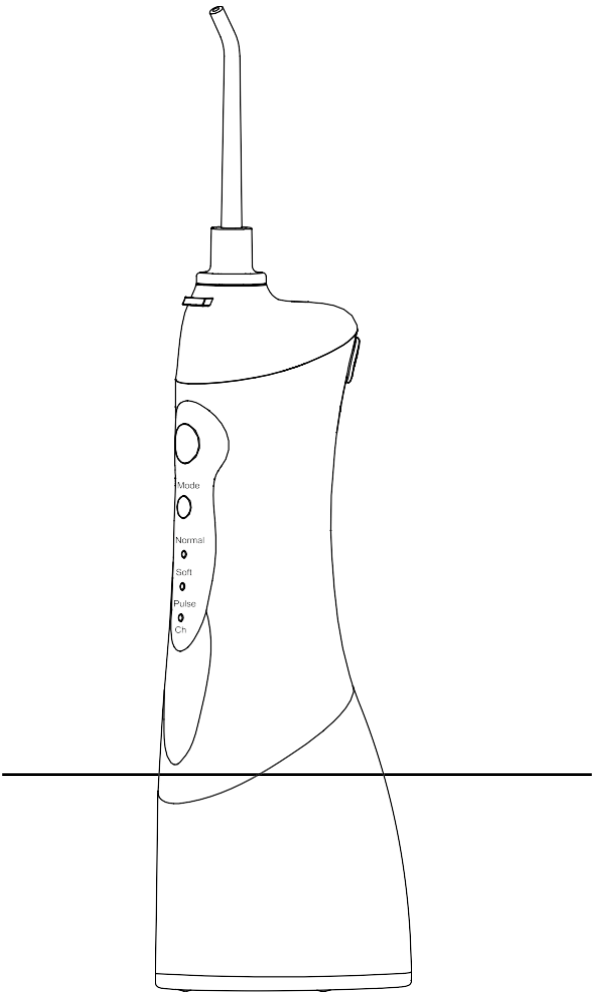

BATÉRIOVÁ SPRŠKA NA ÚSTNUHYGIENU
Model RLI501

Pred použitím starostlivo prečítajte obsah tohto návodu na obsluhu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Všetky nižšie uvedené informácie vám pomôžu správne používať zariadenie, aby nedošlo k poraneniu alebo poškodeniu zariadenia.

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE POKYNY O BEZPEČNOSTI

- ⚠ Malé deti, dojčatá, osoby so zdravotným postihnutím nemôžu používať zariadenie. Uchovávajte mimo dosahu detí.
- ⚠ Neupravujte zariadenie. Nerozoberajte a neopravujte.
- ⚠ Neumiestňujte zariadenie na miesto, z ktorého by mohlo dôjsť k pádu alebo do bazénu..
- ⚠ Nedotýkajte sa prístroja, ak spadol do vody a je pripojený k nabíjačke. Najskôr odpojte nabíjačku od napájacieho zdroja.
- ⚠ Nepoužívajte pri kúpaní.

UPOZORNENIE

- ⚠ Spršku na ústnu hygienu môžu používať deti staršie ako 8 rokov.
- ⚠ Ľudia s obmedzenými fyzickými a senzorickými a mentálnymi schopnosťami s nedostatkom vedomostí a skúseností môžu používať spršku iba pod dohľadom dospelých zodpovedných za bezpečnosť.
- ⚠ Prístroj nie je hračka.
- ⚠ Zariadenie je možné nabíjať len s nabíjačkou dodanou v súprave.
- ⚠ Zariadenie obsahuje vstavanú batériu a preto musí byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi.
- ⚠ Neplňte nádobu vodou o teplote vyššej ako 40 ° C
- ⚠ Nabíjačku nepoužívajte, ak má poškodený kábel alebo zástrčku.
- ⚠ Nenechávajte napájací kábel v blízkosti tepelných spotrebičov, alebo blízko zdroja žiarenia.

- ⚠ Nepoužívajte spršku, ak ste stratili trysku.
- ⚠ Prístroj neponárajte do vody.
- ⚠ Nepoužívajte na iné účely ako na ústnu hygienu.
- ⚠ Držte koncovku mimo dosahu detí. Je

dostatočne malá na to, aby sa pri prehltnutí uviazla v krku.

- ⚠ Niektoré ústne vody môžu poškodiť obal alebo zásobník vody; preto buďte opatrní pri používaní takýchto kvapalín so sprškou a vyhnite sa tým, ktoré majú korozívne vlastnosti a silné sfarbenie.
- ⚠ Ľudia s bolesťou zubov alebo ďasien nemusia byť schopní používať zubnú spršku. V takom prípade kontaktujte svojho zubára.
- ⚠ Netlačte trysku príliš na zuby alebo ďasná; môže poškodiť ďasná.


POPIS ZARIADENIA



- ⚠ Poznámka: Zvyšky destilovanej vody (kontajner, sacia trubica atď.) Ponechané v hlavnej časti zariadenia sa môžu použiť na vykonanie skúšky účinnosti (prietok vody); nepredstavujú hrozbu pre zdravie.

NABÍJANIE ZARIADENIA

1. Odstráňte kryt zásuvky nabíjačky a skontrolujte, či nie je vnútri zvyšná voda.
2. Pripojte konektor nabíjačky k zariadeniu.
3. Zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.

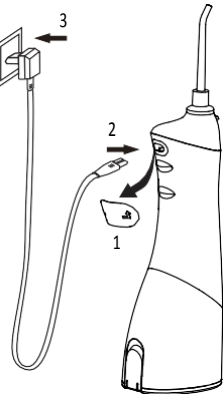

⚠ Indikátor "CH" pri nabíjaní bliká. Keď je zariadenie úplne nabité, indikátor zostane rozsvietený.


4. Po nabití odpojte nabíjačku od elektrickej siete, odpojte nabíjačku od zásuvky prístroja a vložte kryt do zásuvky nabíjačky.

⚠ **Poznámka:** Ak sa indikátor "CH" rozsvieti počas používania spršky alebo po ňom, znamená to, že batéria by mala byť nabitá. Plné nabitie batérie môže trvať až 8 hodín.

POUŽITIE SPRŠKY

⚠ Pri prvom spustení sa môže stať, že zariadenie bude upchaté - v takom prípade ľahko ústami nasajte vodu cez koncovku a zariadenie začne bežnú prevádzku.

1. Založte trysku na zariadenie.

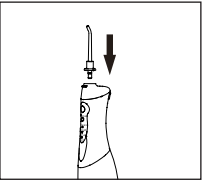


VITAMMY® WAVE MODEL RLI501

2.

Otvorte kryt nádoby s vodou, naplňte zásobník vodou o maximálnej teplote 40 ° C a zatvorte kryt. Zásobník na vodu môžete tiež odstrániť, naplniť vodou a potom kontajner pripojiť späť k zariadeniu.
3.

Stlačením tlačidla režim (MODE) vyberte požadovaný režim. Počas používania môžete zmeniť prevádzkový režim. Normálny režim: bežné čistenie
Jemný režim: jemné čistenie citlivých ďasien
Impulzný režim: čistenie a masírovanie ďasien

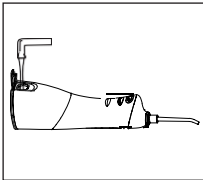

- ⚠

Zariadenie držte vertikálne tak, aby hrot trysky smeroval k zubom.
- ⚠

Držte ústa mierne otvorené, aby mohla voda vytekať.


4.

Na spustenie ústnej spršky stlačte spínač ON / OFF.
5.

Nasmerujte prúd vody pozdĺž línie ďasien, aby hrot trysky bol v uhle 90 ° k ďasnám.
6.

Pomaly presuňte prúd vody pozdĺž zubov.
7.

Vyčistite dôkladnepriestory medzi zubami, miesta okolo koruniek, mostíkov a ortodontických aparátov.

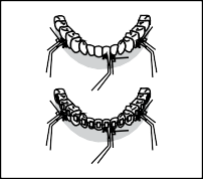

- ⚠

Ak potrebujete zmeniť koncovku na inú, najprv stlačte vypínač (OFF), aby ste zariadenie vypli. Potom stlačte uvoľňovacie tlačidlo dýzy, vymeňte koncovku a zariadenie znova zapnite.
8.

Po dokončení čistenia vypnite spotrebič stlačením vypínača (OFF).

PO POUŽITÍ ZARIADENIA

1.

Otvorte nádobu na vodu a vylejte vodu, ktorá zostala.
2.

Stlačením tlačidla zapnutia (ON) zapnite zariadenie na maximálne 15 sekúnd a vysušte vnútornú časť zariadenia.
3.

Vypnite zariadenie stlačením vypínača (OFF)

- a zatvorte veko nádoby na vodu.
4.

Utrite zariadenie suchouhandričkou.

- ⚠

Poznámka: Aby ste zabránili šíreniu baktérií, uistite sa, že v nádobe nie je ponechaná žiadna voda. Ak sa prístroj nebude dlhší čas používať, pred uložením ho utrite a vysušte.

ÚDRŽBA

- ⚠

Na čistenie zariadenia používajte len vodu alebo neutrálny čistiaci prostriedok. Nikdy nepoužívajte tvrdé alebo abrazívne činidlá (napr. Ocot alebo odvápnovacie prostriedky); môžu poškodiť zariadenie. Neumývajte vo vode pri teplote nad 50 ° C. Prístroj nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani ho nevystavujte na miestach s vysokou teplotou.

HLAVNÉ ZARIADENIE - ÚDRŽBA

- Vyčistite handrou a tekutým mydlom a utrite suchou handričkou.
- ⚠

Prístroj neponárajte do vody.
- Po umytí vysušte.

KRYT ZÁSOBNÍKA NA VODU

- Nečistotu otrite handrou.

KONCOVKA

- Umyte vodou a utrite mäkkou handričkou.
- ⚠

Vymeňte koncovku každých 6 mesiacov.

SACIA TRUBICA

- Umyte vodou a utrite mäkkou handričkou.
- ⚠

Neohýbajte, nevyťahujte ani neotáčajte hadičku.

KONTAJNER

- Umyte vodou a utrite mäkkou handričkou.
- Nádobu vysušte, ak ju nebudete dlhší čas používať.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Nefunguje	Práve ste si ho kúpili alebo ste ho nepoužívali 3 mesiac	Nabíjajte zariadenie aspoň 8 hodín
Funguje len pár minút, aj po nabití	Končí životnosť batérie	Kontaktujte Infolinku pomoci aleboo technickú podporu
	Čas nabíjania bol príliš krátky	Nabíjajte zariadenie aspoň 8 hodín
Tlak vody je veľmi nízky	Koncovka je špinavá	Vymeň koncovku
	Koncovka je zatlačená	
	Filter je znečistený	Vyčisti filter
Voda neprúdi von	Kontajner je prázdny	Napeñnij pojemnik
	Zariadenie je príliš naklonené počas používania	Držte prístroj vertikálne
	Zariadenie je upchaté	Naplňte nádobu vodou, vložte koncovku do úst, zapnite prístroj a potom ľahko nasajte vodu.

ZNEŠKODŇOVANIE A VYSVETLENIE SYMBOLOV

LIKVIDÁCIA NEPOTREBNÉHO ZARIADENIA PODĽA NORIEM EU.

- Prítomnosť tohto symbolu na výrobku alebo jeho obale znamená, že tento výrobok nemôžete likvidovať rovnakým spôsobom ako domový odpad. Preto ste zodpovední za likvidáciu použitého zariadenia a ste povinný ho doručiť na autorizované miesto recyklácie pre zbytočné elektrické a elektronické zariadenia. Triedenie, zneškodňovanie a recyklácia odpadového zariadenia pomôže zachovať prírodné zdroje a zabezpečiť, aby sa recyklácia uskutočňovala v súlade so zásadami rešpektovania ľudského zdravia a životného prostredia. Ďalšie informácie o miestach na zber odpadu získate od miestnych úradov pre likvidáciu odpadu.



Výrobok má certifikát CE

DYSTRYBUTOR / DISTRIBUTED BY

Mlongauer, s.r.o.

Hlavná 43, 951 53 Babindol
Infolinka pomoci a technickej podpory: +421940404831

PRODUCENT / MANUFACTURER

Shenzhen Relish Technology Co.,Ltd

Zhangbei Road No.17, Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen, China

Made in China /Vyrobené v Číne for / dla
Novamed Sp. z o.o.