

VITAMMY®

splash

SONICKÁ ZUBNÁ KEFKA

Model TB8132A-CE

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Pred použitím si určite prečítajte pokyny.

ÚVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali sonickú zubnú kefku VITAMMY SPLASH (TB8132-CE).

Tento návod obsahuje dôležité bezpečnostné informácie, starostlivosť o zakúpený výrobok a návod na správne používanie zariadenia.

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.

Uchovajte si tento návod pre budúce použitie.


UPOZORNENIA

Pri používaní elektrických spotrebičov by ste mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia spolu s nasledujúcimi:

- Prečítajte si všetky pokyny poskytnuté výrobcom.
- Uistite sa, že napätie v sieti zodpovedá napätiu uvedenému na zariadení.
- Aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo inému zraneniu, nepoužívajte nabíjačku v kúpeľni, neponárajte kábel, zástrčku do vody alebo iných tekutín.
- Nabíjačku neoplachujte vodou.
- Nabíjačku nepoužívajte, ak je jej napájací kábel alebo zástrčka poškodená.
- Pri odpájaní nabíjačky od siete uchopte zástrčku, nie kábel.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrou rukou.
- V prípade, že napájaná nabíjačka spadne do vody, najskôr vypnite napájanie a potom vyberte nabíjačku z vody.
- Neponárajte zubnú kefku do horúcej vody.
- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými psychomotorickými schopnosťami len po dôkladnom poučení o bezpečnom používaní tohto zariadenia a po pochopení rizík spojených s jeho používaním.
- Deti by sa s týmto zariadením nemali hrať.

- Toto zariadenie môžu používať deti a hendikepované osoby alebo môže byť použité v blízkosti detí a hendikepovaných osôb iba pod dozorom.
- Čistenie a údržba zariadenia by nemali byť zverené deťom bez dozoru dospeléj osoby.
- Na zubnú kefku a/alebo časť netlačte veľkou silou.
- Neumývajte jedno miesto dlho, aby ste predišli poškodeniu povrchu zubov a/alebo ďasien.
- Pred každým použitím skontrolujte kefu, či nie je poškodená.
- Poradte sa so svojím zubným lekárom, či je bezpečné používať sonickú zubnú kefku, ak ste po operácii resp. ortodontickom zákroku.
- Keď prvýkrát začnete používať zubnú kefku, môžu vám krváčať ďasná. Ak po týždni používania kefky nezmizne, poradte sa o tom so svojím lekárom.
- Ak máte kardiostimulátor alebo iné elektronické implantáty, pred prvým použitím zubnej kefky sa poradte so svojím lekárom.
- Kefka je určená na individuálne použitie - nepoužívajte ju spolu s inými osobami.
- Odporúča sa vymeniť hlavu kefky každé 3 mesiace.
- Zariadenie je možné nabíjať iba pomocou napájacieho adaptéra so špecifikáciou DC 5V / 0,5A.
- Batéria kefky obsahuje látky škodlivé pre životné prostredie, preto je potrebné kefku zlikvidovať v súlade s predpismi.
- Nevyhadzujte zubnú kefku ani nabíjačku do bežného komunálneho odpadu.

POPIS ZARIADENIA

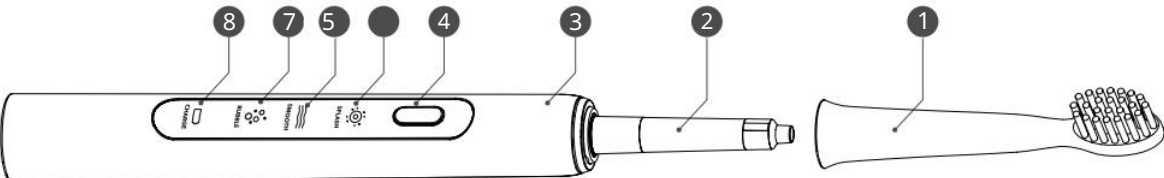

1. Hlava kefky
2. Vibračný hrot
3. Rukoväť
4. Tlačidlo I/O Zap./Vyp.
5. Režim "SPLASH".
6. Režim "SMOOTH".
7. Režim „BUBBLE“.
8. Indikátor nabitia batérie


PRED POUŽITÍM

NABITE KEFKU

POZNÁMKAI

Pred nabíjaním zubnú kefku vypnite. Uistite sa, že nabíjačka spĺňa požiadavky: DC 5V, / 0,5A.

1. Pripojte kábel ku kefke, ako je znázornené na obrázku. Pripojte druhý koniec kábla (zástrčka USB) k nabíjačke, potom zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.
2. Indikátor zubnej kefky bude počas nabíjania blikáť. Keď je zubná kefka plne nabitá, kontrolka bude nepretržite svietiť.

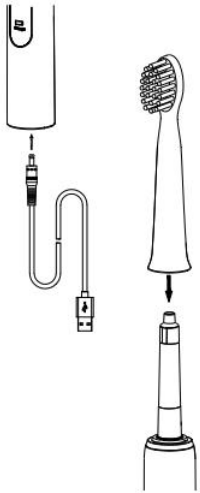

NAINŠTALUJTE HLAVU KEFKY

1. Pripevnite hlavu kefky podľa obrázka.

OBSLUHA ZARIADENIA

1. Naneste zubnú pastu na vypnutú zubnú kefku.
2. Vložte zubnú kefku do úst a vlákna kefky priložte k povrchu zubov.
3. Zapnite zubnú kefku tlačidlom I/O a začnite si čistiť zuby.

POZNÁMKA! Tlačidlá nestláčajte nechtom, pretože to môže poškodiť povrch tlačidiel.

4. Kefka pobeží 4 doby po 30 sekundách, pričom medzi nimi bude krátka prestávka. Po poslednom cykle sa kefka vypne automaticky.
5. Po dokončení opláchnite hlavu kefky pod tečúcou vodou. Odstráňte prebytočnú vodu z hlavy kefky a osušte rukoväť uterákom.

Zariadenie je určené len na domáce použitie.

ZMENA REŽIMOV PREVÁDZKY

Kefka Vitammy SPLASH ponúka tri štýly čistenia:

- **SPLASH:** Svieži vzhľad pre dennú čistotu. Energetický šok, ktorý odstráni plak a všetky nečistoty. Vaše zuby budú belšie, keď prijmete výzvu systematického sonického čistenia! Dokonalý štýl ráno.
 - **SMOOTH:** Upokojujúce. Jemné vibrácie, ktoré čistia a upokojujú.
 - **BUBBLE:** Iskrivý masážny efekt. Čistí vám zuby a zároveň masíruje časť.
- Počas činnosti kefy môžete zmeniť režim jej činnosti.
Po spustení zariadenia stlačte tlačidlo I/O, aby ste zmenili prevádzkový režim v nasledujúcom poradí: SPLASH -> SMOOTH -> BUBBLE. Kefka si zapamätá zvolený režim a od toho spustí ďalšie umývanie.
Ak sa zubná kefka vybijie, začne blikáť červená LED dióda nabíjania. Vypnite zubnú kefku a nabite ju.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Čistite kefku vlhkou, mäkkou handričkou.

Opláchnite celú kefku pod tečúcou vodou pri teplote nižšej ako 45 °C.

POZNÁMKA: Nikdy neponárajte kefku úplne do vody. Na čistenie nikdy nepoužívajte abrazívne a agresívne čistiace prostriedky.

POZNÁMKA: Na čistenie nepoužívajte agresívne chemikálie, abrazívne prostriedky ani drôtenku.

Odporúčame vymeniť hlavu kefky každé 3 mesiace.

VYSVETLENIE POUŽITÝCH ZNAKOV

Výstražné značky a symboly, ktoré sa môžu objaviť v príručke a na kryte zariadenia, sú dôležité pre zaistenie bezpečného používania zakúpeného zariadenia. Ich význam je uvedený v tabuľke nižšie:

	Prečítaj inštrukcie		Producent
	Konštantný prúd		Zariadenie spĺňa požiadavky príslušných smerníc CE
	dátum výroby		Opotrebované zariadenie by sa malo zlikvidovať v súlade s platnými predpismi. Zariadenie sa nesmie likvidovať s iným komunálnym odpadom. Zariadenie by sa malo zlikvidovať v špeciálnej nádobe na použité elektronické a elektrické zariadenia alebo vrátiť do obchodu, kde si môžete podobné zariadenia kúpiť. Používateľ je zodpovedný za správnu likvidáciu zariadenia. Pri správnej likvidácii je možné zariadenie recyklovať, čím sa zabráni akémukoľvek negatívnemu vplyvu na životné prostredie a zdravie.
	Sériové číslo		
	Dvojité izolácia		

OBSAH BALENIA

- Držiak zubnej kefky VITAMMY SPLASH (TB8132A-CE)
- 1 Hlava kefky
- 1 napájací kábel
- Používateľská príručka

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Napätie: 1,2V
Výkon: 1W
Špecifikácia napájania: 5V, 1A

ZÁRUKA

ZARIADENIE	VITAMMY SPLASH (TB8132A-CE)	
RUČITEĽ	MLongauer, s.r.o., Farská 12, 949 01, Nitra,	Prevádzka: Baby's, Hlavná 43, 951 53 Babindol
TECHNICKÁ PODPORA	Infolinka - tel.: +421940404831 e-mail: office@mlongauer.sk	
ZÁRUKA	Výrobca ubezpečuje kupujúceho, že zariadenie VITAMMY, na ktoré sa vzťahuje táto záruka, bolo navrhnuté a vyrobené na základe vysokých štandardov kvality a kvalitnej výbavy, bez materiálových alebo výrobných chýb, ktoré by mohli narušiť jeho správnu prevádzku. V prípade väd, škôd a chýb odhalených počas záručnej lehoty, výrobca bezplatne opraví alebo vymení zariadenie za nové v zákonnej lehote	
TYP ZÁRUKY	Táto záruka predpokladá, že reklamované zariadenie bude doručené predajcovi na náklady kupujúceho, opravené bezodplatne a doručené bezplatne kupujúcemu.	
ZÁRUČNÁ DOBA	24 mesiacov pre zariadenie	
	Záruka sa nevzťahuje na časti a príslušenstvo, ktoré sú vystavené opotrebovaniu počas bežného používania: hlava kefky.	
ZAČIATOK ZÁRUKY	Záruka platí od dátumu zakúpenia, ktorý je potvrdený dokladom o kúpe, ktorý musí byť pripojený k záručnému listu.	
OBLASŤ ZÁRUKY	Záruku poskytuje Poľský výrobca zariadenia.	
POSTUP V PRÍPADE CHYBY	Ak chcete využiť záruku, do 14 dní od odhalenia chyby, obráťte sa na helpline a technickú podporu na pomoc a ak je to potrebné, začinite s uplatnením reklamácie. V rámci konania o reklamacii sa zariadenie, má zaslať na adresu predávajúceho vrátane záručného listu a dokladu o kúpe.	
PODMIENKY PLATNOSTI ZÁRUKY	Ak chcete zachovať platnosť záruky spolu s reklamovaným zariadením, musíte poskytnúť túto záručnú listinu (správne vyplnenú a podpísanú) a doklad o kúpe obsahujúci dátum zakúpenia spolu s názvom zakúpeného zariadenia.	
OBMEDZENIA A VYLÚČENIA ZÁRUKY	Záruka neposkytuje žiadnu kompenzáciu za nepriamu alebo priamu škodu spôsobenú osobám alebo zariadeniam, keď prístroj nefungoval.	
	Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie zariadenia, ako aj na chyby a škody spôsobené: • Nevhodným použitím, alebo spôsobom, ktorý nie je v súlade s návodom na použitie • Nevhodnou údržbou alebo údržbou nezlučiteľnou s pokynmi na skladovanie a údržbu (napr. Používanie nevhodných čistiacich prostriedkov) a používanie nevhodných spotrebných materiálov • Zásah nepovolanou osobou, neoprávnené opravy, úpravy a zmeny štruktúry zariadenia Vonkajšie príčiny (atmosférické javy, prepätia v napájacej sieti, nesprávne napájanie atď.),	
	Záruka sa nevzťahuje na poruchu produktu z dôvodu zmien vlastností (poškodenia) komponentov, ktoré sú vystavené prirodzenému opotrebovaniu.	
	Opravy vrámci záruky nie sú činnosti súvisiace s údržbou a čistením zariadenia popísané v používateľskej príručke.	
PEČIATKA A PODPIS PREDAJCA	Dátum	Podpis zákazníka

LIKVIDÁCIA NEPOTREBNÉHO ZARIADENIA DOMÁCIMI UŽÍVATEĽMI V EURÓPSKEJ ÚNII

Prítomnosť tohto symbolu na produkte alebo jeho obale znamená, že tento produkt nemožno likvidovať rovnakým spôsobom ako domáci odpad. Zodpovedáte preto za zneškodnenie vášho odpadového zariadenia a ste povinní ho odovzdať do autorizovaného recyklačného miesta pre odpadové elektrické a elektronické zariadenia. Triedenie, likvidácia a recyklácia odpadových zariadení prispieje k ochrane prírodných zdrojov a zabezpečí, aby recyklácia prebiehala v súlade so zásadami rešpektovania ľudského zdravia a životného prostredia. Ďalšie informácie o zberných miestach pre vaše použité vybavenie vám poskytne miestne úrady alebo miestna služba likvidácie domového odpadu.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

VÝROBCA:

Guang Dong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., LTD.

Zhenghe South Road, mesto Leliu, okres Shunde, mesto Foshan, provincia Guangdong, Čína

DISTRIBÚTOR PRE PL

NOVAMEDPL

Distribútor pre SR, ČR, Maďarsko:

Mlongauer s.r.o.

ul. Farská 12, 949 01 Nitra
SLOVENSKO
Infolinka pomoci a technickej podpory: +421 940 404 831
Produkt má certifikát CE



Made in China / Made in China