

medel[®]BD
BEAUTY DEVICE

DERMO PEEL



Prístroj na čistenie pleti
Návod

 Medel International Srl
Via Villapizzzone 26 - 20156 Milano (MI) - ITALY
Tel. +39 02 83451194 - Fax +39 02 87391065
www.medelinternational.com





SK

Obsah

1. Všeobecné informácie	50
2. Vysvetlenie symbolov	51
3. Odporúčané použitie	51
4. Upozornenia a bezpečnostné pokyny	52
5. Opis zariadenia	53
6. Pomoc	54
6.1 Vvykonanie kožného testu	54
6.2 Používanie produktu	54
6.3 Miesta použitia	56
7. Čistenie a údržba	57
8. Náhradné a opotrebitelné diely	57
9. Likvidácia zariadenia	57
10. Technické údaje	57

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

teší nás, že ste sa rozhodli pre výrobok z nášho sortimentu. Naša značka je zárukou vysoko kvalitných a dôkladne testovaných výrobkov z oblasti tepla, hmotnosti, diagnostiky krvného tlaku, jemnej terapie, masáže a dýchania.

Prečítajte si, prosím, pozorne návod na použitie, odložte si ho pre prípad potreby, poskytnite ho aj ďalším užívateľom a dodržiavajte pokyny.

S pozdravom
Tím Medel

Obsah balenia

- 1 Medel Dermo Peel
- 1 precízny nastavtec
- 1 hrubý nastavtec
- 1 jemný nastavtec
- 20 jednorazových filtrov
- 1 nabíjačka
- návod na použitie



VAROVANIE

- Prístroj je určený iba na používanie v domácnosti, nie do prevádzky služieb.
- Deti staršie ako 8 rokov!
Osoby s obmedzenými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí smú tento prístroj používať iba pod dozorom alebo v prípade, že boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a rizikách, ktoré z neho vyplývajú.
- Deti sa s prístrojom nesmú hrať..
- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak je prívodný kábel prístroja poškodený, musí sa vyhodiť.

1. Všeobecné informácie

Čistiaci prístroj na tvár MEDEL Dermo Peel Vám umožňuje profesionálny peeling tváre prostredníctvom mikrodermabráznej technológie. Vysokokvalitné zařířové nadstavce ohľaduplne odstraňujú nadbytočné kožné bunky. Vákuová technológia výrazne zlepšuje štruktúru pokožky a zvyšuje krvný obeh. Liečba tiež simuluje obnovu buniek pre jemnejšiu a hladšiu pleť.

2. Vysvetlenie symbolov

V návode na použitie sú použité nasledovné symboly:

	VAROVANIE Upozornenie na hroziaci úraz alebo ohrozenie zdravia.
	POZOR Upozornenie na možné poškodenie prístroja alebo príslušenstva.
	UPOZORNENIE Nevhodný na použitie vo vani alebo v sprche.! (hrozí úraz elektrickým prúdom)!
	Dôležité informácie
	Prečítajte si návod na použitie
	Prístroj je vybavený dvojitoú ochrannou izoláciou
	Likvidácia v súlade so Smernicou ES o likvidácii použitých elektrických a elektronických prístrojov – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Výrobca
	Len na domáce použitie

3. Odporúčané použitie

Používajte prístroj iba na ľudskú tvár (okrem okolia očí).

Nepoužívajte prístroj na čistenie pleti u zvierat! Prístroj nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov!

Prístroj je určený iba na účel popísaný v tomto návode na použitie. Výrobca neručí za chyby spôsobené neodborným alebo ľahkomyselným používaním.



4. Varovania a bezpečnostné pokyny

VAROVANIE

Hrozí udusenie obalovým materiálom! Nepatrí do rúk deťom.

- Pred použitím skontrolujte prístroj a jeho príslušenstvo, či nie sú viditeľne poškodené. V prípade pochybností ho nepoužívajte o obráťte sa na predajcu alebo uvedený servis

Sieťový adaptér chráňte pred vodou.



NEBEZPEČENSTVO

Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom prostredí, alebo v bezprostrednej blízkosti vody (napr. umývadlo, sprcha, vaňa) – riziko úrazu prúdom!

VAROVANIE

Zariadenie **NESMIE** byť používané:

- na popraskanú pokožku,
- na otvorené rany,
- okolo očí a pier,
- na tele mimo tváre (okrem očí a úst),
- pri stavoch kože (napr. Opary, cievne ochorenia alebo výrastky),,
- v prípade rakoviny kože,
- v prípade podráždenia pokožky,
- ihneď po opaľovaní alebo v prípade spálenia od slnka,
- keď používate lieky obsahujúce steroidy,
- ak užívate antikoagulanciá,
- pri nasledujúcich ochoreniach: roztrúsená skleróza, cukrovka alebo autoimunitné ochorenia..

UPOZORNENIE

Z tohto dôvodu by sa zariadenie malo používať iba so zdrojom napájania dodávaným spolu so zariadením a s použitím zdroja napájania s charakteristikami vyznačenými na zdroji napájania,


POZOR

Opravy elektrických zariadení môžu vykonávať iba technici.
Nesprávna oprava môže spôsobiť vážne poškodenie

UPOZORNENIE

- Zariadenie sa smie používať iba v suchých miestnostiach (napr. Nikdy vo vani, saune).
- Za žiadnych okolností nesiahajte po prístroji, ktorý spadol do vody. Adaptér ihneď vyberte.
- Nevystavujte jednotku mechanickým nárazom alebo pádom.
- Sieťový kábel nenavíjajte pevne okolo zariadenia.
- Dbajte na to, aby sa napájací kábel a napájací adaptér nedostali do kontaktu s vodou, parou alebo inými tekutinami..

5. Opis zariadenia

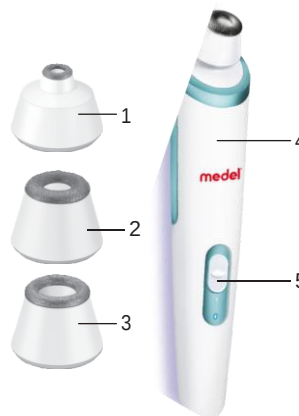

1. Precízny nastavec so zařírovým nastavcom, vhodným na dôkladné ošetrovanie malých oblastí (napríklad oblasť nosa)
2. Jemný nastavec so zařírovou krunkou, vhodný pre citlivú pleť.
3. Hrubý nastavec so zařírovou korunkou, vhodný na intenzívne ošetrovanie problémových oblastí.
4. Prístroj
5. Tlačidlo ON/OFF a prepínanie výkonu v dvoch stupňoch



6.1. POUŽITIE



Pred prvým použitím sa uistite, že Vaša pleť je čistá, suchá a očistená od kozmetických produktov ako je púder, krém alebo make-up..

Otestujte si pleť

Na 24 hodín pred použitím prístroja vykonajte test pleti. Vyskúšajte prístroj otestovať na najnižšej intenzite a na malej, nenápadnej oblasti Vášho krku. Ak je po 24 hodinách testovaná oblasť začervenaná alebo bolestivá, prístroj nepoužívajte.



VAROVANIE

- Nepoužívajte prístroj viac ako jeden krát za týždeň.
- Okamžite po použití, ošetrovaná pokožka môže byť viditeľne začervenaná a vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môže pod pokožkou objaviť malé stopy po krvácaní.
- Jeden deň pred a jeden deň po použití, vyhnite sa aktivitám ktoré spôsobujú zvlhčenie pokožky, resp. Potenie ako je napr. sauna, návšteva solária, alebo opaľovanie




Dôležité


Prístroj je možné použiť dvakrát za týždeň v prípade, že ošetrovaná pokožka nemá problémy so precitlivenosťou (s prestávkou aspoň 48 hodín medzi použitím!).

6.2. Použitie produktu


1. Pripojte nabíjačku do prístroja a zapojte nabíjačku do el. siete.

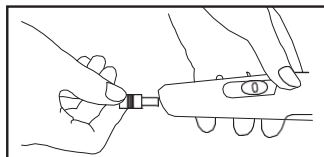


2. Vložte jednorazový filter do hlavice prístroja.

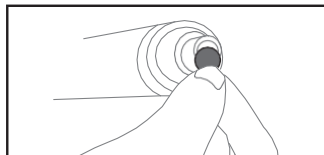

1. Umiestnite jeden z nastavcov na hlavicu prístroja

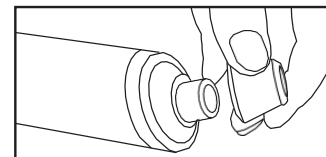

2. Pre zapnutie prístroja posuňte tlačidlo do polohy ON a nastavte stupeň intenzity.

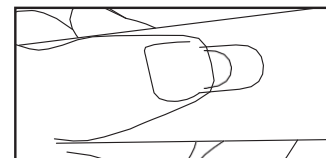

3. Prístroj priložte ku tvári a a pohybujte s ním ponad pokožku. Nepoužite prístroj na jednu oblasť tváre viac ako 1 krát počas jednej procedúry!




Dôležité

Priebeh procedúry by mal byť príjemný a nemal by spôsobovať bolesť. Po aplikácii by malo byť viditeľné mierne začervenanie.

4. Po použití zariadenie vypnite posunutím prepínača do polohy VYP a potom odpojte napájanie zo zásuvky.

5. Filter na jedno použitie by sa mal vymeniť po každom použití. Za týmto účelom odstráňte kryt. Jednorazový filter vytiahnite pinzetou.

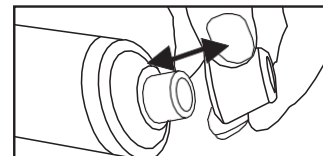




6.3. Miesta použitia

Dôležité

Uistite sa, že časť tváre, ktorú ošetrujete prístrojom, je natiahnutá. Pokožku môžete natiahnuť voľnou rukou do strán alebo ťahaním nadol.

Čelo:

Pohybujte prístrojom pomaly a rovnomerne z vnútornej strany čela von. Uistite sa, že žiadnu časť pokožky neošetríte viac ako 1 krát!

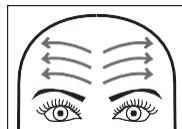

Sluchy:

Prístrojom pohybujte smerom von od obočia. Prístroj aplikujte aj na pravú, aj na ľavú stranu. Uistite sa, že žiadnu časť pokožky neošetríte viac ako 1 krát.




Nos:

Prístrojom pohybujte smerom dolu od koreňa nosa ku špičke nosa. Prístroj aplikujte aj na pravú, aj na ľavú stranu nosa.



Líca:

Prístrojom pohybujte smerom od nosa cez líca.

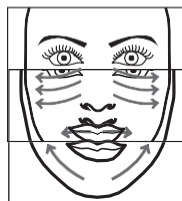

Okolie úst:

Prístrojom pohybujte ponad pery, od centra smerom von na pravú a ľavú stranu. Prístrojom pohybujte aj smerom hore od brady napravo i naľavo od úst. Uistite sa pritom, že sa nedotknete pier.

7. Čistenie a údržba

- Nikdy neponárajte prístroj do vody a iných tekutín
- Po každom použití dezinfikujte nadstavce komerčne dostupným dezinfekčným prostriedkom.
- Po každom použití vymeňte jednorazový filter.
- Ak je zariadenie znečistené, vyčistite ho suchou handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky na čistenie.
- Chráňte prístroj pred nárazmi, vlhkosťou, prachom, chemikáliami, veľkými výkyvmi teplôt a príliš blízkymi zdrojmi tepla (napr. Pec, radiátor).

8. Náhradné diely a spotrebné diely

Náhradné diely a opotrebitelné diely sú k dispozícii na uvedenej servisnej adrese (podľa zoznamu servisných adries). Pri objednávaní uveďte príslušné katalogové číslo.

9. Likvidácia

Prístroj likvidujte v súlade so Smernicou ES o likvidácii použitých elektrických a elektronických prístrojov – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Ak potrebujete ďalšie informácie ohľadne likvidácie, obráťte sa na príslušné komunálne orgány.



10. Dane techniczne

Napájanie	Vstup: 100-240VAC/50/60Hz Výstup: 5V DC / 1A
Rozmery	190 x 40 x 39 mm
Váha	~128 g

