

VITAMMY®

warm-up

Model: 5S18



NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Pred použitím prístroja sa oboznámte s návodom na obsluhu.

VITAMMY®

warm-up

OBSAH

Návod na použitie

Úvod

Inštrukcia smer a všeobecný opis prevádzky spotrebiča

Preventívne opatrenia, varovania a bezpečnostné informácie

Bezpečnostné pravidlá

Ďalšie tipy

Skladovanie vyhrievacej podložky

Likvidácia odpadového zariadenia používateľmi v súkromnom dome v Európskej únii

Rozmery a technická špecifikácia

Vysvetlenie použitých značiek

Garancia

Kontaktné informácie

1

3

4

5

6

7

8

9

9

10

11

13

ÚVOD


Ďakujeme, že ste si vybrali elektrický vankúš VITAMMY WARM-UP 155181.

Vďaka modernému minimalistickému dizajnu a mäkkej a ľahko čistiteľnej látke sa vankúš perfektne hodí do každého interiéru.

Vankúš VITAMMY WARM-UP je vybavený pokrokovým senzorovým termostatom, ktorý automaticky reguluje a udržiava správnu teplotu na každej úrovni.

Táto príručka obsahuje dôležité bezpečnostné informácie, starostlivosť o zakúpený produkt a príručku o správnom používaní zariadenia.

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.

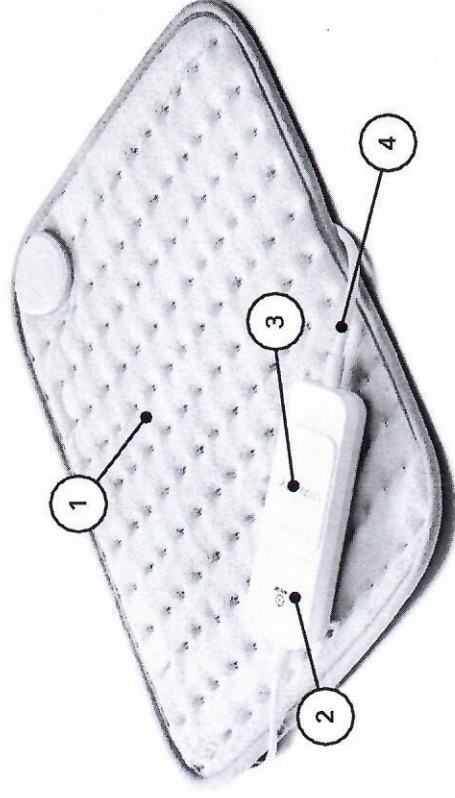

1. Elektrický vankúš

2. Ovládaci panel

3. Regulátor teploty:

- nízka (40 °)
- stredná (50 °)
- vysoká (60 °)

INŠTRUKCIE

Vyhrievacia poduška má pri prvom použití mierny zápach z plastu - je to normálne a po krátkej dobe zmizne.

1. Pred pripojením vankúša do zásuvky sa uistite, že je v súlade s menovitým napätím prístroja s napätím v zásuvke.
2. Umiestnite vankúš VITAMMY11 WARM-UP bez stlačenia na bolestivú časť tela, vankúš zapnite a nastavte teplotu výberom jednej z 3 dostupných úrovní tepla pomocou regulátora teploty. Presuňte volič regulátora do požadovanej polohy - 1,2 alebo 3. Na ovládacom paneli sa zobrazí príslušné číslo označujúce úroveň teploty.
3. Po dosiahnutí požadovanej teploty vám odporúčame prepnúť prepínač do polohy 1.
4. Ak chcete deaktivovať airbag, posuňte spínač nadol. Keď displej zhasne, jednotka sa vypne.

Zariadenie má systém automatického vypnutia. Po 90 minútach sa zariadenie automaticky vypne, čím vás ochráni pred následkami zaspánia so zapnutým vankúšom.

Po ukončení používania vankúša sa uistite, že je výhradne pre konkrétne potreby a jeho potreby.

vypnite ho, používajte spínač regulátora teploty, kým nezhasne kontrolka.

Ak ju chcete znova zapnúť, použite tlačidlo Zapnutie / vypnutie a výber teploty.

Ak sa zariadenie nepoužíva, odpojte ho od zásuvky.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA, UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

KONTROLA PODUŠKY

Pred každým použitím skontrolujte, či nie je vankúš poškodený. Ak je prístroj, zástrčka alebo vankúš poškodený, vankúš okamžite odpojte a nepoužívajte ho.

Opravy by mal vykonávať kvalifikované servisné stredisko.

Ak vankúš nefunguje (NEHREJE), SKONTROLUJTE, ŽE:

- Zástrčka vankúša je správne zapojená do zásuvky.
- Kábel nie je ani prerazaný, ani ohnutý a dobre spája podložku so zástrčkou.

Ak je vankúš poškodený, mal by ho vymeniť výrobca, predajca alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo riziku poškodenia zdravia či majetku.

Opravu a servis vankúša smie vykonávať iba kvalifikovaný personál alebo autorizovaný servis. Akýkoľvek pokus o zásah do mechanizmu, ovládača alebo kábla vedie k zrušeniu platnosti záruky.

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Nesadajte si a neľahnite si na vankúš; neohýbajte šnúru vankúša. Nezakrývajte vankúš žiadnymi inými vankúšmi alebo prikrývkou.

- Počas prevádzky by ovládací panel nemal byť zakrytý vankúšom WARM-UP.
- Nepoužívajte vankúš, keď spíte.
- Ak vankúš používate dlhší čas, nastavte nízku úroveň teploty (Nízka - 1).
- Dajte pozor, aby ste vankúš neprepichli ostrým predmetom.
- Nepokúšajte sa vankúš opraviť svojpomocne.
- Pred čistením vankúš odpojte od zásuvky.
- Ľudia citliví na teplo - deti alebo ľudia so zníženou pohyblivosťou alebo mentálnymi schopnosťami - musia vankúš používať pod príslym dohľadom.
- Tento výrobok by nemali používať osoby so srdcovým kardiosimulátorom.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov osobami so zníženými fyzickými alebo duševnými schopnosťami alebo osobami, ktoré neposkytnú vedomosti o obsluhu prístroja, ak sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, ktorá si prečítala príručku alebo je od tejto osoby poučená a ako bezpečne používať prístroj a budem rozumieť riziká spojené s používaním elektrickej vyhrievacej podložky.
- Čistenie a údržba zariadenia nemôžu vykonávať deti bez sprievodu.
- Nepoužívať pre veľmi malé deti (vo veku 0 až 3 roky). Spotrebič by nemali používať deti staršie ako 3 roky, pokiaľ rodič alebo zákonný zástupca nenastavil dieťaťu teplotu alebo nenariadil, ako bezpečne používať prepínač voľby teploty.
- Prístroj môže byť pripojený k elektrickej inštalácii s parametrami zodpovedajúcimi parametrom uvedeným na typovom štítku prístroja
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť autorizované servisné stredisko, aby sa zabránilo všetkým rizikám.

O použití vankúša VITAMMY Y® WARM-UP na lekárske použitie sa obráťte na svojho fyzioterapeuta alebo lekára. Ak trpíte poruchami prietoku krvi alebo cukrovkou, poraďte sa pred použitím prístroja so svojím lekárom.

- Nepokladajte vankúš na oblasti zápalu alebo obzvlášť citlivé oblasti.
- Nadmerné zahriatie môže dráždiť alebo spôsobiť popáleniny.
- Nepoužívajte vankúš spolu s tekutinami, masťami alebo gélmami, ktoré obsahujú prísady generujúce teplo.
- Nepoužívajte vankúš bez obliečky na vankúš.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti anestetík, horľavých látok so vzduchom, kyslíkom a oxidom dusným.

- Šnúru udržujte mimo dosahu zdrojov tepla.
- Nevystavujte prístroj priamemu počasiu (dážď, slnko atď.)
- Neťahajte za napájací kábel ani za zariadenie, aby ste ho odpojili od napájania.
- Nevystavujte prístroj vysokým teplotám.
- Nedotýkajte sa prístroja mokрыmi rukami.
- Nepoužívajte vankúš, ak je vlhký alebo mokrý.

ĎALŠIE TIPY

ČISTENIE A ÚDRŽBA VANKÚŠA

- Pred čistením vankúš odpojte od elektrickej zásuvky.
- Vankúš má kábel, ktorý je potrebné pred čistením odpojiť.
- Ovládací panel nikdy neponárajte do vody.
- Po odpojení sieťového kábla a spojovacieho kábla od vankúša sa dá ručne prať na 30 °C
- Zaveste vankúš, kým nie je úplne suchý.
- Vankúše nemožno chemicky čistiť ani sušiť v bubnovej sušičke.
- Vankúše sa nesmie žehliť.
- Čistenie vankúša by nemali vykonávať deti bez dozoru dospelých.
- Pred opätovným použitím vankúša sa uistite, či je úplne suchý.
- Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá

SKLADOVANIE VYHRIEVACEJ PODUŠKY

Po použití by mal byť vankúš uložený podľa nasledujúcich pravidiel:

1. Pred zložením a uskladnením nechajte vankúš vychladnúť.
2. Pri uskladňovaní na vankúš nekladte iné predmety, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo poškodeniu.
3. Pravidelne kontrolujte vankúš, či nie je poškodený alebo opotrebovaný. Ak sa tieto stopy objavia alebo bol vankúš zneužitý, vráťte vankúš pred opätovným použitím predajcovi alebo servisnému stredisku.
4. Vankúš uložte na suché miesto.

Toto zariadenie nie je určené na lekárske použitie v nemocniciach.

LIKVIDÁCIA ELEKTROZARIADENÍ: DOMÁCNOSTÍ V EURÓPSKEJ ÚNII



Označenie tohto symbolu na výrobok alebo jeho obal znamená, že sa ho nemožno zbaviť a tento výrobok rovnakým spôsobom ako domový odpad. V súvislosti s tým - ste zodpovední za likvidáciu použitého zariadenia a ste povinní ho odovzdať autorizovanému recyklačnému stredisku, odpadom z elektrických a elektronických zariadení. Čistenie, likvidácia a recyklácia použitých zariadení prispieja k ochrane prírodných zdrojov a zabezpečí, aby sa recyklácia odpadu uskutočňovala v súlade so zásadami rešpektovania ľudského zdravia a životného prostredia. Ďalšie informácie o zbierkových miestach použitého zariadenia vám poskytne miestny úrad alebo miestna služba na likvidáciu domového odpadu.

ROZMERY A TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

MODELSS18

Napájací prúd: 220 ~240

Frekvencia : 50 Hz

Maximálny príkon: 100 W

Automatické vypnutie: ~90minút

Rozmer podušky: 30 x 40 cm

Prevádzková teplota prostredia: 10 - 40 °C

Podmienky použitia: používajte iba v suchých miestnostiach, podľa pokynov.

Najvyššia teplota dosiahnutá týmto vankúšom sa rovná najvyššej teplote povolenjej európskymi normami pre bezpečnosť používateľa.

Prečítaj inštrukcie	Výrobca
Nepoužívať v rozpore s návodom na použitie	
	Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.
Nežehliť	
	Nežmýkať
Neprepichovať	
	Nesušiť v bubnovej sušičke
Nebieliť	
	Sušiť odkvapkaním
Uchovajte v suchu	
	Neukladať na priame slnečné svetlo alebo zdroj tepla
Neprať v práčke	
	Prat' len v rukách. Nesmie sa prať v práčke
Zákaz chemického čistenia	
	Maximálna teplota vody 30 °C
Trieda ochrany II	
	Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridane do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať
	cenne prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.
Nevhodné pre deti do 3 rokov	

ZÁRUKA	
ZARIADENIE	VITAMMY WARM-UP (SS18)
VÝROBCA	Novamed.pl Sp. z o.o. S.K.A. ul. Traktorowa 143, 91-203 Łódź
TECHNICKÁ PODPORA	Infolinia - tel. 887 11 00 66 e-mail: pomoc@novamed.pl
ZÁRUKA	Záruka zaručuje kupujúcemu: že zariadenie VITAMMY, na ktoré sa vzťahuje táto záruka, bolo navrhnuté a vyrobené na základe vysokých štandardov a kvality zariadenia, bez materiálových alebo výrobných chýb. V prípade defektov, poškodenia zistených počas záručnej doby uvedenej nižšie, Výrobca bezplatne opraví alebo vymení prístroj za nový. bezplatne: krátkodobu do 30 dní.
TYP ZÁRUKY	Táto záruka predpokladá, že: chybné zariadenie bude dodané do servisného strediska na náklady kupujúceho, bezplatne a bezplatne opravené a doručené späť kupujúcemu.
ZÁRUČNÉ OBDOBIE	24 mesiacov
OBDOBIE ZÁRUKY	Záruka platí: odo dňa nákupu, potvrdené dokladom o kúpe, ktorý musí byť priložený k záručnému listu.

OBMEDZENIA ZÁRUKY	Záruka neposkytuje žiadnu náhradu za priame alebo nepriame škody spôsobené osobám alebo zariadeniam, keď zariadenie nefungovalo alebo bolo v prevádzke. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie zariadenia, ako aj na chyby a poškodenia spôsobené: nesprávne (v rozpore s určeným použitím) alebo v rozpore s návodom na použitie nesprávne alebo v rozpore s pokynmi na uskladnenie a údržba (napr. použitie nevhodných čistiacich prostriedkov) a použitie nevhodného spotrebného materiálu zásah neoprávnenej služby, neoprávnené opravy, zmeny a zmeny dizajnu príčiny vonkajšej povahy (atmosférické javy, prepätie v elektrickej sieti, nesprávne napájanie atď.) Záruka sa nevzťahuje na nefunkčnosť produktu v dôsledku zmien vlastností (zhoršenia kvality) prvkov, ktoré sú predmetom prirodzeného opotrebenia. Záručné opravy nie sú činnosti spojené s údržbou a čistením zariadenia popísané v príručke.
	Dátum predaja Podpis klienta

VITAMMY®

warm-up

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

PRODUCENT:

MDONGGUAN SUNBRIGHT Electric Appliance Co.,Ltd

Junda Industrial Park Dongkeng Town

523000 Dongguan

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

DYSTRYBUTOR:

NOVIMEDPL

Novamed.pl Sp. z o.o. S. K. A

ul. Traktorowa 143; 91-203 Łódź, Poland

Infolinia pomocy i wsparcia technicznego o: 887110066

MADE IN PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA / WYPRODUKOWANO W CHINACH

Produkt je v súlade s certifikátom CE

CE: