

VITAMMY®

HEAT

Model: LMHP-S-002



PRÍRUČKA UŽÍVATEĽA

Pred použitím zariadenia si prečítajte návod na používanie.

OBSAH

Používateľská príručka	1
Úvod	3
Návod na použitie a všeobecný opis činnosti zariadenia	4
Bezpečnostné upozornenia, varovania a bezpečnostné informácie	5
Bezpečnostné pravidlá	5
Ďalšie tipy	8
Skladovanie vyhrievacej podložky	8
Zneškodňovanie nepotrebných zariadení podľa nariadenia v Európskej únii	9
Rozmery a technické špecifikácie	9
Vysvetlenie použitých znakov	10
Záruka	11
Kontaktné informácie	13

ÚVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali vyhrievaciu podložku VITAMMY HEAT (LMHP-S-002).

Moderný, minimalistický dizajn a mäkká a ľahko čistiaci tkanina robia podložku dokonale prispôsobenú akémukoľvek interiéru.


Vyhrievacia podložka VITAMMY® HEAT je vybavená pokročilým senzorovým termostatom, ktorý automaticky reguluje a udržiava požadovanú teplotu na každej úrovni.

Táto príručka obsahuje dôležité bezpečnostné informácie, pravidlá starostlivosti o zakúpený produkt a návod na správne používanie zariadenia.

⚠ Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie.

VITAMMY® HEAT

NÁVOD NA POUŽITIE A VŠEOBECNÝ POPIS ZARIADENIA

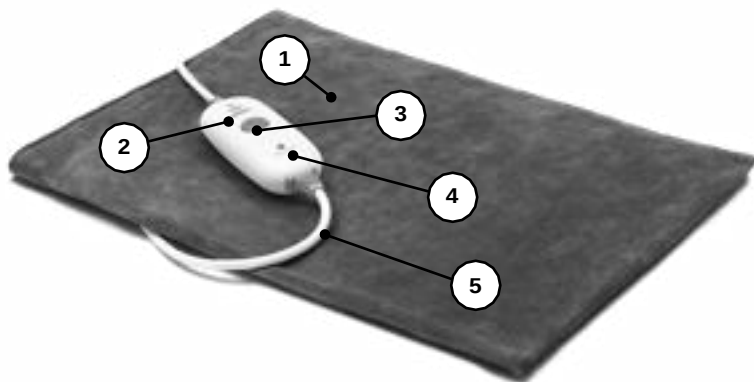

1. Odnímateľný a umývateľný návlek (100% polyester)

1. 3 Indikátory nastavenia teploty:

- Nízka (40°C)
- Stredná (50°C)
- Vysoká (60°C)

2. Tlačidlo teploty a tlačidlo výberu

3. Indikátor zapnutia

4. Sieťový kábel

NÁVOD

1. Pripojte vyhrievaciupodložku do zásuvky a uistite sa, že menovité napätie prístroja je kompatibilné s napätím v zásuvke.
2. Položte podložku VITAMMY® HEAT, bez toho, aby ste ju tlačili na bolestivú časť, zapnite ju a nastavte teplotu výberom jednej z troch dostupných úrovní tepla pomocou tlačidla napájania a výberu teploty.

⚠ Zariadenie má automatický vypínací systém. Po 120 minútach sa prístroj automaticky vypne a chráni vás pred následkami zaspania s aktivovanou podložkou.

3. Po použití podložky sa uistite, že je vypnutá a v prípade potreby ju vypnite **stlačením tlačidla napájania a tlačidla teploty**, kým indikátor zhasne.
4. Ak chcete znova zapnúť, použite tlačidlo napájania a prepínač teploty.
5. Ak sa zariadenie nepoužíva, odpojte ho z elektrickej zásuvky

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA, UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

KONTROLA PODLOŽKY

Pred každým použitím skontrolujte, či je podložka nepoškodená. Ak je zariadenie, zástrčka alebo podložka poškodené, okamžite ju odpojte a nepoužívajte ju. Opravy by mali vykonávať kvalifikovaní pracovníci.

AK PODLOŽKA NEFUNGUJE (NEHREJE) TREBA SKONTROLOVAŤ:

- Či je podložka správne pripojená do zásuvky,
- Či nie je kábel rozrezaný alebo ohnutý a či spája vankúš so zástrčkou.

Ak je podložka poškodená, mala by byť nahradená výrobcom, predajcom alebo inou kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.

⚠ Opravy a servis by smú vykonávať iba kvalifikovaní pracovníci alebo autorizované servisné stredisko. Akýkoľvek pokus o zasahovanie do mechanizmu, ovládača alebo drôtu stráca platnosť záruky.

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

- ⚠ Nesedzte ani neležte na podložke; neohýbajte ju.
- ⚠ Nepoužívajte ju počas spánku.
- ⚠ Pri dlhodobom používaní vyhrievaciu podložku nastavte na nízku úroveň teploty (Nízka - 1).
- ⚠ Dávajte pozor, aby ste ju nepoškodili ostrým predmetom.

VITAMMY® HEAT

- ⚠ Nesnažte sa opraviť vyhrievaciu podložku sami.
- ⚠ Pred čistením ju odpojte zo zásuvky.
- ⚠ Osoby, ktoré sú citlivé na teplo - deti alebo osoby so zníženou pohyblivosťou alebo zníženými mentálnymi schopnosťami - musia používať podložku pod prísnou kontrolou.
- ⚠ Toto zariadenie by nemali používať ľudia s kardiostimulátorom.
- ⚠ Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov alebo osoby s obmedzenými fyzickými, duševnými schopnosťami alebo ľudia, ktorí nemajú vedomosť o zariadení, len ak sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, ktorý si tieto pokyny prečítali alebo osoba, ktorá bola poučená o bezpečnom používaní zariadenia a pochopení rizík spojených s používaním elektrickej vykurovacej podložky. Čistenie a údržbu zariadenia nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- ⚠ Nemôžu ho používať veľmi malé deti (vek  0-3 od 0 do 3 rokov). Zariadenie by nemali používať deti staršie ako 3 roky, ak rodič alebo opatrovateľ nenastavili úroveň teploty pre dieťa alebo poinštruuje dieťaťu, ako bezpečne používať prepínač režimov výberu teploty.
- ⚠ Prístroj je možné pripojiť k elektrickému systému

len s parametrami zhodnými s parametrami, ktoré boli umiestnené na typovom štítku zariadenia.

- ⚠ Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený autorizovanou službou, aby sa predišlo všetkým možným rizikám.
- ⚠ Ak chcete použiť vyhrievaciu podložku VITAMMY® HEAT spolu so zdravotníckymi pomôckami, obráťte sa na svojho fyzioterapeuta alebo lekára. Ak trpíte poruchami krvného obehu alebo cukrovkou, pred použitím zariadenia sa poraďte so svojim lekárom.
- ⚠ Nekladte podložku na horľavé miesta alebo obzvlášť citlivé oblasti.
- ⚠ Nadmerné zahrievanie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.
- ⚠ Nepoužívajte podložku spolu s tekutinami, masťami alebo gélmi ktoré vytvárajú teplo.
- ⚠ Nepoužívajte podložku bez návleku.
- ⚠ Prístroj nepoužívajte v blízkosti anestetík, horľavých so vzduchom, kyslíkom a oxidom dusným.
- ⚠ Kábel udržiavajte mimo dosahu tepla.
- ⚠ Nevystavujte zariadenie priamym atmosférickým podmienkam (dážď, slnko atď.)
- ⚠ Nevyťahujte sieťový kábel ani zariadenie, ak ste ho nevypli.
- ⚠ Nevystavujte zariadenie vysokým teplotám.

- ⚠ Nedotýkajte sa prístroja mokrými rukami.
- ⚠ Nepoužívajte podložku, ak je vlhká alebo mokrá.
- ⚠ Podložku nie je možné prať, ani chemicky čistiť.

INÉ TIPY

ČISTENIE A ÚDRŽBA PODLOŽKY

1. Pred čistením odpojte podložku z elektrickej zásuvky.
2. Odstráňte kryt a na čistenie škvrín, alebo celého povrchu podložky použite mierne navlhčenú tkaninu alebo špongiu.
3. Pred opätovným použitím skontrolujte, či je podložka úplne suchá.

- ⚠ Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá.

NÁVOD NA PRANIE A ÚDRŽBA PRODUKTU

Vyvetčte návlek z podložky. Umyte ju ručne jemným mydlom a horúcou vodou (40 ° C). Nechajte vyschnúť, bez toho, aby ste ho oplachovali. Vyhrievaciu podložku z ktorej jeodňatý návlek neperte. Ak návlek stráca farbu alebo je opotrebovaný, vymeňte ho za nový. Pred použitím skontrolujte, či je vyhrievacia podložka a návlek úplne suchý.

USKLADNENIE VYHRIEVAČEJ PODLOŽKY

Po použití sa má podložka uložiť v súlade s nasledujúcimi pravidlami:

1. Nechajte ju vychladnúť pred jej zložením a vložením späť do úložného priestoru.
2. Počas skladovania neumiestňujte iné predmety na podložku, aby ste sa vyhli pokrčeniu alebo poškodeniu.
3. Pravidelne kontrolujte, či nevykazuje známky poškodenia alebo opotrebenia. Ak sa tieto znaky objavajú, obráťte sa na predajcu alebo servisné stredisko skôr, ako ho opäť použijete
4. Vyhrievacia podložka má byť uložená na suchom mieste.

- ⚠ Toto zariadenie nie je určené na lekárske účely v nemocniciach

LIKVIDÁCIA NEPOTREBNÉHO ZARIADENIA PODĽA NORIEM EURÓPSKEJ ÚNII



Toto zariadenie je vyrobené v súlade so smernicou 2012/19 / EÚ. Symbol preškrtnutého koša znamená, že zariadenie nemôže byť zlikvidované spoločne s iným komunálnym odpadom. Zariadenie by malo byť hodené do špeciálneho kontajneru na použité elektronické a elektrické zariadenia alebo vrátené do obchodu, kde si kupujete podobné zariadenia. Za správnu likvidáciu zariadenia zodpovedá používateľ. Správne odložené zariadenie je možné recyklovať, aby sa zabránilo negatívnemu vplyvu na životné prostredie a zdravie.

0

ROZMERY A TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

MODEL LMHP-S-002

Napájacie napätie: 230 V AC

Aktuálna frekvencia: 50 Hz

Sila: 110 W

Rozmer vankúša: 30,5 × 38 cm

Rozmer návleku: 31 × 42 cm

Podmienky uskladnenia: 10–40°C

Najvyššia teplota, ktorú dosiahne tento vankúš, je aj najvyššia teplota, ktorú umožňujú európske normy pre bezpečnosť používateľa.

VYSVETLIVKY POUŽITÝCH SYMBOLOV

Výstražné značky a symboly, ktoré sa môžu objaviť v pokynoch a na prístroji, sú dôležité pre zabezpečenie bezpečného používania zakúpeného zariadenia. Ich význam je vysvetlený v tabuľke:

	Prečítajte návod		Výrobca
	Nepoužívajte zložené alebo pokrčené		Zariadenie spĺňa požiadavky stanovené v platných smerniciach CE: Smernica 2006/95 / ES o nízkom napätí Smernica EMC 2004/108 / ES
	Nežehliť		Nežmýkať
	Neprepichujte		Nesušiť v sušičke
	Nebieliť		Sušiť na radiátore
	Uchovávať mimo dosahu vlhkosti		Uchovávať mimo dosahu tepla
	Neprať v pračke		Prať ručne
	Nečistiť chemicky	 	Nepotrebné zariadenie sa musí zlikvidovať v súlade s platnými predpismi. Toto zariadenie je vyrobené v súlade so smernicou 2012/19 / EÚ. Symbol preškrtnutého koša znamená, že zariadenie nemožno likvidovať s iným komunálnym odpadom. Zariadenie by malo byť hodené do špeciálneho kontajneru na použité elektronické a elektrické zariadenia alebo vrátené do obchodu, kde si kupujete podobné zariadenia. Za správnu likvidáciu zariadenia zodpovedá používateľ.
	Zariadenie triedy II		
	Pre deti nad 3 roky		

Záruka

ZARIADENIE	VITAMMY HEAT (LMHP-S-002)
Subjekt poskytujúci záruku	Mlongauer, s.r.o., Hlavná 43, 953, Babindol
Infolinka pomoci a technickej podpory	tel. +421904404831 e-mail:mlongauer@mlongauer.sk
ZÁRUKA	Ručiteľ ubezpečuje kupujúceho, že zariadenie VITAMMY, na ktoré sa vzťahuje táto záruka, bolo navrhnuté a vyrobené na základe vysokých štandardov kvality a kvalitného vybavenia, bez materiálových alebo výrobných chýb, ktoré by mohli narušiť jeho správnu prevádzku. V prípade väd, škôd a chýb odhalených počas záručnej lehoty Ručiteľ bezplatne opraví alebo vymení zariadenie za nové, čo najskôr, nepresahujúce 30 dní.
Typ zárukky	Táto záruka predpokladá, že reklamovaný produkt bude doručený do servisu na náklady kupujúceho, opravené bezodplatne a doručené bezplatne kupujúcemu.
Doba záruky	24 mesiacov na zariadenie 6 mesiacov na náväk na vankúš.
Priebeh záruky	Záruka platí od dátumu zakúpenia, ktorý je potvrdený dokladom o kúpe, ktorý musí byť pripojený k záručnému listu
Miesto záruky	Záruka je platná na území SR.
Postup v prípade poruchy	Ak chcete využiť záruku, do 14 dní od odhalenia chyby sa obráťte na infolinkupomoci a technickej podpory a požiadajte o pomoc a v prípade potreby začinite reklamáciu. V rámci reklamácie by malo byť chybné zariadenie odoslané na adresu servisu, priložené k tejto záručnej karte spolu s dokladom o kúpe
Podmienky platnosti záruky	V záujme zachovania záruky doložite spolu s chybným zariadením, tento záručný list (správne vyplnený a podpísaný) a doklad o zakúpení s uvedením dátumu predaja, spolu s názvom obchodu.

Obmedzenia a vylúčenie záruky	Záruka neposkytuje žiadnu kompenzáciu za nepriamu alebo priamu škodu spôsobenú osobám alebo zariadeniam, keď prístroj nefungoval alebo bol v servisnom stredisku	
	Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie zariadenia, ako aj na chyby a škody spôsobené: • nevhodné používanie (nie podľa určeného použitia) alebo spôsobom, ktorý nie je v súlade s návodom na použitie • nevhodné používanie alebo nezlučiteľné s pokynmi na uskladnenie a údržbu (napr. Používanie nevhodných čistiacich prostriedkov) a používanie nevhodných spotrebných materiálov • náhodné opravy anepovolené zmeny prístroja • vonkajšie príčiny (atmosférické javy, prepätia v elektrickej sieti, nesprávne nabíjanie atď.)	
	Záruka sa nevzťahuje na poruchu produktu z dôvodu zmien vlastností (poškodenia) komponentov, ktoré sú vystavené prirodzenému opotrebovaniu.	
	Záručné opravy nie sú činnosti súvisiace s údržbou a čistením zariadenia opísané v užívateľskej príručke	
Pečiatka a podpis predajcu	Dátum	Podpis kupujúceho

Výrobok je certifikovaný CE



KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

VÝROBCA:



Zhejiang LuMeng Health & Technology CO.,LTD

Zhenzhong Road North, Shadi Village, Wangtan Town, Shaoxing, Zhejiang Province, China

DISTRIBÚTOR PRE SR, ČR a Maďarsko

Mlongauer, s.r.o.

Hlavná 43, 951 53

Infolinka pomoci a technickej podpory: +421940404831