

VITAMMY®

SMILE

DETSKÁ SONICKÁ ZUBNÁ KEFKA

Model TB8041

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím si prosím prečítajte návod.

ÚVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali zubnú kefku VITAMMY SMILE (TB8041).

Táto príručka obsahuje dôležité bezpečnostné informácie, pravidlá starostlivosti o zakúpený produkt a návod na správne používanie zariadenia.


- ☐ Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.

UPOZORNENIA

Pri používaní elektrických zariadení vždy dodržiavajte základné bezpečnostné pravidlá:

- ☐ Prečítajte si všetky pokyny výrobcu.
- ☐ Batériu nevhadzujte do ohňa, neskratujte ju.
- ☐ Nenabíjajte batériu, ktorá nie je nabíjateľná.
- ☐ Dodržujte prísne pokyny používania batérií.
- ☐ Nepoužívajte nabíjateľné batérie (nabíjateľné batérie).
- ☐ Pred výmenou batérie vypnite kefku a vysušte kryt. Potom vložte novú batériu podľa označenia polarít.
- ☐ Použité batérie zlikvidujte v súlade s platnými predpismi.
- ☐ Ak kefku nepoužívate pol mesiaca alebo dlhšie, vyberte batériu.
- ☐ Nepoužívajte batériu, ktorej doba použiteľnosti uplynula.
- ☐ Kefku neponárajte do horúcej vody.
- ☐ Toto zariadenie môžu obsluhovať deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými psychologickými schopnosťami len po dôkladnom poučení o bezpečnom používaní tohto zariadenia a po pochopení rizík spojených s jeho používaním. S týmto prístrojom by sa deti nemali hrať.
- ☐ Toto zariadenie môžu používať deti a osoby so zdravotným postihnutím alebo len pod dohľadom dospelých.
- ☐ Čistenie a starostlivosť o zariadenie by nemali byť zverené deťom bez dozoru dospelých.
- ☐ Nestláčajte zubnú kefku a / alebo je nepritláčajte na ďasná veľkou silou. Nečistite jedno miesto dlhú dobu, aby ste nepoškodili povrch zubov a / alebo ďasien.
- ☐ Pred každým použitím skontrolujte, či nie je kefka poškodená.
- ☐ Konzultujte u svojho zubného lekára, či môžete bezpečne používať sonickú kefku, ak ste po chirurgickom zákroku, alebo stomatologickom zákroku.
- ☐ Na začiatku používania zubnej kefy sa môže objaviť krvácanie z ďasien. Ak nezmizne po týždni používania kefy, poraďte sa so svojím lekárom.
- ☐ Ak máte kardiostimulátor alebo iné elektronické implantáty, pred prvým použitím kefy sa poraďte so svojím lekárom.
- ☐ Kefka je určená na individuálne použitie - nepoužívajte ju spolu s inými ľuďmi.
- ☐ Odporúča sa vymeniť hlavu kefy každé 3 mesiace.
- ☐ Uchovajte si návod pre budúcnosť.


POPIS ZARIADENIA

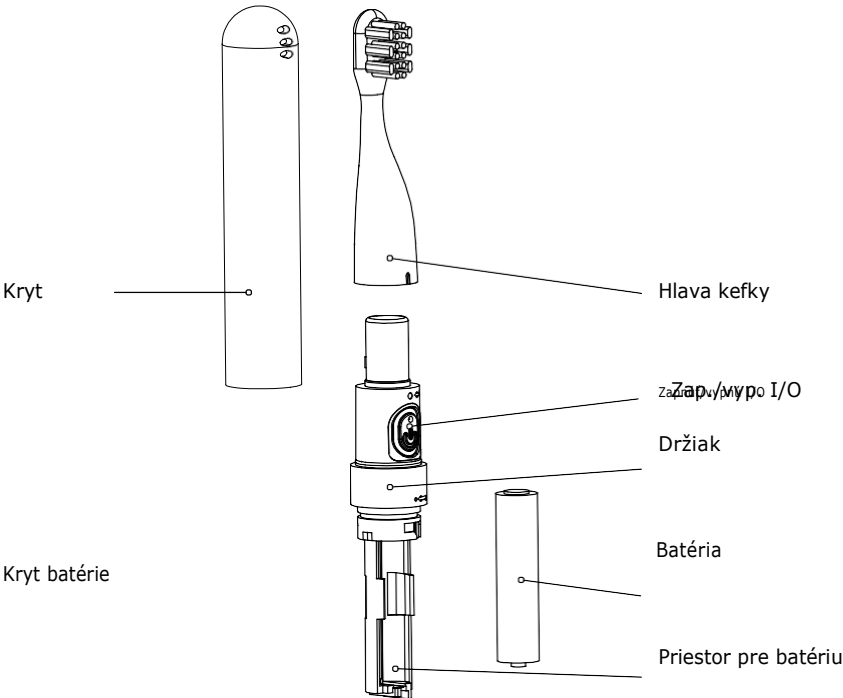

- ☐ POZOR! Pred prvým použitím odstráňte fóliu, ktorá izoluje batériu.

ZALOŽENIE BATÉRIE

- Kryt batérie otočte proti smeru hodinových ručičiek. Potom odnítte kryt batérie z rukoväte.
- Vložte batériu do priehradky na batérie podľa nasledujúceho obrázka:

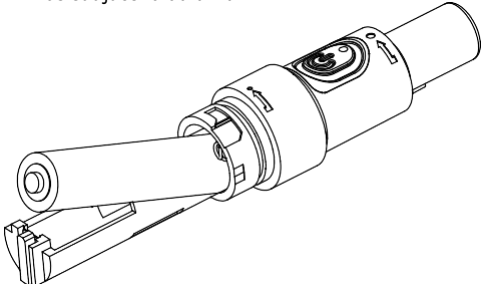

- Nasuňte kryt pre batérie na miesto a potom ho otočte v smere hodinových ručičiek.

INŠTALÁCIA HLAVY KEFKY

- Odstráňte kryt.
- Založte hlavu kefy podľa obrázku nižšie



- Otočte hlavu kefy v smere hodinových ručičiek, aby ste ju zaistili.

- Odstráňte kryt.
- Na **vypnutú** kefku aplikujte zubnú pastu.
- Priložte kefku na povrch zubov.
- Zapnite kefku pomocou tlačidla I / O a začnite si čistiť zuby.
- ☐ POZOR! Nestláčajte ovládač kefy nechťom, pretože týmto spôsobom môžete poškodiť gumu.
- Odporúča sa čistiť si zuby 2 minúty.
- Po dokončení čistenia zubov stlačením tlačidla I / O vypnite kefku. Potom opláchnite hlavu kefy pod tečúcou vodou. Prebytočnú vodu vytrepte z hlavy kefy, vysušte rukoväť uterákom a nasadte kryt, aby ste ochránili vlákna kefy.
- ☐ Zariadenie je určené len na domáce použitie.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- ☐ Pred čistením skontrolujte, či je kryt priestoru pre batérie správne uzatvorený.
- ☐ Opláchnite celú kefku pod tečúcou vodou pri teplote nižšej ako 45 ° C.
- ☐ POZNÁMKA: Nikdy neponárajte celú kefku do vody. Nikdy nepoužívajte toxické čistiace prostriedky. Pred čistením celého zariadenia nikdy neodstraňujte kryt priestoru pre batérie.
- ☐ UPOZORNENIE: Na čistenie nepoužívajte abrazívne chemické prostriedky, rozpúšťadlá alebo netkané textílie.

Odporúčame vymeniť hlavu kefky každé 3 mesiace.

VYSVETLENIA POUŽITÝCH ZNAKOV

Pre bezpečné používanie zakúpeného zariadenia sú dôležité výstražné značky a symboly, ktoré sa môžu objaviť v návode a na kryte zariadenia. Ich význam je vysvetlený v nasledujúcej tabuľke:

	Prečítaj si návod		Výrobca
	Prúd stály		Prístroj vyhovuje požiadavkám stanoveným v príslušných smerniciach CE
	Dátum výroby		Nepotrebné zariadenia sa musia zlikvidovať v súlade s platnými predpismi. Zariadenie sa nesmie likvidovať s iným komunálnym odpadom. Prístroj by mal byť hodený do špeciálnej nádoby na použité elektronické a elektrické zariadenia alebo vrátený do obchodu, kde si zakúpite podobné zariadenie. Za správnu likvidáciu zariadenia zodpovedá používateľ. Správne zlikvidované zariadenie sa môže recyklovať, aby sa zabránilo negatívnemu vplyvu na prírodné prostredie a zdravie.
SN	Sériové číslo		

OBSAH BALENIA

Zoznam komponentov:

1. Držiak kefky VITAMMY SMILE (TB8041)
2. 2 hlavy kefky
3. 1 batéria AAA
4. Návod na použitie
5. Kovové púzdro

ZÁRUKA

ZARIADENIE	VITAMMY SMILE (TB8041)	
POSKYTOVATEĽ ZÁRUKY	Mlongauer, s.r.o., Hlavná 43, 953, Babindol	
TECHNICKÁ PODPORA	tel. +421904404831 e-mail:mlongauer@mlongauer.sk	
ZÁRUKA	Ručiteľ ubezpečuje kupujúceho, že zariadenie VITAMMY, na ktoré sa vzťahuje táto záruka, bolo navrhnuté a vyrobené na základe vysokých štandardov kvality a kvalitného vybavenia, bez materiálových alebo výrobných chýb, ktoré by mohli narušiť jeho správnu prevádzku. V prípade väd, škôd a chýb odhalených počas záručnej lehoty Ručiteľ bezplatne opraví alebo vymení zariadenie za nové, čo najskôr, nepresahujúce 30 dní.	
TYP ZÁRUKY	Táto záruka predpokladá, že reklamovaný produkt bude doručený do servisu na náklady kupujúceho, opravené bezodplatne a doručené bezplatne kupujúcemu	
DOBA ZÁRUKY	24 mesiacov na zariadenie Žiadna záruka na časti a príslušenstvo, ktoré sú vystavené opotrebovaniu počas bežného používania: batérie, hlava kefky	
PRIEBEH ZÁRUKY	Záruka platí od dátumu zakúpenia, ktorý je potvrdený dokladom o kúpe, ktorý musí byť pripojený k záručnému listu	
MIESTO ZÁRUKY	Záruka je platná na území SR	
POSTUP V PRÍPADE PORUCHY	Ak chcete využiť záruku, do 14 dní od odhalenia chyby sa obráťte na infolinku pomoci a technickej podpory a požiadajte o pomoc a v prípade potreby začnite reklamáciu. V rámci reklamácie musí byť chybné zariadenie odoslané na adresu servisu, priloženú k tejto záručnej listine spolu s dokladom o kúpe.	
PODMIENKY PLATNOSTI ZÁRUKY	V záujme zachovania záruky doložte spolu s chybným zariadením, tento záručný list (správne vyplnený a podpísaný) a doklad o zakúpení s uvedením dátumu predaja, spolu s názvom obchodu.	
OBMEDZENIA A VYLÚČENIA ZÁRUKY	Záruka neposkytuje žiadnu kompenzáciu za nepriamu alebo priamu škodu spôsobenú osobám alebo zariadeniam, keď prístroj nefungoval alebo bol v servisnom stredisku	
	Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie zariadenia, ako aj na chyby a škody spôsobené: • Nevhodné používanie (nie podľa určeného použitia) alebo spôsobom, ktorý nie je v súlade s návodom na použitie • nevhodné používanie alebo nezlučiteľné s pokynmi na uskladnenie a údržbu (napr. Používanie nevhodných čistiacich prostriedkov) a používanie nevhodných spotrebných materiálov • náhodné opravy a nepovolené zmeny prístroja vonkajšie príčiny (atmosférické javy, prepätia v elektrickej sieti, nesprávne nabíjanie atď.)	
	Záruka sa nevzťahuje na poruchu produktu z dôvodu zmien vlastností (poškodenia) komponentov, ktoré sú vystavené prirodzenému opotrebovaniu	
	Záručné opravy nie sú činnosti súvisiace s údržbou a čistením zariadenia opísané v užívateľskej príručke.	
PEČIATKA A PODPIS PREDÁVAJÚCEHO	Dátum	Podpis kupujúceho

LIKVIDÁCIA NEPOTREBNÉHO ZARIADENIA PODĽA NORIEM EU

Prítomnosť tohto symbolu na výrobku alebo jeho obale znamená, že tento výrobok nemôžete likvidovať rovnakým spôsobom ako domáci odpad. Preto ste zodpovední za likvidáciu použitého zariadenia a ste povinní ho dodať do príslušného recyklačného miesta pre nepotrebné elektrické zariadenia. Triedenie, likvidácia a recyklácia použitých

zariadení prispievajú k ochrane prírodných zdrojov a zabezpečia, že recyklácia prebieha v súlade so zásadami rešpektovania ľudského zdravia a životného prostredia. Ďalšie informácie o miestach zberu odpadu získate od miestnych úradov alebo od miestneho úradu na likvidáciu domového odpadu.

Výrobca:

Guang Dong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., LTD.

Zhenghe South Road, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

DISTRIBÚTOR:

DISTRIBÚTOR PRE SR,ČR a Maďarsko

Mlongauer, s.r.o.
Hlavná 43, 951 53 Babindol Infolinka pomoci a technickej podpory: +421940404831 www.babys.sk
mlongauer@mlongauer.sk

Produkt má certifikát CE

Vyrobené v Číne / Made in China