

Tick Away

CZ Návod k použití. Pouze pro zevní použití.
Určeno k odstraňování klíšťat pouze u osob starších čtyř let věku.

 Před použitím si pečlivě přečtete návod k použití.
 Prostředek používejte pouze podle pokynů.
 Nepoužívejte, je-li dávkovač nebo obal poškozený.

OBSAH

1x 38ml dávkovač s fixním uzávěrem aplikátoru; obsahuje dimetyléther (DME)
1x návod k použití
1x odstraňovací kartička s lupou

ÚČEL POUŽITÍ

Dr.Max Tick Away hubí klíšťata rychle, bezpečně a bezdotykově a umožňuje jejich snadné odstranění z kůže. Klíště odstráňte co nejdříve po přísátí, abyste snížili potenciální rizika spojená s přenosem nemoci přenášených klíšťaty.

CO JSOU TO KLÍŠŤATA?

Klíšťata jsou parazité žijící se zvířecí i lidskou krví. V Evropě existují různé druhy klíšťat. Nejběžnější je klíště obecné (*Ixodes ricinus*). Klíště obecné může na lidi i zvířata přenést řadu onemocnění.

KONTRAINDIKACE

- Dr.Max Tick Away je kontraindikován v následujících případech:
- V případě potvrzené diagnózy onkologického onemocnění, příp. při léčbě onkologického onemocnění.
- U klíšťat přísátých v okolí očí a na obličej; dále na hrudi, v oblasti genitálií, prsou nebo hýždí.
- Na vysoce pigmentované nebo tmavě pigmentované pokožce kvůli riziku hypopigmentace.
- U podrážděné, infikované nebo citlivé pokožky.
- V případě přecitlivlosti nebo alergie na extrémní chlad (kopřivka v reakci na chlad).
- U diabetiků a osob s onemocněním oběhového systému (Raynaudova nemoc).
- U osob užívajících imunosupresivní léky nebo s potvrzenou diagnózou autoimunitního či kolagenového onemocnění.
- V případě infekce HIV.
- U osob užívajících antikoagulační léky a pacientů s hemofilií.
- Použití u dětí do čtyř let.

VAROVÁNÍ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

- Extrémně hořlavý. Tlakový dávkovač. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
- Zákaz kouření.
- Pouze pro zevní použití.
- Nepropichujte ani nespálujte a to ani po použití.
- Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
- Nevystavujte prostředek teplotám nad 50 °C.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Sprej nevdechujte.
- Zabraňte kontaktu s očima. Nestříkejte do očí, abyste nezpůsobili omrzlinu a oslepnutí.
- Není-li prostředek používán v souladu s tímto návodem k použití, může způsobit omrzlinu, depigmentaci nebo vznik jizev.
- Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se s lékařem.
- Pokud se objeví zdravotní obtíže (může k nim docházet až po několika dnech, dokonce až týdnech), jako např. zarudnutí pokožky, horečka, bolest hlavy, únava, vyrážka na kůži v podobě ohraničené skvrny, konzultujte svůj stav s lékařem. Nezapomeňte uvést, že jste měli prisáté klíště.

NÁVOD K POUŽITÍ

Upozornění: Nesnímejte z dávkovače fixní víčko s aplikátorem.

Obrázek 1

Nastavte otvor aplikátoru cca 1 cm nad klíště. Pozor: Nedotýkejte se aplikátorem kůže ani klíštěte! Držte dávkovač aerosolu v co nejvíce vertikální poloze.

Obrázek 2

Uvolněte čtyřmi stisky kryokapalinu asi 1 cm nad klíštětem. Pokud se klíště stále ještě hybe, zopakujte celý postup po 10 minutách.

Obrázek 3

Klíště by mělo po zmrznutí odpadnout. Pokud k tomu nedojde, velice opatrně ho odstraňte pomocí přiložené odstraňovací kartičky.

Poznámka: Je možné, že v průběhu zákroku nebo těsně po něm ucítíte mírné bolestivé pocity či brnění. Tyto pocity postupně vymizí.

Dr.Max⁺

Tick Away

Dr.Max⁺

SK Návod na použitie. Len na vonkajšie použitie.
Určené na odstraňovanie klíšťov len u osôb starších ako štyri roky.

 Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie.
Produkt používajte len podľa pokynov.
 Nepoužívajte, ak je dávkovač alebo obal poškodený.

OBSAH

1x 38 ml dávkovač s fixným uzáverom aplikátora; obsahuje dimetyléter (DME)
1x návod na použitie
1x odstraňovacia kartička s lupou

ÚČEL POUŽITIA

Dr.Max Tick Away hubí klíšťe rýchlo, bezpečne a bezdotykovu a umožňuje ich ľahké odstránenie z kože. Klíšťa odstráňte čo najskôr po prisátí, aby ste znížili potenciálne riziká spojené s prenosom chorôb prenášaných klíšťami.

ČO SÚ KLÍŠŤE?

Klíšťe sú parazity žijace sa zvieracou aj ľudskou krvou. V Európe existujú rôznice druhy klíšťov. Najbežnejším je klíšť obyčajný (*Ixodes ricinus*). Klíšť obyčajný môže na ľudí aj zvieratá preniesť mnohé ochorenia.

KONTRAINDIKÁCIE

- Dr.Max Tick Away je kontraindikovaný v nasledujúcich prípadoch:
- v prípade potvrdenej diagnózy onkologického ochorenia, príp. pri liečbe onkologického ochorenia,
 - pri klíšťoch prisátých v okolí očí a na tvári; ďalej na hrudi, v oblasti genitálií, prs alebo zadku,
 - na vysoko pigmentovanej alebo tmavo pigmentovanej pokožke pre riziko hypopigmentácie,
 - na podráždenej, infikovanej alebo citlivej pokožke,
 - v prípade precitlivlosti alebo alergie na extrémny chlad (žihľavka ako reakcia na chlad),
 - u diabetikov a osôb s ochorením obehového systému (Raynaudova choroba),
 - u osôb užívajúcich imunosupresívne lieky alebo s potvrdenou diagnózou autoimunitného alebo kolagénového ochorenia,
 - v prípade infekcie HIV,
 - u osôb užívajúcich antikoagulačné lieky a pacientov s hemofiliou,
 - pre použitie u detí do 4 rokov.

UPOZORNENIA A PREVENTÍVNE OPATRENIA

- Extrémne hořlavý. Tlakový dávkovač. Chraňte před teplem, horúcimi povrchy, iskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
- Zákaz fajčení.
- Len na vonkajšie použitie.
- Neprepichujte ani nespálujte ani po použití.
- Nestříkajte do otvoreného ohňa ani jiných zdrojov zapálení.
- Produkt nevystavujte teplotám nad 50 °C.
- Uskladňujte mimo dosahu detí.
- Sprej nevdychujte.
- Zabraňte kontaktu s očami. Nestříkajte do očí, aby ste nespôsobili omrzlinu a oslepnutie.
- Ak sa produkt nepoužíva v súlade s týmto návodom na použitie, môže spôsobiť omrzlinu, depigmentáciu alebo vznik jaziev.
- Ak ste tehotná alebo dojčíte, poraďte sa s lekárom.
- Ak sa objavia zdravotné ťažkosti (môžu nastať až po niekoľkých dňoch, dokonca až týždňoch), ako napr. začervenanie pokožky, horúčka, bolesť hlavy, únava, vyrážka na koži v podobe ohraničenej škvrny, konzultujte svoj stav s lekárom. Nezabudnite uviesť, že ste mali prisátého klíšťa.

NÁVOD NA POUŽITIE

Upozornenie: Nesnímajte z dávkovača fixný uzáver aplikátora.

Obrázok 1

Nastavte otvor aplikátora cca 1 cm nad klíšťa. Pozor: Nedotýkajte sa aplikátorom kože ani klíšťa! Držte dávkovač aerosól u čo najviac vertikálnej polohy.


Obrázok 2

Štyrmi stlačeniami uvoľnite asi 1 cm nad klíšťom kryokvapalinu. Ak sa klíšť ešte stále hybe, zopakujte po 10 minútach celý postup.

Obrázok 3

Klíšť by mal po zmrznutí odpadnúť. Ak neodpadne, veľmi opatrne ho odstráňte pomocou priloženej odstraňovacej kartičky.

Poznámka: Je možné, že počas zákroku alebo tesne po ňom budete pociťovať miernu bolesť alebo brnenie. Tieto pocity postupne vymiznú.

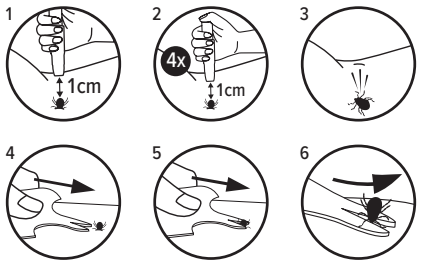

Obrázky 4/5/6 (instrukcie na použitie odstraňovacej kartičky na klíšťe)

1. Pomocou lupy, ktorá je súčasťou odstraňovacej kartičky, zistite, aký veľký je klíšť. Ak je klíšť malý (do 2 mm), použite malý zárez na odstraňovacej kartičke. Väčšinu klíšťov, dokonca aj menších, možno odstrániť bez väčšej námahy pomocou väčšieho zárezu.
2. Ubezpečte sa, že celého klíšťa dobre vidíte.
3. Umiestnite kartičku na kožu tak, aby zárez smeroval ku klíšťovi.
4. Posúvajte kartičku, ktorá sa stále dotýka kože, bližšie ku klíšťovi tak, aby sa klíšť dostal do zúženej časti kartičky – zárezu.
5. Pomalým pohybom kartičku zasuňte zárezom okolo klíšťa tak, aby zostal zaklinený v zárese.
6. Klíšť sa uvoľní a zostane zakliesnený v kartičke.
7. Vydezinfikujte ranu malým množstvom dezinfekčného prípravku s obsahom alkoholu a označte miesto, kde bol klíšť prisatý.
8. Vydezinfikujte odstraňovaciu kartičku horúcou vodou alebo dezinfekčným prípravkom s obsahom alkoholu.

PO ZÁKROKU

- Zárok môže spôsobiť vytvorenie pluzgierikov. Ak sa pluzgieri vytvoria, neprepichujte ich.
- Nedotýkajte sa miesta zákroku, nešúchajte si ho ani sa na ňom neškrabajte.
- Udržiavajte miesto zákroku suché a čisté, aby ste zabránili vzniku infekcie.
- Plávajte, kúpte, sprchujte a umývajte sa normálne, ako obvyčajne.
- Zapamätajte si miesto, kde bol klíšť prisatý. Označte si toto miesto perom alebo si urobte fotografiu.
- Pravidelne si telo kontrolujte, používajte zrkadlo. Ak sa objavia zdravotné ťažkosti (môžu nastať až po niekoľkých dňoch, dokonca až týždňoch), ako napr. začervenanie pokožky, horúčka, bolesti hlavy, únava, vyrážka na koži v podobe ohraničenej škvrny, konzultujte svoj stav s lekárom. Nezapobudnite uviesť, že ste mali prisátého klíšťa.

MOŽNÉ NEŽIADUCE ÚČINKY

- Kryoterapia môže spôsobiť hypopigmentáciu (tvorbu svetlých škvŕn na pokožke) alebo hyperpigmentáciu (tmavé škvrny). Tento efekt postupne vymizne.
- Krvácanie.
- Pluzgieriky.
- Zjavenie, ak sa mraziaca aplikácia podáva dlhšie, než sa uvádza v návode.
- Dočasný diskomfort, ako je bolesť alebo brnenie.
- V prípade pochybností, vzniku infekcie, prípadne iných zdravotných komplikácií sa obráťte na lekára.

ODPORÚČANIA TÝKAJÚCE SA SKLADOVANIA

- Skladujte na chladnom a suchom mieste. Teplota nesmie presiahnuť 25 °C.
- Obsah/obal zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o odpadoch.

REKLAMÁCIE A SERVIS ZÁKAZNÍCKEJ PODPORY

Závažné nežiaduce účinky spojené s používaním tohto produktu musia byť oznámené výrobcovi: Koninklijke Utermöhlen NV, distribútorovi a príslušnej národnej zdravotníckej autorite.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nahlásenia problémov kontaktujte Koninklijke Utermöhlen NV.

Zdravotnícka pomôcka.

Posledná revízia: 02/2021

Tick Away

PL Instrukcja używania. Tylko do użytku zewnętrznego.
Przeznaczony do usuwania kleszczy wyłącznie u osób powyżej 4 roku życia.

Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję używania.
Używaj produktu wyłącznie zgodnie z zaleceniami.
Nie stosuj, jeśli dozownik lub pojemnik są uszkodzone.

ZAWARTOŚĆ

1 dozownik 38 ml z zamocowaną na stałe nasadką z aplikatorem; zawiera dimetyloeter (DME)
1 instrukcja używania
1 karta do usuwania z lupą

PRZECIWWSKAZANIA

Dr.Max Tick Away szybko, bezpiecznie i bezkontaktowo zabija kleszcze oraz umożliwia ich łatwe usunięcie ze skóry. Kleszcza należy usunąć jak najszybciej po wczepieniu się w skórę, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób przenoszonych przez kleszcze.

CZYM SĄ KLESZCZE?

Kleszcze to pasożyty żywiące się krwią zwierząt i ludzi. W Europie istnieją różne gatunki kleszczy. Najczęstszym jest kleszcz pospolity (*Ixodes ricinus*). Kleszcz pospolity może przenosić wiele chorób na ludzi i zwierzęta.

PRZECIWWSKAZANIA

Dr.Max Tick Away jest przeciwwskazany w następujących przypadkach:

- W przypadku potwierdzonej diagnozy i/lub leczenia choroby nowotworowej.
- W przypadku kleszczy wczepionych w okolice oczu lub na twarz, na klatkę piersiową, w okolicach narządów płciowych, na piersiach lub pośladkach.
- Na skórze mocno lub ciemno pigmentowanej z uwagi na ryzyko hipopigmentacji.
- W przypadku skóry podrażnionej, zakażonej lub wrażliwej.
- W przypadku nadwrażliwości lub alergii na ekstremalnie zimno (pokrzywka jako odpowiedź na zimno).
- U osób chorujących na cukrzycę oraz osób z chorobami układu krążenia (choroba Raynauda).
- U osób przyjmujących leki immunosupresyjne lub z potwierdzoną diagnozą choroby autoimmunologicznej lub choroby kolagenowej.
- W przypadku zakażenia wirusem HIV.
- U osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe oraz u pacjentów z hemofilią.
- U dzieci poniżej 4 roku życia.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Skrajnie łatwopalny. Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić przed wysoką temperaturą, gorącymi powierzchniami, iskrami, otwartym ogniem i innymi źródłami zapłonu.
- Zakaz palenia.
- Tylko do użytku zewnętrznego.
- Nie przekłuać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
- Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub innymi źródłami zapłonu.
- Nie wystawiać produktu na działanie temperatur powyżej 50 °C.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Nie wdychać sprayu.
- Unikać kontaktu z oczami. Nie rozpylać w kierunku oczu, aby uniknąć odmrożeń i ślepoty.
- Jeśli produkt nie jest używany zgodnie z niniejszą instrukcją używania, może powodować odmrożenia, odbarwienia lub blizny.
- Jeśli kobieta jest w ciąży lub karmi piersią, należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy zdrowotne (mogą wystąpić po kilku dniach, czy nawet tygodniach), takie jak zaczerwienienie skóry, gorączka, ból głowy, zmęczenie, wysypka skórna o pierścieniowym kształcie, skonsultuj się z lekarzem. Nie zapomnij poinformować o tym, że ugryzł Cię kleszcz.

INSTRUKCJA UŻYWANIA

Ostrzeżenie: Nie zdejmuj z dozownika zamocowanej na stałe nasadki z aplikatorem.


Rysunek 1.
Należy umieścić otwór aplikatora ok. 1 cm powyżej kleszcza. Uwaga: Nie należy dotykać aplikatorem ani skóry ani kleszcza! Dozownik aerozolu należy trzymać możliwie pionowo.

Rysunek 2.
Należy nacisnąć czterokrotnie, by zaaplikować zimną ciecz około 1 cm powyżej kleszcza. Jeśli kleszcz nadal się rusza, powtórz całą procedurę po 10 minutach.

Rysunek 3.

Kleszcz po zamrożeniu powinien odpaść. Jeśli do tego nie dojdzie, bardzo ostrożnie należy go usunąć go za pomocą dołączonej karty do usuwania.

Uwaga: Możliwe, że w trakcie lub wkrótce po zabiegu wystąpią lekko bolesne odczucia lub mrowienie. Odczucia te stopniowo zanikną.

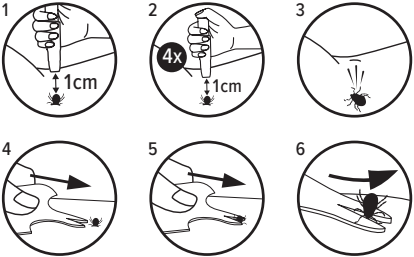

Rysunki 4/5/6 (instrukcja używania karty do usuwania kleszczy)

1. Za pomocą lupy wbudowanej w karcie do usuwania, można ocenić wielkość kleszcza. Jeśli kleszcz jest mały (najwyżej 2 mm), do usunięcia trzeba zastosować małe nacięcia na karcie do usuwania. Większość kleszczy, nawet tych mniejszych, można usunąć bez większego wysiłku za pomocą większego nacięcia.
2. Należy upewnić się, że dobrze widzi się całego kleszcza.
3. Kartę należy umieścić na skórze nacięciem skierowanym w stronę kleszcza.
4. Kartę należy przesunąć po skórze w kierunku kleszcza tak, by dostał się do zwężonej części karty - nacięcia.
5. Delikatnym ruchem wsunąć kartę nacięciem na kleszcza, tak by został zaklinowany w nacięciu.
6. Kleszcz odpadnie i pozostanie zaklinowany w karcie.
7. Ranę trzeba zdezynfekować niewielką ilością środka dezynfekującego na bazie alkoholu i zaznaczyć miejsce, w którym był wczepiony kleszcz.
8. Następnie trzeba zdezynfekować kartę do usuwania gorącą wodą lub środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu.

PO ZABIEGU

- Zabieg może spowodować powstawanie pęcherzy. Jeśli do tego dojdzie, nie należy przebiegać pęcherzy.
- Nie dotykać miejsca, w którym wykonano zabieg, nie skubać go ani nie drapać.
- Miejsce wykonania zabiegu powinno być suche i czyste, aby zapobiegać infekcji.
- Można pływać, kąpać się, brać prysznic i myć się jak zawsze.
- Kleszcz zapamięta miejsce, w którym wczepił się kleszcz. Miejsce to trzeba zaznaczyć długopisem lub zrobić zdjęcie.
- Regularnie trzeba sprawdzać całe ciało z wykorzystaniem lustra. W przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych (mogą pojawić się dopiero po kilku dniach, czy nawet tygodniach), takich jak zaczerwienienie skóry, gorączka, ból głowy, zmęczenie, wysypka skórna o pierścieniowym kształcie, skonsultować się z lekarzem. Nie pamiętać aby poinformować lekarza o ugryzieniu przez kleszcza.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

- Krioterapia może powodować hipopigmentację (powstawanie jasnych plam na skórze) lub hiperpigmentację (ciemne plamy). Efekt ten z czasem znika.
- Krwawienie.
- Pęcherze.
- Blizny, jeśli aplikacja zimna stosowana jest przez okres dłuższy, niż wskazano w instrukcji.
- Tymczasowy dyskomfort, taki jak ból lub mrowienie.
- W przypadku wątpliwości, infekcji lub innych komplikacji zdrowotnych należy skontaktować się z lekarzem.

ZALECENIA DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA

- Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Temperatura nie może przekroczyć 25 °C.
- Wartość/pojemnik usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.

REKLAMACJA I SERWIS WSPARCIA KLIENTA

Każde poważne działanie niepożądane związane z tym produktem należy zgłosić Koninklijke Utermöhlen NV, dystrybutorowi oraz właściwemu urzędowi kontrolnemu.

W razie pytań lub w celu zgłoszenia problemu skontaktuj się z Koninklijke Utermöhlen NV lub dystrybutorem.

Wyrób medyczny.

Data ostatniej aktualizacji: 02/2021

Tick Away

RO Instrucțiuni de utilizare. Numai pentru uz extern.
Destinat doar utilizării pentru eliminarea căpușelor de pe persoane cu vârsta mai mare de 4 de ani.

Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
Utilizați produsul numai conform instrucțiunilor.
Nu utilizați dacă dispenser-ul sau ambalajul este deteriorat.

CONȚINE:

1x dispenser de 38 ml cu capac fix pentru aplicator; conține Dimetileter (DME)
1x instrucțiuni de utilizare
1x card de eliminare a căpușelor, cu lupă

MODO DE UTILIZARE

Dr.Max Tick Away ucide căpușele rapid și în condiții de siguranță, fără a le atinge, făcându-le ușor de îndepărtat de pe piele. Îndepărtarea căpușelor cât mai curând posibil după mușcătură reduce riscurile potențiale asociate cu transmiterea bolilor de către căpușe.

CE SUNT CĂPUȘELE?

Căpușele sunt paraziți care se hrănesc cu sânge animal și uman. În Europa există diferite specii de căpușe. Căpușa comună (*Ixodes Ricinus*) este cea mai frecventă. Căpușa comună poate transmite o serie de boli, atât oamenilor cât și animalelor.

CONTRAINDICAȚII

Dr.Max Tick Away este contraindicat pentru următoarele:

- Atunci când există sau a fost confirmat un diagnostic de cancer și/sau tratament pentru cancer.
- Pentru căpușe pe și în jurul ochilor și feței. Pe piept, zona genitală, sâni sau fese.
- Pe pielea puternic pigmentată sau pigmentată de culoare închisă, din cauza riscului de hipopigmentare.
- Pe pielea iritată, infectată sau sensibilă.
- Atunci când există hipersensibilitate sau alergii la frig extrem (urticaria la frig).
- Pentru diabetici și persoanele cu probleme circulatorii (boala Raynaud).
- Pentru persoanele care iau medicamente imunosupresoare sau atunci când există un diagnostic confirmat pentru boli autoimune sau de collagen.
- Pentru utilizare atunci când există infecție cu HIV.
- Pentru persoanele cărora li se administrează medicamente anticoagulante și pacienții cu hemofilie.
- Pentru utilizarea la copii cu vârsta sub 4 ani.

AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII

- Extrem de inflamabil. Dispenser presurizat. Păstrați la distanță de sursele de căldură, de suprafețele fierbinți, de scântei, flăcări și alte surse de aprindere.
- Fumatul interzis.
- Numai pentru uz extern.
- Nu perforați sau ardeți recipientul, chiar și după utilizare.
- Nu pulverizați pe flăcără deschisă sau pe alte surse de foc.
- Nu expuneți dispenser-ul la temperaturi care depășesc 50°C.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor.
- Nu inhalați spray-ul.
- Evitați contactul cu ochii. Nu pulverizați în ochi, deoarece poate cauza degerături și orbire.
- Produsul poate provoca degerături, depigmentare sau formarea de cicatrice atunci când nu este utilizat în conformitate cu aceste instrucțiuni de utilizare.
- Consultați un medic, dacă sunteți însărcinată sau alăptați.
- Consultați un medic atunci când apar nereguli, de exemplu, roșeață, febră, cefalee, oboseală, erupții cutanate în formă de inel (acest lucru poate dura zile și chiar săptămâni). Nu uitați să menționați că ați fost mușcat de o căpușă.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Măsură de precauție: Nu scoateți capacul fix permanent al aplicatorului de pe dispenser.

Imaginea 1

Poziționați deschiderea aplicatorului la cca. 1 cm deasupra căpușei. Atenție: Nu atingeți pielea sau căpușa cu aplicatorul! Țineți dispenser-ul de aerosoli cât mai vertical posibil.


Imaginea 2

Eliberați crio-lichidul prin apăsarea de 4 ori la cca. 1 cm deasupra căpușei. În cazul în care căpușa încă se mișcă, repetați procedura după 10 minute.

Imaginea 3

Căpușa ar trebui să cadă după ce a fost înghețată. În caz contrar, scoateți cu atenție căpușa cu ajutorul cardului de eliminare a căpușelor inclus.

Notă: Este posibil să aveți o senzație ușoară de durere sau de furnicături în timpul sau imediat după tratament. Aceasta va dispărea treptat.

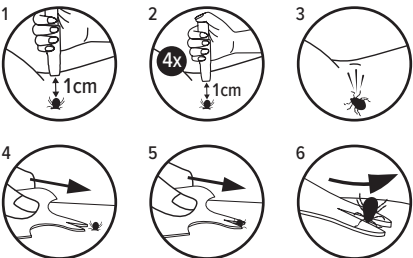

Imaginile 4/5/6 (instrucțiuni card de eliminare a căpușelor)

1. Vedeți dimensiunea căpușei cu lupa din dispozitivul de îndepărtare a căpușelor. Dacă este o căpușă mică (<2 mm) utilizați creștătură mică a cardului de eliminare a căpușei. Cele mai multe căpușe, chiar și cele mai mici, pot fi îndepărtate fără efort cu creștătura mai mare.
2. Asigurați-vă că aveți o vedere bună asupra căpușei.
3. Așezați cardul lângă piele cu creștătura spre căpușă
4. Mutați dispozitivul de îndepărtare a căpușelor aproape de piele lângă căpușă, astfel încât aceasta să intre în partea îngustă a cardului.
5. Continuați să mișcați dispozitivul calm până când căpușa se prinde în partea îngustă a cardului.
6. Căpușa se desprinde și rămâne blocată în cardul de eliminare a căpușelor.
7. Dezinfectați rana cu puțin alcool și marcați la locul unde a fost mușcătura de căpușă
8. Dezinfectați dispozitivul de eliminare a căpușelor cu apă fierbinte sau alcool.

DUPĂ TRATAMENT

- Tratamentul poate provoca bășici. În acest caz, nu spargeți bășicile.
- Nu trageți de sau nu zgâriați zona care a fost tratată.
- Păstrați zona tratată curată pentru a evita infectarea.
- Puteți să înotați, să vă spălați, să faceți baie și duș în mod normal.
- Amintiți-vă locul în care a existat mușcătura de căpușă. Marcați zona cu un stilou sau faceți o fotografie.
- Verificați-vă corpul în mod regulat, utilizați o oglindă. Contactați medicul atunci când apar nereguli (acest lucru poate dura zile sau chiar săptămâni) de exemplu, roșeață, febră, dureri de cap, oboseală, erupții cutanate în formă de inel. Nu uitați să menționați că ați fost mușcat de o căpușă.

EFFECTE SECUNDARE POTENȚIALE

- Procesul de crioterapie poate provoca hipo-pigmentarea (zone deschise la culoare) sau hiper-pigmentarea (zone întunecate). Acestea vor dispărea.
- Sângerare.
- Bășici.
- Cicatrizarea atunci când aplicarea substanței de înghețare se realizează mai mult decât este indicat.
- Disconfort temporar, cum ar fi durerea sau furnicături.
- Consultați un medic în caz de dubii, infecție și/sau complicații.

INSTRUCȚIUNI DE DEPOZITARE

- A se depozita într-un loc răcoros și uscat. A se depozita la temperaturi mai mici de 25 °C.
- Aruncați conținutul/containerul în conformitate cu reglementările locale.

RECLAMAȚII ȘI ASISTENȚĂ PENTRU CLIEȚI

Orice reacții adverse grave asociate cu acest produs trebuie declarate către Koninklijke Utermöhlen NV, distribuitor și autoritatea națională de sănătate din țara dumneavoastră.

Contactați Koninklijke Utermöhlen NV sau distribuitorul pentru orice întrebare sau pentru a raporta probleme.

Dispozitiv medical.

Data ultimei revizuirii: 02/2021

 Dr.Max DBC, Florentinum (D), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha1		COLORS	
PRODUCT NAME:	Tick Away		Black
BAR CODE:	8595566424251		
DIMENSION (rozměr):	240 x 300 mm		
DATE:	08. 04. 2024		
ARTWORK SUPPLIER: GRADESI s.r.o., Michaela Karlova, karlova@gradesi.cz			