



HOT & COLD THERAPY

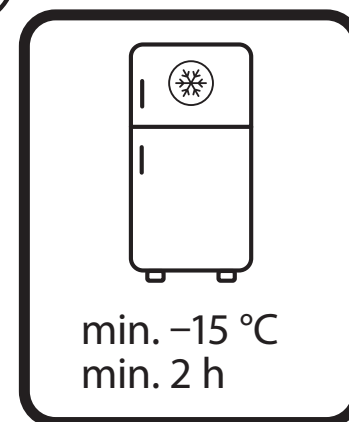

Návod k použití/Návod na použitie/Istruzioni per l'uso/Instrukcja używania/Instrucțiuni de utilizare/Uputstvo za upotrebu

Hřejivý a chladivý gelový polštářek/Hřejivý a chladivý gélový vankúšik/
Cuscinetto in gel riscaldante e raffreddante/Żelowy kompres rozgrzewający/chłodzący/
Compresă cu gel pentru încălzire și răcire/Gel jastučić za grejanje i hlađenje

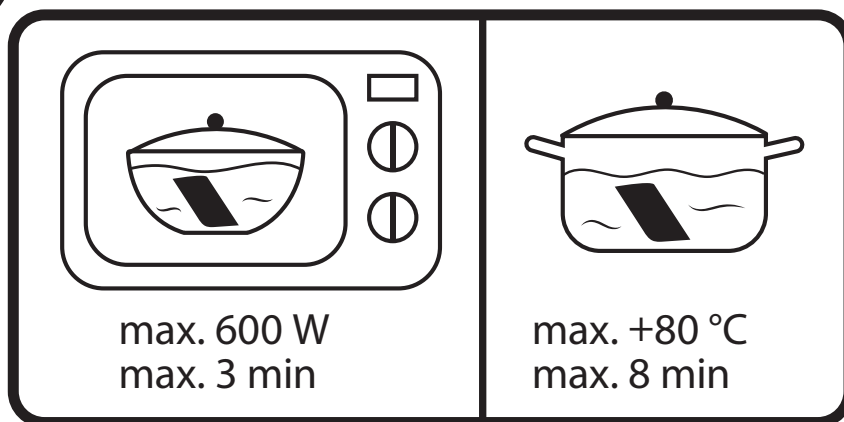

Před použitím vždy zabalte polštářek do ochranného obalu nebo ručníku.
Pred použitím vankúšik vždy zabaľte do ochranného obalu alebo uteráka.
Prima dell'uso, avvolgere sempre il cuscinetto in una custodia/asciugamano protettivo.
Zawsze przed użyciem należy owinać kompres w ochronny pokrowiec lub ręcznik.
Întotdeauna înfășurați compresa într-o husă de protecție/un prosop înainte de utilizare.
Pre upotrebe uvek umotajte jastučić u zaštitnu navlaku/peškir.



Koolcare Technology Co., Ltd
No. 6-10, A5, Shandong International Tech Park, South
Waihuan Road, Linyi, 276017 Shandong, Čína/Cina/
Chiny/China/Kina
Facility: Wenlv Healthcare Park, No.18, Zhenbei Road,
Xinyi city, 221400 Jiangsu, Čína/Cina/Chiny/China/Kina



Prolinx GmbH,
Brehmstr. 56, 40239, Düsseldorf,
Německo/Nemecko/Germania/
Niemcy/Nemačka



Dr. Max Pharma s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika/Repubblica Ceca/
Czechy/Republica Cehă



Dr. Max Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 60a,
54-613 Wrocław, Polska

Ovlašćeni predstavnik i distributer:
Dr. Max Warehouse d.o.o., Viline Vode bb,
11060 Beograd-Palilula, Srbija



KK-CH-350g



CZ Dr. Max Hot & Cold Therapy je hřejivý a chladivý gelový polštářek pro opakované použití. Balení obsahuje i látkovou obal s elastickým páskem pro upevnění. Gel je bezpečný a netoxický. **Indikace** Tento zdravotnický prostředek lze použít při bolesti, podvrtnutí, namožení a bolesti svalů, pomohžděněních, otocích a zánětech. **Složení** Glycerol, sodná sůl karboxymethylcelulózy, chlorid sodný, dezinfektant a voda.

TEPELNÁ TERAPIE ☹️

Účelny účel

Hřejivý obklad pomáhá dočasné ulevit od mírné bolesti svalů a kloubů spojené s přetížením, namožením, podvrtnutím a artritidou.

Způsob použití

Horká voda

Polštářek ponořte do nádoby s horkou vodou o teplotě maximálně 80 °C na přibližně 8 min. Nádoba s vodou musí být po celou dobu odstraněna ze zdroje tepla.

Mikrovlnná trouba

Vložte polštářek do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby a zcela jej zalijete vodou. Nastavte mikrovlnnou troubu na maximálně 600 W a ohřívejte polštářek max. po dobu 3 minut. Pečlivě kontrolujte gelový polštářek, pokud není dostatečně teplý, ohřívejte jej v 30sekundových intervalech, dokud nedosáhne požadované teploty. Při ohřívání v mikrovlnné troubě sledujte polštářek, a pokud se nafoukne, okamžitě vypněte mikrovlnnou troubu vypněte. Poté vložte polštářek do ochranného obalu/ručnicku, jinak hrozí nebezpečí popálení.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy neohřívejte polštářek přímo v mikrovlnné troubě ani jinou metodou bez použití vodní lázně!

TERAPIE CHLADEM ☹️

Účelny účel

Chladivý obklad pomáhá zmírnit bolest, zánět a otok.

Způsob použití

Vložte polštářek na přibližně 2 hodiny do mrazáku (min. -15 °C). Poté vložte polštářek do ochranného obalu/ručnicku, jinak hrozí poškození.

Maximální doba použití je 20 minut a aplikaci lze opakovat po dvouhodinové přestávce.

Kontraindikace

Dr. Max Hot & Cold Therapy by neměl být používán osobami, které jsou necitlivé na extrémní teploty, jako jsou osoby s oběhými problémy, cukrovkou, poškozením nervů, ochrnutím nebo citlivou pokožkou. Při používání u kojenců a dětí je nutný dohled dospělé osoby.

Preventivní opatření a upozornění

- Nikdy nepoužívejte polštářek přímo na pokožku, protože extrémní teplota může způsobit popáleniny, před použitím jej vždy zabalte do ochranného obalu/ručnicku.
- Pokud dojde k poškození polštářku a jeho obsah se dostane do kontaktu s kůží nebo očima, ihned je vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypijte velké množství vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- Uchovávejte mimo dosah dětí. Pouze pro vnější použití. V případě propíchnutí nebo uniku zlikvidujte.
- Případné závažné nežádoucí příhody nahláste výrobci a příslušnému orgánu.
- Na polštářek nesedějte a nevyvíjejte na něj nadměrný tlak, aby nedošlo k jeho prasknutí.
- Nikdy nepoužívejte polštářek během spánku.
- Nepřikládajte polštářek na poškozenou nebo citlivou pokožku.
- Pokud je aplikace polštářku nepříjemná, okamžitě ho z tela odstráňte.
- Polštářek nezahřívejte pohnutí.
- Buďte opatrní při vytahování horkého polštářku z vody. Je-li příliš horký, počkejte, až chladne, a teprve poté ho přiložte na tělo.
- Polštářek nezahřívejte v troubě nebo na přímém ohni. Je-li polštářek zahříván příliš dlouho nebo při příliš vysoké teplotě, může prasknout.

Jak pečovat o váš Dr. Max Hot & Cold Therapy

Polštářek můžete umýt ručně ve slabém čisticím prostředku. Nepoužívejte alkohol ani jiné rozpouštědla.

Model

KK-CH-350g
Materiál: polyethylen (PE), nylon.
Datum použitelnosti

4 roky.

Transportní a skladovací podmínky

Produkt lze skladovat a připravovat při teplotě od -15 °C do 40 °C v suchém a větraném prostředí.

Datum poslední revize: 2020. 12. 21

Verze: A/0

Soubor č.: KK-CE-2.1

SK Dr. Max Hot & Cold Therapy je hřejivý a chladivý gelový vankúšik na opakované použitie. Balenie obsahuje aj látkový obal s elastickou páskou na upevnenie. Gél je bezpečný a netoxický. **Indikácie** Túto zdravotnícku pomôcku možno použiť pri bolesti, vyvrtnutí, natiahnutí a bolestivosti svalov, modrinách, opuchoch a zápaloch.

Zloženie Glycerol, sodná soľ karboxymetylcelulózy, chlorid sodný, dezinfektant a voda.

TEPELNÁ TERAPIA ☹️

Účelny účenia

Hrejivý obklad pomáha dočasne uľaviť od miernych bolesti svalov a kĺbov spojených s pretiažením, natiahnutím, vyvrtnutím a artritídou.

Spôsob použitia

Horúca voda

Vankúšik ponorte do nádoby s horúcou vodou s teplotou maximálne 80 °C na približne 8 min. Nádoba s vodou musí byť po celý čas odstránená zo zdroja tepla.

Mikrovlnná rúra

Vankúšik vložte do nádoby vhodnej do mikrovlnnej rúry a úplne ho zalajte vodou. Mikrovlnnú rúru nastavte maximálne na výkon 600 W a vankúšik ohrievajte maximálne 3 minúty. Gélový vankúšik starostlivo kontrolujte, ak nie je dostatočne teplý, ohrievajte ho v 30 sekundových intervaloch, kým nedosiahne požadovanú teplotu. Pri ohrievaní v mikrovlnnej rúre venujte pozornosť vankúšiku a ak sa nafúkne, okamžite vypnite mikrovlnnú rúru. Potom vložte vankúšik do ochranného obalu/rukavice, inak hrozí riziko popálenia.

UPOZORNENIE: Nikdy neohrievajte vankúšik priamo v mikrovlnnej rúre ani inou metódou bez použitia vodného kúpeľa!

TERAPIA CHLADOM ☹️

Účelny účenia

Chladivý obklad pomáha zmierniť bolesť, zápal a opuch.

Spôsob použitia

Vankúšik vložte do mrazničky (min. -15 °C) na približne 2 hodiny. Potom vložte vankúšik do ochranného obalu/rukavice, inak hrozí riziko poškodenia.

Maximálny čas použitia je 20 minút a aplikáciu možno opakovat po dvojhodinovej prestávke.

Kontraindikácie

Dr. Max Hot & Cold Therapy by nemali používať osoby, ktoré sú necitlivé na extrémne teploty, ako napríklad osoby s poruchami krvného obehu, cukrovkou, poškodením nervov, ochrnutím alebo citlivou pokožkou. Pri používaní u dojčiat a detí je nutný dohľad dospelého osoby.

Preventívne opatrenia a upozornenie

- Nikdy nepoužívajte vankúšik priamo na pokožku, pretože extrémna teplota môže spôsobiť popáleniny, pred použitím ho vždy zabalte do ochranného obalu/sačky.
- Ak sa vankúšik poškodí a jej obsah sa dostane do kontaktu s pokožkou alebo očami, okamžite ju opláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri požití vypijte veľké množstvo vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Uchovávejte mimo dosahu detí. Len na vonkajšie použitie. V prípade prepichnutia alebo uniku zlikvidujte.
- Případné závažné nehody nahláste výrobci a příslušné autoritě.
- Nesadajte si na vankúšik a nevyvíjajte na ňu nadmerný tlak, aby nedošlo k jeho prasknutiu.
- Nikdy nepoužívejte vankúšik počas spánku.
- Neprikładajte vankúšik na poškodenú alebo citlivú pokožku.
- Ak je aplikácia vankúšika nepříjemná, okamžitě ho z tela odstráňte.
- Vankúšik nezahrievajte pohnutí.
- Buďte opatrní pri vytahovaní horúceho vankúšika z vody. Ak je príliš horúci, počkajte, kým vychladne, a až potom ho priložte na telo.
- Vankúšik nezahrievajte v rúre alebo na priamom ohni. Ak je vankúšik zahrievaný príliš dlho, alebo pri príliš vysokej teplote, môže prasknúť.

Ako sa starať o váš Dr. Max Hot & Cold Therapy

Vankúšik môžete umývať ručne v jemnom čistiacom prostriedku. Nepoužívať alkohol ani iné rozpúšťadlá.

Model

KK-CH-350g
Materiál: polyetylén (PE), nylon.
Datum použitelnosti

4 roky.

Preprava a skladovacie podmienky

Produkt je možné skladovať a prepravovať pri teplote -15 °C až 40 °C v suchom a vetranom prostredí.

Datum poslednej revízie: 2020. 12. 21

Verzia: A/0

Súbor č.: KK-CE-2.1

IT Dr. Max Hot & Cold Therapy è un cuscinetto in gel riscaldante e raffreddamento per l'uso ripetuto. La confezione comprende anche una custodia di stoffa con un elastico per il fissaggio. Il gel è sicuro e non tossico.

Indicazioni

Questo dispositivo medico può essere utilizzato per il dolore, le distorsioni, gli strappamenti e gli indolenzimenti muscolari, le contusioni, i gonfiore e le infiammazioni.

Composizione

Glicerolo, carbossimetilcellulosa di sodio, cloruro di sodio, disinfettante e acqua.

TERAPIA DEL CALDO ☹️

Destinazione d'uso

Il cuscinetto caldo aiuta ad alleviare temporaneamente i piccoli dolori muscolari e articolari associati a sforzi eccessivi, strappi, distorsioni e artriti.

Modalità di utilizzo

Acqua calda Mettere il cuscinetto in un contenitore con acqua calda a un massimo di 80 °C per circa 8 minuti. Il contenitore dell'acqua deve essere sempre lontano da fonti di calore.

Microonde

Mettere il cuscinetto in un contenitore per microonde e coprirlo completamente con acqua. Impostare il microonde ad un massimo di 600 W e riscaldare il cuscinetto per massimo 3 minuti.

Controllare attentamente il cuscinetto in gel: se non è abbastanza caldo, lasciarlo nel microonde per altri 30 secondi e così via fino a raggiungere la temperatura desiderata.

Quando si riscalda nel microonde, tenere d'occhio il cuscinetto e, se si gonfia, spegnere il microonde immediatamente. Riporre quindi il cuscinetto nella custodia/asciugamano protettivo, altrimenti si corre il rischio di scottarsi.

ATTENZIONE: non riscaldare mai il cuscinetto nel forno a microonde o in qualsiasi altro modo senza immergerlo in un contenitore con acqua!

TERAPIA DEL FREDDO ☹️

Destinazione d'uso

Il cuscinetto freddo aiuta a gestire il dolore, l'infiammazione e il gonfiore.

Modalità di utilizzo

Conservare il cuscinetto nel congelatore (almeno a -15 °C) per circa 2 ore.

Riporre quindi il cuscinetto nella custodia/asciugamano protettivo, altrimenti si corre il rischio di danni.

La durata massima di utilizzo è di 20 minuti e l'applicazione può essere ripetuta dopo una pausa di 2 ore.

Controindicazioni

Dr. Max Hot & Cold Therapy non deve essere utilizzato da persone insensibili alle temperature estreme, come i soggetti con problemi circolatori, diabete, danni ai nervi, paralisi o pelle sensibile. Per il trattamento di neonati e bambini è necessaria la supervisione di un adulto.

Precauzioni e avvertenze

- Non posizionare mai il cuscinetto direttamente sulla pelle perché la temperatura estrema può causare ustioni; avvertire sempre il cuscinetto in una custodia/asciugamano protettivo prima dell'uso.
- Se il cuscinetto si danneggia e il contenuto entra in contatto con la pelle o gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua e consultare un medico. In caso di ingestione, bere molta acqua e consultare immediatamente un medico.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini. Solo per uso esterno. Smettere se forato o con perdite.
- In caso di incidente grave, segnalarlo al Fabbricante e alle autorità competenti.
- Non sedersi sul cuscinetto e non esercitare una pressione eccessiva sul cuscinetto per evitare che possa scoppiare.
- Non utilizzare mai il cuscinetto mentre si dorme.
- Non applicare il cuscinetto sulla pelle danneggiata o sensibile.
- Se l'applicazione del cuscinetto risulta fastidiosa, rimuoverlo immediatamente dal corpo.
- Non riscaldare il cuscinetto piegato.
- Estrarre il cuscinetto caldo dall'acqua con cautela. Se è troppo caldo, attendere che si raffreddi prima di applicarlo sul corpo.
- Non riscaldare il cuscinetto nel forno o sul fuoco. Se il cuscinetto viene riscaldato troppo a lungo o a una temperatura troppo elevata, può scoppiare.

Come prendersi cura di Dr. Max Hot & Cold Therapy

È possibile lavare il cuscinetto a mano con un detersivo delicato. Non utilizzare alcool o altri solventi.

Model

KK-CH-350g
Materiale: PE e nylon.
Data di scadenza

4 anni.

Condizioni di conservazione e trasporto

Il prodotto può essere conservato e trasportato a temperature comprese tra -15 °C e 40 °C in ambiente asciutto e ventilato.

Data dell'ultima revisione 2020. 12. 21

Versione: A/0

File n.: KK-CE-2.1

PL Dr. Max Hot & Cold Therapy to żelowy kompres rozgrzewający/chłodzący, przeznaczony do wielokrotnego stosowania. Opakowanie zawiera również materiałowy pokrowiec z elastycznym paskiem, służącym do optymalnego umieszczenia kompresu na ciele. Żel jest bezpieczny i nietoksyczny.

Wskazania

Ten wyrób medyczny może być stosowany w przypadku bólu, kontusji, naderwygnięcia i bolesności mięśni, siniaków, obrzęków i stanów zapalnych.

Skład

Glicerol, sól sodowa karboxymetylocelulozy, chlorek sodu, środek dezynfekujący i woda.

TERAPIA CIEPŁEM ☹️

Przewidziane zastosowanie

Kompres rozgrzewający pomaga tymczasowo złagodzić niewielkie bóle mięśni i stawów związane z nadmiernym wysiłkiem, naderwygnięciami, skręceniami i zapaleniem stawów.

Sposób używania

Gorąca woda

Kompres należy zanurzyć w naczyniu z wodą o temperaturze 80 °C na mniej więcej 8 minut. Naczynie z wodą należy uprzednio zdjąć ze źródła ciepła.

Kuchenna mikrofalowa

Kompres należy umieścić w pojemniku nadającym się do mikrofalówki i przykryć go kalkówką wodą. Kuchenkę mikrofalową należy ustawić maksymalnie na moc 600 W i podgrzewać kompres przez maks. 3 minuty. Kompres żelowy należy ostrożnie sprawdzić, jeśli nie jest wystarczająco gorący, należy go podgrzewać w mikrofalówce w 30-sekundowych odstępach, aż do osiągnięcia pożądanej temperatury. Podczas podgrzewania w kuchence mikrofalowej należy obserwować kompres, a jeśli kompres się napompuje, należy natychmiast wyłączyć kuchenkę mikrofalową. Następnie kompres należy umieścić w pokrowcu/ręczniku ochronnym, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko poparzenia.

UWAGA: Kompresu nie można podgrzewać bezpośrednio w kuchence mikrofalowej, ani też inną metodą, bez zastosowania kapteli wodnej!

TERAPIA ZIMNEM ☹️

Przewidziane zastosowanie

Kompres chłodzący pomaga w łagodzeniu bólu, zapalenia i obrzęku.

Sposób używania

Kompres należy przechowywać w zamrażarce (min. -15°C) przez około 2 godziny. Następnie należy umieścić kompres w pokrowcu/ręczniku ochronnym, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko jego uszkodzenia.

Maksymalny czas użytkowania wynosi 20 minut, a aplikację można powtórzyć po 2-godzinnej przerwie.

Przeciwwskazania

Dr. Max Hot & Cold Therapy nie powinny być stosowane przez osoby niewrażliwe na skrajne temperatury, takie jak osoby z problemami z krążeniem, cukrzycą, uszkodzeniem nerwów, porażeniem lub wrażliwą skórą. Podczas leczenia niemowląt i dzieci konieczny jest nadzór osoby dorosłej.

Środki ostrożności i ostrzeżenia

- Nigdy nie wolno umieszczać kompresu bezpośrednio na skórze, ponieważ ekstremalna temperatura może spowodować oparzenia, zawsze przed użyciem kompres należy owinać w ochronny pokrowiec/ręcznik.
- W przypadku uszkodzenia kompresu i kontaktu jego zawartości ze skórą lub oczami, należy natychmiast przepłukać je wodą i skonsultować porady lekarza. W przypadku pokłnięcia należy wypić dużą ilość wody i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Tylko do użytku zewnętrznego. Wyrzucić w przypadku przebicia lub wycieku.
- Każdy poważny incydent związany z wyborem należy zgłosić producentowi i właściwemu urzędowi państwa członkowskiego.
- Nie wolno słać na kompresie i wywierać na niego nadmiernego nacisku, aby uniknąć jej pęknięcia.
- Nie należy stosować kompresu podczas snu.
- Nie należy przykładać kompresu na uszkodzoną lub wrażliwą skórę.
- Jeśli kompres spowoduje uczucie dyskomfortu, należy natychmiast go usunąć.
- Nie należy podgrzewać kompresu jeżeli jest zgjęty.
- Zachować ostrożność podczas wyjmowania gorącego kompresu z wody. Jeśli jest zbyt gorący, należy odczekać aż ostygnie i dopiero wtedy przyłożyć go do ciała.
- Nie należy podgrzewać kompresu w piekarniku lub na ogniu. Kompres podgrzewany zbyt długo lub do zbyt wysokiej temperatury może ulec uszkodzeniu.
- Jak dbać o wyrób Dr. Max Hot & Cold Therapy** Kompres można myć ręcznie używając łagodnego środka myjącego. Nie stosować alkoholu ani innych rozpuszczalników.
- Model** KK-CH-350g
- Materiały:** polietylen (PE) i nylon.
- Termin ważności** 4 lata.
- Transport i warunki przechowywania** Produkt może być przechowywany i transportowany w temperaturze od -15°C do 40°C w suchym i wentylowanym środowisku.
- Data ostatniej aktualizacji: 2020. 12. 21
- Nr wersji: A/0
- Nr dok.: KK-CE-2.1

RO Dr. Max Hot & Cold Therapy este o compresă cu gel pentru încălzire și răcire pentru utilizare repetată. Pachetul include o husă textilă și o bandă elastică pentru fixare. Gelul este sigur și nu este toxic.

Indicații

Acest dispozitiv medical poate fi utilizat pentru dureri, entorse, întinderi și dureri musculare, vânătăi, umflături și inflamații.

Compoziție

Glicerol, carboximetilceluloză de sodiu, clorură de sodiu, dezinfectant și apă.

TERAPIE CALDĂ ☹️

Scopul produs

Compresa caldă ajută la ameliorarea temporară a durerilor musculare și articulare minore și a durerilor asociate cu suprasolicitare, întinderile, entorsele și artrita.

Mod de utilizare

Apă fierbinte

Introduceți compresa într-un recipient cu apă fierbinte la maximum 80 °C, timp de aproximativ 8 minute.Recipientul cu apă trebuie îndepărtat de sursa de căldură în permanență.

Cuptor cu microunde

Puneți compresa într-un recipient pentru microunde și acoperiți-l complet cu apă. Setati cuptorul cu microunde la maximum 600 W și încălziți compresa timp de max. 3 minute. Verificați cu atenție compresa cu gel; dacă nu este suficient de fierbinte, încălziți-o la cuptorul cu microunde la intervale de 30 de secunde până când se atinge temperatura dorită.

Atunci când încălziți într-un cuptor cu microunde, supravegheați compresa și, dacă compresa se umflă, opriți imediat cuptorul cu microunde. Apoi puneți compresa în husa de protecție/prosop, deoarece altfel există riscul de ardere.

ATENȚIE! Nu încălziți niciodată compresa direct în cuptorul cu microunde sau utilizați orice altă metodă, fără să o scufundați într-un vas cu apă!

TERAPIE RECE ☹️

Scopul produs

Compresa rece ajută la gestionarea durerii, inflamației și umflăturilor.

Mod de utilizare

Păstrați compresa în congelator (min. -15 °C) timp de aproximativ 2 ore. Apoi, puneți compresa în husa de protecție/prosop, deoarece rece există riscul de deteriorare.

Durata maximă de utilizare este de 20 de minute, iar aplicarea poate fi repetată după o pauză de 2 ore.

Contraindicații

Dr. Max Hot & Cold Therapy nu trebuie utilizată de persoanele insensibile la temperaturi extreme, cum ar fi cei cu probleme circulatorii, diabet, leziuni nervoase, paralizie sau piele sensibilă. Este necesară supravegherea unui adult atunci când se utilizează la sugari și copii.

Precauții și atenționări

- Nu așezați niciodată compresa direct pe piele, deoarece temperatura extremă poate provoca arsuri; înfășurați întotdeauna compresa într-o husă de protecție/un prosop înainte de utilizare.
- În cazul în care compresa se deteriorează și conținutul intră în contact cu pielea sau cu ochii, clătiți imediat cu apă și solicitați sfatul medicului.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Numai pentru uz extern.
- A se arunca dacă este perforat sau curge.
- În cazul unui incident grav, raportați producătorului și autorităților competente.
- Pentru a evita posibila spargere nu vă așezați pe compresă și nu aplicați presiune excesivă pe compresă.
- Nu utilizați niciodată compresa în timpul somnului.
- Nu aplicați compresa pe pielea deteriorată sau sensibilă.
- Dacă aplicarea compresiei este incomodă, îndepărtați-o imediat de corp.
- Nu încălziți compresa pliată.
- Scoteați compresa cu atenție din apa fierbinte. Dacă este prea fierbinte, așteptați să se răcească înainte de a o aplica pe corp.
- Nu încălziți compresa în cuptor sau la foc. Dacă compresa este încălziată prea mult sau la o temperatură prea ridicată, se poate sparge.
- Cum să îngrijiiți Dr. Max Hot & Cold Therapy** Puneți spăla compresa manual cu un detergent ușor. Nu folosiți alcool sau alți solvenți.
- Model** KK-CH-350g
- Materiale:** polietilenă (PE) și nailon.
- Data limită de utilizare** 4 ani.
- Transport și condiții de depozitare** Produsul poate fi păstrat și transportat la temperaturi cuprinse între -15 °C și 40 °C, într-un mediu uscat și ventilat.
- Data ultimei revizuirii: 2020. 12. 21
- Versione: A/0
- Fișier nr.: KK-CE-2.1

RS Dr. Max Hot & Cold Therapy je gel jastučić za grejanje i hlađenje za višekratnu upotrebu. Pakovanje takođe sadrži platnenu navlaku sa elastičnom trakom za pričvršćivanje. Gel je bezbedan i netoksičan.

Indikacije

Ovo medicinsko sredstvo se može koristiti kod bola, uganuća, istegnuća i bolova mišića, modrica, otoka i upale.

Sastav

Glicerol, natrijum-karboksimetilceluloza, natrijum-hlorid, dezinficijens i voda.

TOPLA TERAPIJA ☹️

Previdjena namena

Topli jastučić pomaže u privremenom olakšavanju manjih bolova u mišićima i zglobovima koji su povezani sa preteranim vezbanjem, istegnućima, uganućima i artritism.

Način primene

Topla voda

Stavite jastučić u posudu sa toplom vodom čija je temperatura maksimalno 80 °C na oko 8 minuta. Posuda sa vodom se vreme mora da bude sklonjena sa izvora toplote.

Mikrotalasna pećnica

Stavite jastučić u posudu pogodnu za mikrotalasnu pećnicu i potpuno je uronite u vodu. Podestite mikrotalasnu pećnicu na maksimalnu snagu do 600 W i zagrejte jastučić najviše 3 minuta. Pazljivo proverite zagrejanost gel jastučića, ako se dovoljno topao, zagrevaite u mikrotalasnoj pećnici u intervalima od 30 sekundi dok se ne postigne željena temperatura. Kada zagrevaite u mikrotalasnoj pećnici, posmatrajte jastučić i ako se jastučić naduva, odmah isključite mikrotalasnu pećnicu. Zatim stavite jastučić u zaštitnu navlaku/peškir, jer u suprotnom postoji rizik od opекotina.

Dr.Max⁺ Dr.Max DBC, Florentinum (D), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha1		COLORS		SPECIALS	
PRODUCT NAME:	Hot & Cold Therapy		BLACK		
BAR CODE:	8595566425999				
DIMENSION (rozměr):	285 x 210 mm				
DATE:	11. 10. 2024				
ARTWORK SUPPLIER: GRADESI s.r.o., Michaela Karlova, karlova@gradesi.cz					