

THERMOMAX MERCURY FREE TEPLOMĚR LÉKAŘSKÝ SKLENĚNÝ

CZ Návod k použití



ČÁSTI TEPLOMĚRU (pouze orientační)

Baňka teploměru (čidlo)	Skleněná kapilára	Teplotní stupnice	Vnější plášť
-------------------------	-------------------	-------------------	--------------

NÁVOD K POUŽITÍ:

- Teploměr je určen pouze k měření tělesné teploty.
- Teploměr před měřením sklepejte alespoň pod 36 °C.
- Teploměr sklepejte tak, že jej zasuněte do víčka pouzdra (barevná část), poté vložte do spodní (průhledné) části pouzdra a zašroubujte. Uchopte za úchytku na víčku pouzdra a intenzivním kmitáním teploměr v pouzdře sklepejte.
- Před měřením zkontrolujte, zda se kontrolní ryska na boku skleněné trubice kryje s dílkem 38 °C na stupnici.
- Zkontrolujte, zda není přerušeny sloupec měřící kapaliny v kapiláře.
- Před každým měřením teploměr umyjte vlažnou vodou nebo dezinfikujte běžnými dezinfekčními prostředky (teploměr nezaškrábejte).
- Teploměr nevystavujte teplotám okolí nad 40 °C.
- Teploměr není odolný proti nárazu, ohybu či úderu.
- Při rozbití sesbírejte opatrně náplň do uzavíratelné nádoby a nádobku umístěte do zvláštního odpadu. K posbírání doporučujeme použít ochranné rukavice, náplň může zanechávat tmavé skvrny, následně si řádně umyjte ruce.
- Teploměr ukládejte mimo dosah dětí.
- Teploměr vždy uchovávejte v plastovém pouzdře.

způsoby měření:

1. Axilárně (v podpaží) – podpaží otřete suchým ručníkem, teploměr vložte do podpaží. Obvyklá délka měření je 5–10 min.
2. Orálně (v dutině ústní) – vložte teploměr vlevo nebo vpravo od kořene jazyka a zavřete ústa. Teploměr nekousejte!!! Obvyklá délka měření je cca 3 min. Orální teplota je průměrně o 0,3 °C vyšší než teplota v podpaží.
3. Rektálně (v konečníku) – na teploměr naneste lubrikační gel, zasuněte 1–2 cm do konečníku, zjistěte-li odpor, zastavte. Během měření držte teploměr na místě. Obvyklá délka měření je cca 2 min. Rektální teplota je průměrně o 0,5 °C vyšší než teplota v podpaží.

Měření tělesné teploty provádějte vždy na stejném místě vašeho těla a ve stejném denním čase. Před zahájením měření (cca 30 min.) se vyvarujte pití tekutin, cvičení, sprchování, koupání či kouření.

Distributor:
Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15,
Nové Město, 110 00 Praha 1,
Česká republika

Dr.Max⁺

THERMOMAX MERCURY FREE TEPLOMER LEKÁRSKY SKLENENÝ

SK Návod na použitie



ČASTI TEPLOMERA (iba orientačné)

Banka teplomera (snímač)	Sklenená kapilára	Teplotná stupnica	Vonkajší plášť
--------------------------	-------------------	-------------------	----------------

NÁVOD NA POUŽITIE:

- Teplomér je určený iba na meranie telesnej teploty.
- Teplomér pred meraním sklepte aspoň pod 36 °C.
- Teplomér sklepete tak, že ho zasuniete do viečka puzdra (farebná časť), potom vložte do spodnej (priehľadnej) časti puzdra a zaskrutkujete. Uchopíte za úchytku na viečku puzdra a intenzívnym kmitaním teplomer v puzdre sklepete.
- Pred meraním skontrolujte, či sa kontrolná ryska na boku sklenenej trubice kryje s dielikom 38 °C na stupnici.
- Skontrolujte, či nie je prerušený stĺpec meracej kvapaliny v kapiláre.
- Pred každým meraním teplomer umyte vlažnou vodou alebo dezinfikujte bežnými dezinfekčnými prostriedkami (teplomér nezaškráievajte).
- Teplomér nevystavujte teplotám okolia nad 40 °C.
- Teplomér nie je odolný proti nárazu, ohybu či úderu.
- Pri rozbití zozbierajte opatrne náplň do uzatvárateľnej nádoby a nádobku umiestnite do špeciálneho odpadu. Na pozbieranie odporúčame použiť ochranné rukavice, náplň môže zanechávať tmavé škvrny. Následne si dôkladne umyte ruky.
- Teplomér ukladajte mimo dosahu detí.
- Teplomér vždy uchovávajte v plastovom puzdre.

SPÔSOBY MERANIA:

1. Axilárne (v podpažuší) – podpažušie vytrite suchým uterákom, teplomer vložte do podpažušia. Obvyklá dĺžka merania 5–10 min.
2. Orálne (v dutine ústnej) – vložte teplomer vľavo alebo vpravo od koreňa jazyka a zavrite ústa. Teplomér nehryzte!!! Obvyklá dĺžka merania je cca 3 min. Orálna teplota je priemerne o 0,3 °C vyššia než teplota v podpažuši.
3. Rektálne (v konečníku) – na teplomer naneste lubrikačný gél, zasuněte 1 – 2 cm do konečníka, ak zistíte odpor, zastavte. Počas merania držte teplomer na mieste. Obvyklá dĺžka merania je cca 2 min. Rektálna teplota je priemerne o 0,5 °C vyššia než teplota v podpažuši.

Meranie telesnej teploty vykonávajte vždy na rovnakom mieste vášho tela a v rovnakom dennom čase. Pred začatím merania (cca 30 min.) sa vyvarujte pitia tekutín, cvičenia, sprchovania, kúpania či fajčenia.

Distribútor:
Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15,
Nové Město, 110 00 Praha 1,
Česká republika

Dr.Max⁺

THERMOMAX MERCURY FREE TERMOMETRO MEDICO IN VETRO

IT Istruzioni per l'uso



PARTI DEL TERMOMETRO (solo a scopo indicativo)

Bulbo del Termometro (sensore)	Capillare di vetro	Scala di temperatura	Guscio esterno
--------------------------------	--------------------	----------------------	----------------

ISTRUZIONI PER L'USO:

- Il termometro è solo per uso umano
- Prima dell'uso, agitare il termometro sotto la linea della scala a 36 °C
- Scuotere il termometro: Il termometro si inserisce nel tappo (la parte colorata), quindi si inserisce nella parte inferiore (trasparente) e si avvita. Afferra la maniglia sul coperchio del cappuccio e con diverse oscillazioni intense il termometro verrà scrollato di dosso (vedi foto)
- Prima di misurare, assicurarsi che la linea di controllo sul lato del tubo di vetro coincida con la temperatura di 38 °C sulla scala.
- Si prega di verificare se la colonna di liquido non è interrotta al punto di capillare prismatico.
- Prima di ogni misurazione, il termometro deve essere pulito con acqua fredda o disinfettato come di consueto con una soluzione disinfettante (non scaldare il termometro).
- Non esporre il termometro a temperature superiori ai 40 °C.
- Il termometro non è resistente agli urti o alla flessione.
- Quando il termometro clinico è rotto, raccogliere accuratamente riempiendo un contenitore sigillabile e riportarlo in un rifiuto speciale. I materiali raccolti consigliano l'uso di guanti, il ripieno potrebbe lasciare macchie scure, quindi lavarsi le mani correttamente.
- Tenere il termometro fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare sempre il termometro in una custodia di plastica.

METODI DI MISURAZIONE:

1. Ascellare (ascella) – Pulire l'ascella con un asciugamano asciutto, inserire il termometro nell'ascella. Il tempo di misurazione usuale è di 5-10 min.
2. Orale (in bocca): inserire un termometro a sinistra o a destra della base della lingua e chiudere la bocca. Termometro da non mordere!!! Il tempo di misurazione abituale è di circa 3 minuti. La temperatura orale è in media di 0,3 °C superiore alla temperatura sotto l'ascella.
3. Rettale (nel retto) – applica sul gel lubrificante del termometro, inserito per 1-2 cm nel retto, se trovi resistenza, fermati! Durante la misurazione, tenere il termometro in posizione. Il tempo di misurazione abituale è di circa 2 minuti. La temperatura rettale è in media di 0,5 °C superiore alla temperatura sotto l'ascella.

Distributore:
Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15,
Nové Město, 110 00 Praha 1,
Repubblica Ceca

La misurazione della temperatura corporea viene eseguita sempre nello stesso punto del corpo e alla stessa ora del giorno. Prima di iniziare la misurazione (circa 30 min.) evitare di bere liquidi, fare esercizio, fare la doccia, fare il bagno o fumare.


SPECIFICHE TECNICHE:

Campo di misura minimo: 35,0 °C – 42,0 °C
Risoluzione: 0,1 °C
Precisione: +0,1 °C/- 0,15 °C
Liquido di misura: Ga, In, Sn


Ogni termometro è etichettato con il marchio di conformità CE 1023.
Standard: ČSN EN 12470-1:2000+A1:2010, Termometri liquidi metallici - in - vetro con dispositivo di massimo.
Direzione correlata: 93/42/CEE.
Tutti i termometri sono verificati al 100% dai nostri dispositivi di misurazione di laboratorio.

Data dell'ultima revisione: **30. 06. 2022**

Exatherm, s.r.o.,
Bořivojova 878/35,
130 00 Praha 3,
Česká republika

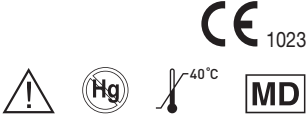

Exatherm, s.r.o.,
Bořivojova 878/35,
130 00 Praha 3,
Česká republika

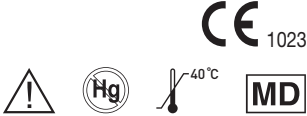

Exatherm, s.r.o.,
Bořivojova 878/35,
130 00 Praha 3,
Repubblica Ceca

