


CZ Digitální klinický teploměr

Dr.Max⁺

Návod k použití. Před použitím si tyto pokyny a tato upozornění pečlivě přečtěte a návod si uschovejte k pozdějšímu nahlédnutí.

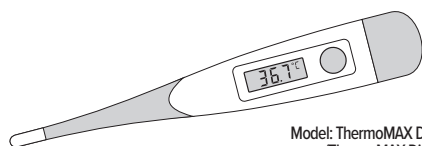

Model: ThermoMAX Digital Flexi
(ThermoMAX Digital Baby)

Výhody

Pružná špička: Čidlo je pružné, jeho používání je mnohem bezpečnější a pohodlnější.

Upozornění

- Před prvním použitím a po každém následném použití teploměr očistěte vlhkým hadříkem namočeným 70% alkoholem. K čištění displeje teploměru použijte měkký mokvý hadřík. Nikdy neponořujte teploměr do vody nebo jiné kapaliny. K čištění teploměru nepoužívejte jiné nedoporučené metody.
- Teploměr není hračka; uložte jej na bezpečném místě mimo dosah dětí.
- Při měření teploty nikdy nenechávejte dítě samotné. V případě pochybností nebo při zvýšení teploty se poraďte s lékařem. Teploměr dokáže rychle zjistit teplotu těla v rozsahu od 32 °C / 90 °F do 42 °C / 109,9 °F (tolerance ±0,1 °C / 0,2 °F).
- Teploměr musí být uchováván při pokojové teplotě, v suchu a nesmí být vystaven působení tepelných zdrojů nebo přímému slunečnímu záření (maximální povolené skladovací teplotní rozmezí je od -25 °C do +55 °C).
- Silná elektromagnetická pole by mohla zabránit správnému fungování teploměru.

Jak teploměr používat

- Nejprve teploměr zapněte stisknutím tlačítka pro ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ.
- Na obrazovce se objeví všechny ikony po dobu 2 sekund.
- Na obrazovce se poté po dobu 2 sekund objeví poslední naměřená hodnota.
- Na obrazovce se poté objeví „37 °C / 98,6 °F“ a „°C“ začne blikat.
- Umístěte špičku teploměru na místo, kde chcete teplotu měřit.
- Čekajte na dokončení měření, které bude signalizováno zvukem „píp...píp“ a tím, že symbol „°C“ přestane blikat.
- Poplašný signál při horečce; pokud je naměřená hodnota ≥ 37,8 °C / 100 °F, bude se po dobu 10 sekund ozývat poplašný bzučící signál „píp...píp...píp...píp...píp...píp“.
- Přečtěte si zobrazenou naměřenou hodnotu.

Rektální měření

- Zasuňte špičku čidla do konečniku několik mm hluboko. Pokud při zasouvání čidla ucítíte nějaký odpor, ihned přestaňte.
- Pro změření rektální teploty novorozence položte dítě na záda na tvrdý povrch a zvedněte jeho nohy do úhlu přibližně 90 stupňů. Držte je za kotníky, aby se jeho tělo při měření teploty neobracelo. Pamatujte na to, že vnitřní teplota těla je vždy mírně vyšší než vnější teplota (přibližně o 0,5 °C / 0,9 °F).
- Držte teploměr na místě přibližně 10 sekund. Slyšitelný zvuk oznámí, že bylo měření dokončeno.
- Po vyjmutí teploměru jej vypněte stisknutím tlačítka pro ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (pokud teploměr zapomenete vypnout, vypne se automaticky po přibližně 8 až 9 minutách).

Měření v ústech


Umístěte špičku čidla do dolní části úst pod jazyk a zavřete ústa. Držte teploměr v této poloze přibližně 20 sekund. Pamatujte na to, že teplota v ústech je mírně vyšší než vnější teplota (přibližně o 0,3 °C / 0,6 °F).

Měření v podpaží

Umístěte čidlo hluboko do podpažní jamky rovnoběžně s paží a přitiskněte paži k tělu. Držte teploměr v této poloze přibližně 30 sekund.

Vložení a/nebo výměna baterie

Teploměr vyžaduje jednu baterii typu AG3 (LR-41 nebo L736), jejíž minimální životnost je 1000 změřen. Když se na displeji objeví symbol „▼“, znamená to, že stav baterie je nízký. Při výměně baterie sejměte kryt, vyjměte vybitou baterii a vložte novou baterii (v případě teploměru s postavičkou, prosím, vyjměte šroub před sejmutím krytu). Vybité baterie musí být odevzdaný na příslušných vyhrazených místech pro sběr baterií. Baterie jsou toxické. Pokud dojde ke spojení baterie, měla by být ihned vyhledána lékařská pomoc.

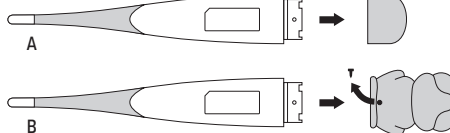

Technické specifikace


1. Model	ThermoMAX Digital Flexi (ThermoMAX Digital Baby)
2. Režim měření	zaznamenaná nejvyšší teplota
3. Měřicí rozsah	32,0–42,9 °C (90–109,2 °F)
4. Přesnost	0,1 °C (0,1 °F)
5. Displej	displej z tekutých krystalů (LCD) s rozlišením 0,1 °C (0,1 °F)
6. Provozní podmínky	10–35 °C / ≤80% relativní vlhkost (50–95 °F / ≤80% relativní vlhkost)
7. Podmínky pro skladování	–25–55 °C / ≤95% relativní vlhkost (–13–131 °F / 95% relativní vlhkost)
8. Napájení	jedna kulatá baterie 1,5 V
9. Životnost baterie	1 000 měření
10. Ukazatel stavu baterie	zobrazuje se ikona nízkého stavu baterie
11. Doba měření	přibližně 10 s (v nádobě s vodou)
12. Paměť pro naměřené hodnoty	zobrazuje se poslední naměřená hodnota
13. Poplašný signál při horečce	varovný zvukový signál při horečce vyšší než 37,8 °C (100 °F)
14. Automatické vypnutí	po posledním použití se teploměr po přibližně 8 až 9 minutách automaticky vypne
15. Norma	EN 12470-3 a ASTM E1112

Datum poslední revize textu: 04/20

SK Digitálny klinický teplomer

Dr.Max⁺

Návod na použitie. Pred použitím si tieto pokyny a upozornenia pozorne prečítajte a návod si uschovajte na neskoršie nahliadnutie.

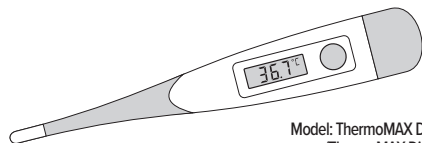

Model: ThermoMAX Digital Flexi
(ThermoMAX Digital Baby)

Výhody

Pružná špička: Snímač je pružný, jeho používání je omnoho bezpečnější a pohodlnější.

Upozornenie

- Pred prvým použitím a po každom následnom použití teplomer očistite vlhkou handričkou namočenou 70% alkoholom. Na čistenie displeja teplomeru použite mäkkú mokvú handričku. Nikdy neponárajte teplomer do vody alebo inej kvapaliny. Na čistenie teplomeru nepoužívajte iné nedoporučené metódy.
- Teplomer nie je hračka; uložte ho na bezpečnom mieste mimo dosahu detí.
- Pri meraní teploty nikdy nenechávajte dieťa samotné. V prípade pochybností alebo zvýšenia teploty sa poraďte s lekárom. Teplomer dokáže rýchlo zistiť teplotu tela v rozsahu od 32 °C/90 °F do 42 °C/109,9 °F (tolerancia ±0,1 °C/0,2 °F).
- Teplomer sa musí uschovávať pri izbovej teplote, v suchu a nesmie byť vystavený pôsobeniu tepelných zdrojov alebo priamemu slnečnému žiareniu (maximálne povolené skladovacie teplotné rozmedzie je od -25 °C do +55 °C).
- Silné elektromagnetické polia by mohli zabrániť správne fungovaniu teplomera.

Ako teplomer používať

- Najprv teplomer zapnite stlačením tlačidla na ZAPNUTIE/VYPNUTIE.
- Na obrazovke sa objavia všetky ikony v trvaní 2 sekúnd.
- Na obrazovke sa potom na 2 sekundy objaví posledná nameraná hodnota.
- Na obrazovke sa potom objaví „37 °C/98,6 °F“ a „°C“ začne blikat.
- Umistite špičku teplomera na miesto, kde chcete teplotu merať.
- Čakajte na dokončenie merania, ktoré bude signalizovať zvuk „píp...píp“ a tým, že „°C“ prestane blikat.
- Poplašný signál pri horúčke; ak je nameraná hodnota ≥ 37,8 °C/100 °F, bude sa v trvaní 10 sekúnd ozývať poplašný bzučiaci signál „píp...píp...píp...píp...píp...píp“.
- Přečítajte si zobrazenú nameranú hodnotu.

Rektálne meranie

- Zasuňte špičku snímača do konečníka niekoľko mm hlboko. Ak pri zasúvaní snímača zacítite nejaký odpor, ihneď prestaňte.
- Pre zmeranie rektálnej teploty novorodenca položte dieťa na chrbát na tvrdý povrch a zdvihnite jeho nohy do uhla približne 90 stupňov. Držte ho za členky, aby sa jeho telo pri meraní teploty neobracalo. Pamätajte na to, že vnútorná teplota tela je vždy mierne vyššia ako vonkajšia teplota (približne o 0,5 °C/0,9 °F).
- Držte teplomer na mieste približne 10 sekúnd. Počuteľný zvuk oznámí, že meranie sa skončilo.
- Po vybratí teplomera ho vypnite stlačením tlačidla pre ZAPNUTIE/VYPNUTIE (ak teplomer zabudnete vypnúť, vypne sa automaticky po približne 8 až 9 minútach).

Meranie v ústach


Umistite špičku snímača do dolnej časti úst, pod jazyk, a zavrite ústa. Držte teplomer v tejto polohe približne 20 sekúnd. Pamätajte na to, že teplota v ústach je mierne vyššia než vonkajšia teplota (približne o 0,3 °C/0,6 °F).

Meranie v podpaží

Umistite snímač hlboko do podpažnej jamky rovnobežne s rukou a prilaďte ruku k telu. Držte teplomer v tejto polohe približne 30 sekúnd.

Vloženie a/nebo výměna batérie

Teplomer si vyžaduje jednu batériu typu AG3 (LR-41 alebo L736), ktorej minimálna životnosť je 1 000 zmeraní. Keď sa na displeji objaví symbol „▼“, znamená to, že stav batérie je nízký. Pri výmene batérie zložte kryt, vyberte vybitú batériu a vložte novú batériu (v prípade teplomera s postavičkou vyberte, skrutku pred zložením krytu). Vybité batérie sa musia odovzdať na príslušných vyhradených miestach na zber batérií. Batérie sú toxické. Ak dôjde k prehltnutiu batérie, mala by sa ihneď vyhľadať lekárska pomoc.

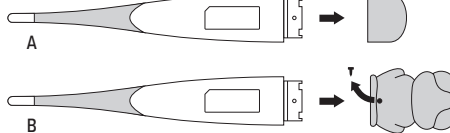

Technické špecifikácie

1. Model	ThermoMAX Digital Flexi (ThermoMAX Digital Baby)
2. Režim merania	zaznamenaná najvyššia teplota
3. Rozsah merania	32,0 – 42,9 °C (90 – 109,2 °F)
4. Presnosť	0,1 °C (0,2 °F)
5. Displej	displej z tekutých kryštálov (LCD) s rozlíšením 0,1 °C (0,1 °F)
6. Prevádzkové podmienky	10 – 35 °C / ≤ 80 % relatívna vlhkosť (50 – 95 °F / ≤ 80 % relatívna vlhkosť)
7. Podmienky pre skladovanie	–25 – 55 °C / ≤ 95 % relatívna vlhkosť (–13 – 131 °F / 95 % relatívna vlhkosť)
8. Napájanie	jedna okrúhla batéria 1,5 V
9. Životnosť batérie	1 000 meraní
10. Ukazovateľ stavu batérie	zobrazuje sa ikona nízkého stavu batérie
11. Čas merania	približne 10 s (v nádobe s vodou)
12. Pamäť na namerané hodnoty	zobrazuje sa posledná nameraná hodnota
13. Poplašný signál pri horúčke	varovný zvukový signál pri horúčke vyššej než 37,8 °C (100 °F)
14. Automatické vypnutie	po poslednom použití sa teplomer po približne 8 až 9 minútach automaticky vypne
15. Norma	EN 12470-3 a ASTM E1112

Datum poslednej revízie textu: 04/20



Výrobce/Výrobca: Famidoc Technology Co., Ltd.,
No.212 Yilong Road, Hexi Industrial Zone, Jinxia,
Changan Town, Dongguan, Guangdong Province, China



Shanghai International Holding Corp.
GmbH(Europe), Eiffelstrasse 80,
20537 Hamburg Germany

Dovozce/Dovozca:

Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika

Distributor/Distribútor:

Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika



CE 1639