


Dr. Max ViziMax Očné kvapky sú sterilný, lubrikačný, hydratačný, ochranný, filmotvorný, biokompatibilný očný roztok s obsahom lipozómov a so zosieťovanou kyselinou hyalurónovou bez konzervačných látok. Na citlivé, suché, dehydratované a unavené oči. Presné dávkovanie. Vhodné na použitie aj s nasadenými kontaktnými šošovkami, kompatibilné so všetkými kontaktnými šošovkami.

Neprítomnosť konzervačných látok znižuje riziko nežiaducich účinkov a vďaka tomu je prípravok vhodný aj na použitie pri liečbe, ktorá si vyžaduje častú a dlhodobú aplikáciu, ako napríklad na nočnú ochranu rohovky.

Indikácie:

- Lubrikujú, hydratujú a chránia suché, dehydratované a unavené oči;
- indikované na liečbu syndrómu suchého oka;
- integrujú a stabilizujú slzný film;
- indikované na liečbu suchosti očí akéhokoľvek stupňa spôsobenej syndrómom suchého oka (nedostatočná tvorba slzného filmu) alebo zníženým/zmeneným slzením (nadmerné odparovanie slzného filmu alebo jeho nedostatok ako v prípade dysfunkcie Meibomových žliaz (MGD) alebo v dôsledku ich dočasnej poruchy spôsobenej hormonálnymi zmenami alebo sekundárnymi účinkami farmakologickej liečby atď.);
- poskytujú úľavu pri svrbení, pálení, pocitu cudzieho telesa a podráždenia očí;
- ideálne v prípade netraumatických/nepatologických zmien slzného filmu;
- ideálne v prípade očnej záťaže spôsobenej vplyvmi okolitého prostredia (nadmerné vystavenie slnečnému žiareniu, vetru, prachu, klimatizácii, suchému a znečistenému vzduchu atď.);
- ideálne v prípade očnej záťaže (dlhodobé používanie počítača, nepriaznivé svetelné podmienky, vedenie vozidla v noci atď.);
- indikované aj na použitie pri nosení kontaktných šošoviek;
- prípravok je kompatibilný s homeopatickou liečbou.

Návod na použitie:

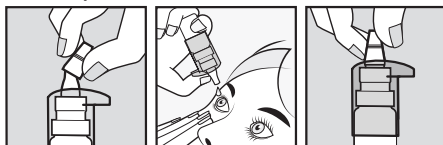

Aplikujte jednu alebo dve kvapky do každého oka raz alebo viackrát denne, podľa potreby alebo odporúčania lekára – špecialistu.

Používatelia kontaktných šošoviek si na šošovky pred alebo po ich použití nakvapajú 2 – 3 kvapky. Po nasadení šošoviek si aplikujte kvapky podľa potreby.

Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Upozornenia:

- V prípade podráždenia očí, prestaňte prípravok používať a obráťte sa na lekára – špecialistu;
- nepoužívajte v prípade alergie alebo precitlivenosti na ktorúkoľvek zložku prípravku;
- uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla, skladujte na suchom mieste pri teplote od 5 do 35 °C;
- uchovávajte mimo dosahu detí;
- neprehŕtajte;
- nepoužívajte prípravok po uplynutí času použiteľnosti;
- spotrebujte do 180 dní od prvého otvorenia;
- nepoužívajte prípravok, ak sa vám zdá, že je flaštička poškodená;
- zabráňte tomu, aby sa špička flaštičky dotkla oka alebo očného viečka;
- po každom použití flaštičku pevne uzatvorte;
- prípravok podávajte najmenej 5 minút pred podaním alebo po podaní iných lokálnych očných prípravkov.

Zloženie:

0,15 % zosieťovaná kyselina hyalurónová, lipozómy, edetát disodný, izotonický tlmivý roztok s pH 7,2.

Neobsahuje:

Konzervačné látky, benzalkóniumchlorid, chlórhexidin, parabény, tiomersál ani zložky živočíšneho pôvodu.

Dr. Max ViziMax Picături oftalmice este o soluție oftalmică fără conservanți, sterilă, lubrifiantă, hidratantă, protectoare, filmogenă, biocompatibilă, care conține lipozomi și acid hialuronic reticulat.

Pentru ochi sensibili, uscați, deshidratați și obosiți. Dozare precisă. Adekvat și în cazul utilizării lentilelor de contact, compatibilă cu toate tipurile de lentile de contact.


Absența conservanților reduce riscul de reacții adverse și face ca produsul să fie adecvat și pentru tratamentele care presupun aplicații frecvente și prelungite, cum ar fi pentru protecția nocturnă a corneei.

Indicații:

- Lubrificază, hidratează și protejează ochii uscați, deshidratați și obosiți;
- adecvat pentru tratarea sindromului de ochi uscat;
- integrează și stabilizează filmul lacrimal;
- adecvat pentru tratamentul oricărui grad de uscăciune oculară, cauzată de sindromul de ochi uscat (producție insuficientă de film lacrimal) sau de lăcrimare redusă/alterată (evaporare excesivă a filmului lacrimal sau deficiență a acestuia, ca în cazul disfuncției glandelor Meibomius (MGD) sau din cauza unei pierderi temporare a funcționalității acestora, din cauza dereglărilor hormonale sau a efectelor secundare ale tratamentelor farmacologice etc.);
- oferă ameliorare în caz de mâncărime, arsură, senzație de corp străin și iritație oculară;
- ideal în cazul modificărilor non-traumatice/non-patologice ale filmului lacrimal;

- ideal în caz de stres ocular cauzat de factorii de mediu (expunere excesivă la soare, vânt, praf, aer condiționat, aer uscat și poluat etc.);
- ideal în caz de stres ocular (utilizare prelungită a computerului, condiții de iluminare nefavorabile, șofat pe timp de noapte etc.);
- de asemenea, indicat pentru utilizare și în timpul purtării lentilelor de contact;
- produs compatibil cu tratamentele homeopate.

Instrucțiuni de utilizare:

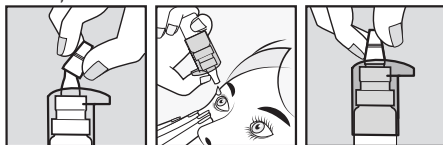

Instilați una sau două picături în fiecare ochi, o dată sau de mai multe ori pe zi, la nevoie sau la recomandarea specialistului. Pentru utilizatorii de lentile de contact, instilați 2-3 picături pe lentile înainte sau după utilizare. Instilați picăturile pe lentile atunci când

le aplicați, dacă este necesar.

Eliminați în conformitate cu legislația locală.

Atenționări:

- În cazul iritării ochilor, întrerupeți utilizarea produsului și adresați-vă specialistului;
- A nu se utiliza în caz de alergie sau hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului;

Distributör/Distribuito:

Dr. Max Pharma s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika/Republica Cehă

Rev: 07/04/2025

- A se pătra departe de sursele de căldură, depozitați într-un loc uscat, la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C;
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor;
- A nu se înghiți;
- A nu se utiliza produsul după data limită de utilizare;
- A se utiliza în termen de 180 de zile de la prima deschidere;

- A nu se utiliza produsul dacă flaconul pare a fi deteriorat;
- A nu se lăsa ca vârful flaconului să vă atingă ochiul sau pleoapa;
- Închideți bine flaconul după fiecare utilizare;
- Administrați produsul cu cel puțin 5 minute înainte sau după administrarea altor produse oftalmice topice.

Compoziție:

Acid hialuronic reticulat 0,15%, lipozomi, edetat disodic, soluție izotonică tamponată pH 7,2.

Nu conține:

Conservanți, clorură de benزالconiu, clorhexidină, parabeni, tiomersal sau componente de origine animală.

ViziMax

RS Kapi za oči
Suve oči
Medicinsko sredstvo


Dr.Max⁺

Dr. Max ViziMax Kapi za oči predstavljaju oftalmički rastvor bez konzervansa, sterilan, sa podmazujućim, hidrirajućim i zaštitnim dejstvom, koji formira film, biokompatibilan je i sadrži liposome i unakrsno vezanu hijaluronsku kiselinu. Za osjetljive, suve, dehidrirane i umorne oči. Precizno doziranje. Pogodne su za upotrebu nakon stavljanja kontaktnih sočiva, kompatibilne sa svim kontaktnim sočivima. Odsustvo konzervansa smanjuje rizik od neželjenih reakcija i čini proizvod takođe pogodnim za terapije koje zahtevaju čestu i produženu primenu, kao što je noćna zaštita rožnjače.

Indikacije:

- Podmazuje, hidrira i štiti suve, dehidrirane i umorne oči;
- indikovano za lečenje sindroma suvog oka;
- integriše i stabilizuje suzni film;
- indikovano za lečenje bilo kog stepena suvoće oka, uzrokovane sindromom suvog oka (nedovoljno stvaranje suznog filma) ili smanjenim/izmenjenim suženjem (prekomerno isparavanje ili nedostatak suznog filma, kao u slučaju disfunkcije Meibomovih žlezda ili usled njegovog privremenog poremećaja, zbog hormonskih promena ili sekundarnih efekata farmakoloških tretmana, itd.);
- pruža olakšanje u slučaju svraba, peckanja, osećaja prisustva stranog tela i iritacije oka;
- idealno u slučaju promena suznog filma koje nisu traumatske/ patološke;
- idealno u slučaju kada su oči izložene ambijentalnom stresu (prekomerna izloženost sunčevoj svetlosti, vetru, prašini, klima uređajima, suvom i zagađenom vazduhu, itd.);
- idealno u slučaju naprezanja očiju (produžena upotreba kompjutera, nepovoljni uslovi osvetljenja, noćna vožnja, itd.);
- indikovano za upotrebu i za vreme nošenja kontaktnih sočiva;
- proizvod kompatibilan sa homeopatskim preparatima.

Uputstvo za upotrebu:

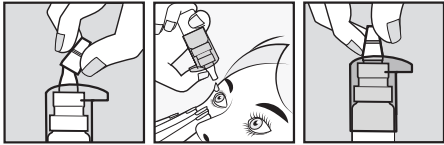

Ukapajte jednu ili dve kapi u svako oko, jednom ili više puta dnevno, po potrebi ili prema savetu Vašeg lekara specijaliste. Za korisnike kontaktnih sočiva, stavite na sočiva 2-3 kapi pre ili posle upotrebe. Ukapati kapi na sočiva nakon stavljanja, po potrebi. Odložite u otpad u skladu sa lokalnim propisima.

Upozorenja:

- U slučaju iritacije oka, prestanite da koristite proizvod i obratite se lekaru specijalisti;
- nemojte koristiti u slučaju alergije ili preosetljivosti na bilo koju komponentu proizvoda;
- čuvati dalje od izvora toplote, na suvom mestu, na temperaturi između 5 °C i 35 °C;
- čuvati van domašaja dece;
- ne gutati;
- ne koristiti nakon isteka roka upotrebe;
- upotrebiti u roku od 180 dana nakon prvog otvaranja;
- ne koristiti proizvod ako bočica izgleda oštećeno;
- pazite da vrh bočice ne dodirne Vaše oko ili kapak;
- posle svake upotrebe bočicu dobro zatvoriti;
- proizvod upotrebite najmanje 5 minuta pre ili nakon primene drugih proizvoda za topikalnu oftalmičku primenu.

Sastav:

0,15 % unakrsno vezane hijaluronske kiseline, lipozomi, dinatrijum-edetat, izotonični rastvor puferovan na pH 7,2.

Ne sadrži:

Konzervanse, benzalkonijum-hlorid, hlorheksidin, parabene, timersal, niti komponente životinjskog porekla.

Distributor:

Dr. Max Pharma s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Republika Čehá

Ovlašćeni predstavnik i distributer: Dr. Max Warehouse d.o.o., Viline Vode bb, 11060 Beograd-Palilula, Srbija

Rev: 07/04/2025

Omisan farmaceutici
via Galilei, Guidonia M. (Rm)
Italia/Italija
www.omisan.com

STERILE A

MD



5°C 35°C

CE 0051

10 ml

VER0825

Dr.Max⁺ Dr.Max DBC, Florentinum (D), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1		COLORS	
PRODUCT NAME:	Vizimax Pro suche a citlive oci		Black
BAR CODE:	8595566427597		
DIMENSION (rozměr):	140 x 288 mm		
DATE:	07. 08. 2025		
ARTWORK SUPPLIER: GRADESI s.r.o., Michaela Karlova, karlova@gradesi.cz			