VITAMMY®
SKY

Multifunkčný infračervený
TEPLOMER



NÁVOD NA POUŽITIE

PRED POUŽITÍM SI POZORNE
PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD

ÚVOD

Vďaka použitiu infračervenej technológie tento teplomer vykonáva okamžité meranie teploty založené na teple produkovanom povrchom čela, zvukovodu alebo inými objektmi. Tento výrobok je vyrobený súlade s ustanoveniami smernice o zdravotníckych pomôckach 93/42 / EHS.

Výhody produktu:

1. 7v1: Teplota na čele
   Teplota v uchu
   Teplota predmetov, kúpeľa, jedál, vzduchu atď.
   Označenie výsledkov s dátumom a časom merania
   Podsvietenie obrazovky
   30 pamätí merania
   Alarm horúčky
2. Veľká obrazovka s podsvietením
3. . Okamžité meranie za 1 s
4. Vysoká presnosť 0,3 ° C
5. Nie je potrebné používať násady
6. Vodotesný snímač
7. Pamäť 30 meraní
8. Alarm s červeným svetlom (≥38 ° C)
9. °C/°F
10. Automatické vypnutie
11. Indikátor spotreby batérie

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRED POUŽITÍM VÝROBKU

Pred použitím si prečítajte nižšie uvedené informácie. Nedodržanie pokynov môže ovplyvniť presnosť merania alebo spôsobiť poškodenie.

1. Nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte teplomer.
2. Po každom použití očistite snímač teplomeru.
3. Nedotýkajte sa šošoviek prstami.
4. Nie je dovolené robiť žiadne zmeny teplomeru.
5. Odporúča sa vykonať 3 merania.

Ak sú výsledky odlišné, najvyšší výsledok treba považovať za správny.


6. Nevystavujte teplomer vysokým teplotám, vysokej vlhkosti a priamemu slnečnému žiareniu.
7. Dávajte si pozor, aby teplomer nebol vystavený nárazom.
8. Najmenej 30 minút pred meraním by pacient a teplomer mali byť pri izbovej teplote.
9. Nerobte merania do 30 minút od skončenia cvičenia, kúpania alebo návratu z vonka.
10. Použité batérie zlikvidujte v súlade s platnými predpismi.
11. Nerozoberajte teplomer.
12. Používajte teplomer len na určený účel
13. Pri meraní opatrne držte teplomer, aby ste ho nepoškodili.
14. Počkajte 1 minútu medzi meraniami.

Ak sa merania vykonávajú príliš rýchlo, môžu sa vyskytnúť rozdiely vo výsledkoch - potom by ste mali zohľadniť priemernú teplotu.


15. Neexistujú žiadne absolútne normy teploty tela. Uschovajte spoľahlivé merania teploty tela, ktoré sa môžu použiť ako údaj pri diagnostikovaní horúčky..
16. Meranie telesnej teploty je len približná hodnota.

Obráťte sa na lekára, ktorý vykoná príslušnú liečbu.

OPIS PRODUKTU

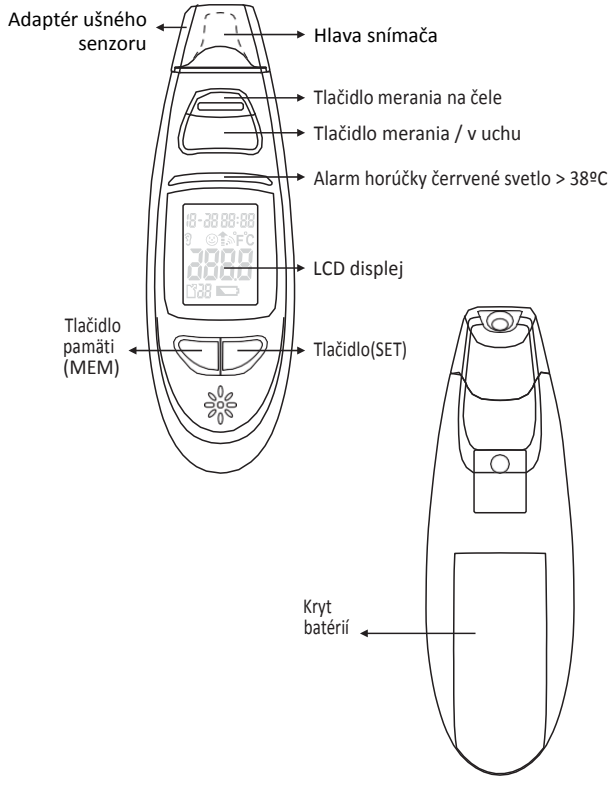

WYŚWIETLACZ LCD

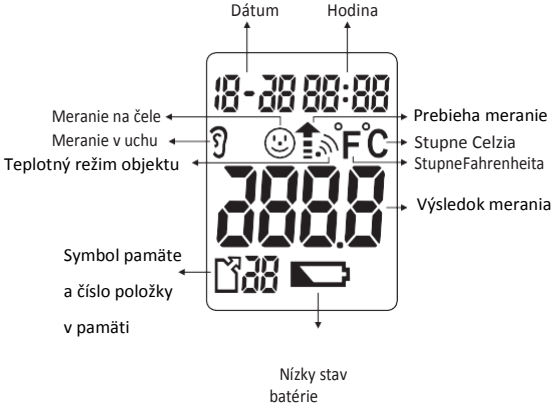

INSTALACJA BATERII


VAROVANIE O SLABEJ BATÉRII::

Ak je batéria vybitá, na obrazovke sa objaví symbol batérie „ ▭ ”.
Keď sa objaví symbol, stále môžete používať teplomer,
ale batérie by mali byť vymenené čo najskôr. Ak sú batérie úplne vybité, na displeji sa zobrazí symbol "Lo" spolu so symbolom vybitej batérie. V takomto prípade vymeňte batérie pred spustením ďalšieho merania



VÝMENA BATERIÍ:




1. Pomocou skrutkovača odskrutkujte skrutku, ktorá zaisťuje kryt priestoru pre batérie.
2. Opatrne zatlačte kryt priestoru pre batérie.
3. Opatrne vyberte použité batérie a zlikvidujte ich v súlade s platnými predpismi.
4. Vložte nové batérie (2 alkalické batérie 1,5 V AAA) podľa polarity.
5. Namontujte kryt priestoru pre batérie a utiahnite zaisťovaciu skrutku

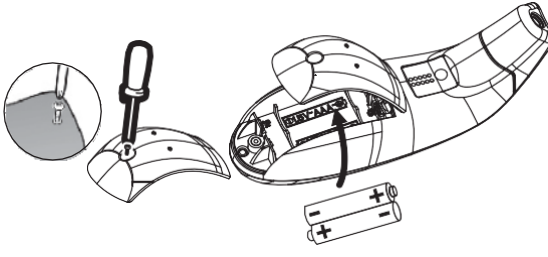

POZOR! PREVÁDZKA BATÉRIÍ:

1. Batérie uchovávajte mimo dosahu detí a od zdroja tepla.
2. Ak sa teplomer dlhší čas nepoužíva, odporúča sa vybrať batérie
3. Batérie zlikvidujte v súlade s platnými predpismi.
4. Batérie nevyhadzujte s bežným odpadom.

USTAWIANIE JEDNOSTKI POMIAROWEJ ˚C i ˚F
DÁTUM A ČAS

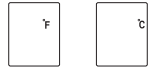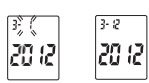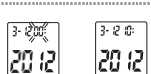Keď je teplomer zapnutý, stlačte a podržte tlačidlo SET na 5 sekúnd, aby ste vstúpili do režimu nastavenia.	LCD Displej
°C/°F ➡ Stlačením tlačidla SET zmeníte jednotku ⇩ Stlačte tlačidlo MEM, uložte a potvrďte nastavenie	
Rok ➡ Stlačte tlačidlo SET na zmenu roka ⇩ Stlačte tlačidlo MEM, uložte a potvrďte nastavenie	
Miesiac ➡ Stlačením tlačidla SET zmeníte mesiac ⇩ Stlačte tlačidlo MEM, uložte a potvrďte nastavenie	
Deň ➡ Stlačte tlačidlo SET na zmenu dňa ⇩ Stlačte tlačidlo MEM, uložte a potvrďte nastavenie	
Hodina ➡ Stlačením tlačidla SET zmeníte hodinu ⇩ Stlačte tlačidlo MEM, uložte a potvrďte nastavenie	
Minúty ➡ Stlačením tlačidla SET zmeníte minúty ⇩ Stlačte tlačidlo MEM, uložte a potvrďte nastavenie	
Ukončenie nastavenia ⇩ Ak chcete dokončiť nastavenie, vypnite prístroj.	

TIPY NA MERANIE TEPLOTY TELA

Pamätajte, že asi 30 minút pred meraním by mal byť teplomer umiestnený v miestnosti, kde sa má vykonať meranie.



• U niektorých ľudí môže meranie v jednom uchu priniesť rôzne výsledky ako v druhom. Ak chcete správne monitorovať teplotu, mali by sa merania vždy vykonávať v tom istom uchu..

• Teplomery môžu používať deti iba pod dohľadom dospelých. U dieťaťa je meranie v uchu zvyčajne možné od veku 6 mesiacov. V prípade dojčiat mladších ako 6 mesiacov je ušný kanál stále príliš úzky, čo znamená, že teplota ušného bubienka sa nedá správne zaznamenať a dosiahnuté výsledky sú zvyčajne nízke.

• Nemôžete merať teplotu chorého ucha alebo inej poruchy (napr. V prípade výtoku) alebo v poškodenom uchu (napr. Po pretrhnutí ušného bubienka) alebo po operácii. V takýchto prípadoch by ste mali použitie vždy konzultovať s lekárom.

• Použitie teplomeru na meranie v uchu niekoľkých ľudí môže viesť

k infekcii aj po očistení a dezinfekcii špičky teplomera. Ak máte pochybnosti, poraďte sa s lekárom..

• S týmto teplomerom nepoužívajte bezpečnostné násady.

• Ak sa ucho zahreje v dôsledku ležania na ňom, výsledok merania v tomto uchu bude nadhodnotený. Počkajte chvíľu alebo mierajte v druhom uchu.

• Prítomnosť maziva v uchu môže ovplyvniť správnosť merania. V prípade potreby očistite ucho pred meraním.

• Udržujte pokoj počas merania, nehýbte sa.

• Výsledky merania teploty povrchu čela zodpovedajú meraniu teploty v ústnej dutine. V oboch prípadoch by mali byť výsledky konzultované s lekárom.
Neporovnávajte výsledky meraní počas spánku s výsledkami meraní po prebudení; obvykle teplota tela počas spánku je nižšia.


• Nevykonávajte merania do 30 minút od návratu z ihriska, po cvičení alebo kúpania.

POMIAR TEMPERATURY CIAŁA NA CZOLE
MERANIE TEPLOTY NA ČELE


Poznámka: Pri meraní teploty / čela musí byť pokožka úplne suchá a bez kozmetiky. Koža na čele tiež nemôže byť podráždená. Môže to mať vplyv na výsledok merania teploty.

1. Na zapnutie teplomera stlačte a podržte tlačidlo merania na čele alebo tlačidlo zapnutia / vypnutia na uchu na 1 sekundu.
Po vlastnom teste budete počuť 2 krátke pípnutia.

2. Založte adaptér (kryt snímača) na meranie na čele, teplomer priložte na čelo v blízkosti jedného zo spánkov. Stlačte a podržte tlačidlo merania na čele a jemne posuňte teplomer na čelo do jeho stredu.

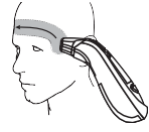


3.Uvoľnite tlačidlo merania na čele. Koniec merania je signalizované krátkym pípnutím, a výsledok merania sa zobrazí na obrazovke.

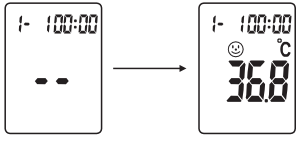

Poplach horúčky (iba v režime merania telesnej teploty). Ak je nameraná teplota vyššia alebo rovná 38 ° C, rozsvieti sa červená LED dióda.

POMIAR TEMPERATURY CIAŁA W UCHU
MERANIE TEPLOTY V UCHU

1. Na zapnutie teplomera stlačte a podržte tlačidlo merania na čele alebo tlačidlo zapnutia / vypnutia na uchu na 1 sekundu.

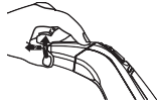

2. Odstráňte adaptér (kryt snímača) jemným zatlačením smerom nahor a potiahnutím smerom dopredu.

3. Uistite sa, že snímač i zvukový kanál sú čisté. Pretože ušný kanál je mierne zakrivený, pred vložením senzora opatrne zasuňte špičku smerom k zadnej časti hlavy. V dôsledku toho môže byť senzorový povrch nasmerovaný priamo na tympanickú membránu.



Nastavenie hlavy na snímanie teploty:
U detí mladších ako 1 rok: jemne vytiahnite ušnicu smerom hore a dozadu.

U detí starších ako 1 rok: Stojte za dieťaťom. Jemne vytiahnite ušnicu smerom dopredu, aby narovnal ušný kanál.



4.Opatrne vložte koniec snímača, stlačte tlačidlo a podržte tlačidlo zapnutia / vypnutia na uchu na 1 sekundu.

5. Uvoľnite tlačidlo. Koniec merania je signalizovaný krátkym pípnutím a výsledok merania sa zobrazí na obrazovke.



Poplach horúčky (iba v režime merania telesnej teploty). Ak je nameraná teplota vyššia alebo rovná 38 ° C, rozsvieti sa červená LED dióda.

MERANIE TEPLOTY / KVAPALINY OBJEKTU

1. Na zapnutie teplomera stlačte a podržte tlačidlo merania na čele alebo tlačidlo zapnutia / vypnutia na uchu na 1 sekundu. Po vlastnom teste budete počuť 2 krátke pípnutia.


2. Stlačte súčasne tlačidlá na 3 sekundy: pamäťové tlačidlo MEM a tlačidlo SET na prepnutie teplomeru do režimu merania teploty objektu alebo tekutiny. Na obrazovke sa objaví symbol.

3. Nasmerujte snímač na objekt alebo kvapalinu (udržiavajte vzdialenosť 3 cm) a potom stlačte tlačidlo merania na čele raz alebo tlačidlo merania v uchu.
(senzor nikdy neponárajte do kvapaliny)

4. Po meraní počujete krátke pípnutie a na obrazovke sa zobrazí nameraná teplota.

5. Upozorňujeme, že zobrazený výsledok je nameraná povrchová teplota predmetu alebo kvapaliny. Nie je totožná s vnútornou teplotou objektu.

6. Ak sa chcete vrátiť do režimu merania tela, súčasne stlačte a podržte 2 tlačidlá na 3 sekundy: pamäťové tlačidlo MEM a tlačidlo SET.Symbol by mal zmiznúť z obrazovky.

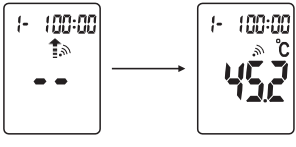

FUNKCIA PAMATI

NAČÍTANIE PAMATI MERANÍ




Môžete načítať 30 meraní uložených v pamäti a konzultovať ich so svojím lekárom

1. Keď je zariadenie zapnuté, stlačte MEM pamäťové tlačidlo, aby sa zobrazil posledný výsledok merania s dátumom, časom a režimom merania.

2. Ďalšie stlačenie tlačidla pamäte MEM zobrazí merania uložené v pamäti.

3. Po 30 meraniach sa každé nové meranie uloží na miesto najstaršieho výsledku (najstarší výsledok sa vymaže) bez toho, aby ste museli vymazať celú pamäť.

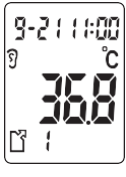




CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
ČISTENIE A SKLADOVANIE


ČISTENIE SNÍMAČA MERANIA

Senzor ľahko vyčistite tampónom namočeným v alkohole. Na čistenie snímača nepoužívajte vodu.

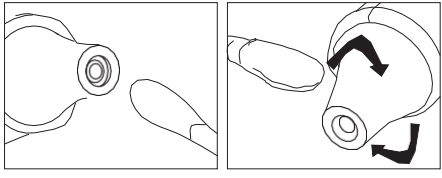

TEPLOMER

Teplomer vyčistite mäkkou suchou handričkou.
Nepoužívajte vodu na čistenie teplomeru; neponárajte ho do vody.
Na čistenie nepoužívajte čistiace prostriedky, ako sú rozpúšťadlá, benzín atď.
Obrazovka a povrch snímača by mali byť chránené pred poškriabaním. Teplomer by mal byť chránený pred extrémnymi teplotami, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, nárazmi a pádom.

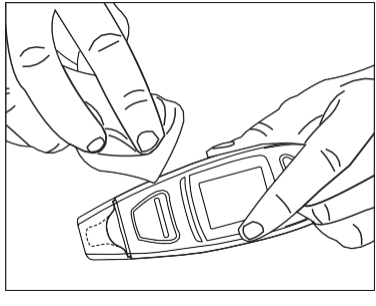

INFORMACJE O BŁĘDACH
INFORMÁCIE O CHYBÁCH

Ak prístroj nefunguje správne alebo ak je meranie teploty nesprávne, zobrazí sa príslušný oznam.

Zobrazenie	Možná príčina	Riešenie
	Výsledok merania je vyšší ako: 1. V režime "Telo" - 43ºC (109.4ºF) 2. V režime "Objekt" - 100 ° C (212,0 ° F)	Merajte len v teplotnom rozmedzí uvedenom v tejto príručke. V prípade potreby vyčistite snímač. Ak chyba pretrváva, obráťte sa na predajcu.
	Výsledok merania je nižší ako: 1. V režime "Body" - 34 ° C (93,2 ° F) 2. V režime "Objekt" - 0 ° C (32,00 ° F)	
	Pracovná teplota nespadá do rozsahu 16ºC — 35ºC (60,8 ºF — 95ºF)	Merajte len v teplotnom rozmedzí uvedenom v tejto príručke.

ZASTOSOWANE NORMY

POUŽITÉ SYMBOLY

Tento výrobok je v súlade s ustanoveniami smernice o zdravotníckych pomôckach 93/42 / EHS. Produkt bol vyrobený s súlade s nasledujúcimi normami:

• ASTM E1965-98

Štandard pre infračervené teplomery periodické meranie teploty pacienta.

• ISO 14971

Zdravotnícke zariadenia - Aplikácia riadenia rizík pre zdravotnícke pomôcky. Klasifikácia podľa IEC / EN 60601-1, odsek 5:

- Zariadenie na batérie
- IPX0
- Zariadenie sa nesmie používať v blízkosti horľavých zmesí, anestetík s kyslíkom alebo oxidom dusným
- Pre nepretržitú prevádzku

CE 0197	TUV Nr
	Zoznámte sa s pokynmi
	Zariadenie typu BF (snímač)
	Zlikvidujte výrobok v súlade s platnými predpismi
	Výrobca
EC REP	Wellkang Ltd 29 Harley St. W1G 9QR LONDON, U.K.


LIKVIDÁCIA NEPOTREBNÉHO ZARIADENIA PODĽA NORIEM V EURÓPSKEJ ÚNII

Prítomnosť tohto symbolu na výrobku alebo jeho obale znamená, že sa ho nemôžete likvidovať ako domový odpad. Preto ste zodpovední za likvidáciu použitého zariadenia a ste povinný ho doručiť na autorizované miesto recyklácie pre zbytočné elektrické a elektronické zariadenia. Triedenie, zneškodňovanie a recyklácia odpadového zariadenia pomôže zachovať prírodné zdroje a zabezpečiť, aby sa recyklácia vykonávala v súlade so zásadami rešpektovania zdravia a životného prostredia. Ďalšie informácie o miestach na zber odpadu získate od miestnych úradov pre likvidáciu odpadu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Rozsah merania:

Teplota tela: 34ºC ~43ºC (93,2ºF ~109,4ºF)

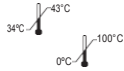

Teplota predmetov: 0ºC ~100ºC (32,0ºF ~212,0ºF)

Presnosť kalibrácie:

Teplota tela 34ºC~43ºC: ±0,3ºC



Meranie na čele: (93,2ºF~109,4ºF ±32,54ºF)

Teplota tela 35,5ºC ~ 42ºC: ±0,2ºC



Meranie v uchu: (95,9ºF ~107,6ºF ±32,36ºF)

presnosť mimo dosahu: ±0,3ºC (32,54ºF)

Teplota predmetov: ≤30ºC : ±1,5ºC

> 30ºC : ±5% (vo vzdialenosti 3cm)

Rozlíšenie (zobrazenie): 0.1ºC

Podmienky používania: 16ºC~35ºC (60,8ºF~95ºF)



relatívna vlhkosť do 95%

Podmienky skladovania: -25ºC ~ +55ºC (-13ºF ~ +131ºF)



Relatívna vlhkosť do 95%

Napájanie: 2 alkalické batérie 1.5V AAA,

Váha: približne 65g (s batériami),

Rozmery: približne 134 x 42.4 x 47.6 mm

TABLICE EMC

Usmernenie a vyhlásenie výrobcu - emisie EMC

<table>
<tr><td colspan="3">Bezkontaktný teplomer SKY je určený na použitie v elektromagnetickom prostredí špecifikovanom nižšie. Zákazník alebo používateľ teplomera by sa mal uistiť, že teplomer sa používa v takomto prostredí.</td></tr>
<tr><td></td><td>kompatibilita</td><td>Pokyny pre elektromagnetické prostredie</td></tr>
<tr><td>RF emisia CISPR 11</td><td>Skupina 1</td><td rowspan="3">Teplomer SKY používa RF žiarenie len na interné účely. Vysielanie RF je veľmi nízke a nemá vplyv na okolité elektrické zariadenia.

Teplomer SKY je vhodný na použitie vo všetkých zariadeniach vrátane domácich zariadení napojených na nízkonapäťovú elektrickú sieť budov určených na domáce použitie.</td></tr>
<tr><td>RF emisia CISPR 11</td><td>Trieda B</td></tr>
<tr><td>Súlad emisií podľa IEC 61000-3-2</td><td>Neuplatňuje sa</td></tr>
<tr><td>Kolísanie napätia, kolísanie emisií podľa IEC 61000-3-3</td><td>Neuplatňuje sa</td><td></td></tr>
</table>

TABLICE EMCT

Usmernenie a vyhlásenie výrobcu - emisie EMC

Bezkontaktný teplomer SKY je určený na použitie v elektromagnetickom prostredí špecifikovanom nižšie. Zákazník alebo používateľ teplomera by sa mal uistiť, že teplomer sa používa v takomto prostredí.

Test odolnosti	Skúšobná úroveň IEC 60601	Úroveň zhody	Elektromagnetické prostredie
Elektrostatický výboj IEC 61000-4-2	+/- 6kV kontakt +/- 8 kV vzduchu	+/- 6kV kontakt +/- 8 kV vzduchu	Podlahy by mali byť drevené, betónové alebo vyrobené z keramických dlaždíc. Ak sú podlahy pokryté syntetickým materiálom, relatívna vlhkosť by mala byť najmenej 30%.
Magnetické pole napájania s frekvenciou (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Hladina magnetického poľa zdrojov energie by mala byť v medziach platných pre typické komerčné alebo nemocničné zariadenia.

TABLICE EMCT

Usmernenie a vyhlásenie výrobcu - emisie EMC

Bezkontaktný teplomer SKY je určený na použitie v elektromagnetickom prostredí špecifikovanom nižšie. Zákazník alebo používateľ teplomera by sa mal uistiť, že teplomer sa používa v takomto prostredí.

Test odolnosti	Skúšobná úroveň IEC 60601	Úroveň zhody	
Vysielaný rádiofrekvenčný signál IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-8	80 MHz do 2,5 GHz	3 V/m	Prenosné a mobilné rádiokomunikačné zariadenia by sa mali používať vo vzdialenosti od všetkých komponentov zariadenia vrátane káblov, ktoré nie sú menšie ako odporúčaná vzdialenosť, vypočítaná z frekvenčnej rovnice vysielača. Odporúčaná vzdialenosť d=1.2 √P d=1.2 √P 80MHz to 800MHz d=2.3 √P 800MHz to 2,5GHz kde P je maximálny príkon vysielača (W) podľa špecifikácií výrobcu, a d je odporúčaná vzdialenosť v metroch (m). Pevnosť poľa odvodená od fixné RF vysielače, určené meraním elektromagnetického poľa na poli, by mali byť nižšie ako úroveň zhody pre každý frekvenčný rozsah b Interferencie sa môžu objaviť v blízkosti zariadení označených nasledujúcim symbolom:

Poznámka 1: Pri frekvencii 80 MHz a 800 MHz sa uplatňuje vyšší frekvenčný rozsah.

Poznámka 2: Tieto pokyny sa nemusia vzťahovať na každú situáciu. Rozširovanie elektromagnetických vĺn je ovplyvnené absorpciou a odrazom rôznych štruktúr, objektov a ľudí.

a) intenzita poľa z blízkych pevných vysielačov, ako napríklad základňových vysielačov pre telefonovanie pomocou bezdrôtovej komunikácie(mobilné, bezdrôtové), rádiotelefóny, prenosné amatérske rádiové vysielače, vysielače AM, FM a TV sa nedajú vypočítať teoreticky s primeranou presnosťou. S cieľom vyhodnotiť elektromagnetické prostredie generované rádiovými vysielačmi by sa mali zvážiť meraniaelektromagnetického poľa. Ak intenzita poľa, meraná v blízkosti zariadenia, presahuje prípustnú úroveň dodržiavania RF, je potrebné vykonať pozorovanie, či zariadenie funguje správne. Ak zistíte nejakú poruchu, môžu byť potrebné ďalšie nápravné opatrenia, ako napríklad otočenie zariadenia iným smerom alebo jeho presun na iné miesto.b. Pre frekvenčný rozsah od 150 kHz do 80 MHz by intenzita poľa mala byť nižšia ako 3 V / m.

TABLICE EMC

Usmernenie a vyhlásenie výrobcu - emisie EMC

Odporúčaná vzdialenosť medzi stacionárnym a prenosným RF zdrojom a SKY teplomerom

Teplomer SKY je určený na použitie v elektromagnetickom prostredí, v ktorom sú regulované rušivé vplyvy.

Zákazník alebo používateľ infračerveného teplomera SKY môže pomôcť zabrániť elektromagnetickému rušeniu udržiavaním minimálnej vzdialenosti medzi prenosným rádiovým komunikačným zariadením (vysielačom) a infračerveným teplomerom, ako je odporúčané nižšie, podľa maximálneho výkonu komunikačných zariadení

Maximálny výkon vysielača W	Minimálna vzdialenosť od vysielača m		
	150 kHz to 80 MHz $d=1.2\sqrt{P}$	**80 MHz to 800 MHz** $d=1.2\sqrt{P}$	**800 MHz to 2.5 GHz** $d=2.3\sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

Pre vysielače s maximálnym výstupným výkonom, ktoré nie sú uvedené vyššie, odporúčaná vzdialenosť v metroch (m) sa môže odhadnúť na základe rovnice frekvencie vysielača, kde P je maximálny príkon menovitého výkonu vo wattoch (W) podľa údajov výrobcu. Poznámka 1: Pri frekvencii 80 MHz a 800 MHz sa uplatňuje vyšší frekvenčný rozsah. Poznámka 2: Tieto pokyny sa nemusia vzťahovať na každú situáciu. Rozširovanie ektromagnetických vĺn je ovplyvnené absorpciou a odrazom rôznych štruktúr, objektov a ľudí.

WARUNKI GWARANCJI
PODMIENKY ZÁRUKY

Záruka sa poskytuje na chyby dizajnu a / alebo materiálu zistené do 2 rokov od dátumu nákupu.
Ak si kúpite chybný prístroj, máte právo na bezplatnú výmenu a / alebo opravu.
Záruka sa nevzťahuje na príslušenstvo a komponenty, ktoré sú opotrebované kvôli bežnému používaniu.
Zariadenia je možné opravovať len v autorizovanom technickom servise.
Zariadenie by malo byť odoslané do autorizovaného technického servisu do 8 dní od zistenia poruchy.
Akékoľvek opravy mimo rozsahu záruky budú vykonané na náklady majiteľa zariadenia.
Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním, nedodržaním návodu na obsluhu alebo situáciou, kedy vada nebola spôsobená chybou výrobcu (spadnutie, doprava v nevhodných podmienkach atď.).
Záruka neposkytuje náhradu za priame alebo nepriame škody alebo majetkové škody spôsobené počas vypnutia zariadenia.
Záruka je platná od dátumu nákupu, ktorý je uvedený v doklade o kúpe, ktorý musí byť poskytnutý spolu so záručnou kartou.
V prípade nedodania správne vyplnenej záručnej karty alebo dokladu o kúpe nebude záruka akceptovaná.
Ak zariadenie stále nefunguje správne,
kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Mlongauer s.r.o.

KARTA GWARANCYJNA

INFOLINKA:+421940404831
SERVIS VITAMMY: Baby´s, Hlavná 43, 951 53 Babindol

ZÁRUČNÝ LIST MUSÍ BYŤ VYPLNENÝ
Doložte ho spolu s chybným zariadením.
PRE ZÁRUKU JE DÔLEŽITÝ DOKLAD O NÁKUPE

TYP PRODUKTU

Model:

Sériové číslo:

Dátum nákupu:

Podpis a pečiatka predajcu

ÚDAJE KUPUJÚCEHO

Meno a priezvisko:

Adresa:

Č.tel.:

Popis chyby:

Podpis potvrdzujúci prijatie

Záručných podmienok

Distribútor pre SR, ČR, Maďarsko:

Mlongauer s.r.o.
ul. Farská 12
949 01 Nitra
SLOVENSKO

Infolinka pomoci a technickej podpory: +421 940 404 831

Výrobca:
AViTA
Corporation
9F, No.78, Sec.1, Kwang-Fu Rd.,
San-Chung District,
24158 New Taipei City,
Taiwan (R.O.C.)

No.858, Jiao Tong Road,
Wujiang Economic Development Zone
Jiangsu Province, P.R.C.
Postcode: 215200
Made in P.R.C.
Wyprodukowano w Chinach

0197

EC REP
Wellkang Ltd
29 Harley St.
W1G 9QR
LONDON, U.K.

VITAMMY®

SKY